



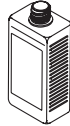

assistina

Lista de control semanal


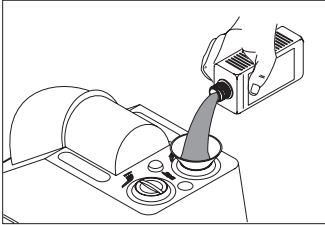


**¡ Controle los niveles de líquidos !
¡ Rellénelos si es necesario !**

Service Oil:
500 ml – 02675910


Detergente:
1000 ml – 02680200

Set 02680500:
1000 ml Detergente y 500 ml Service Oil

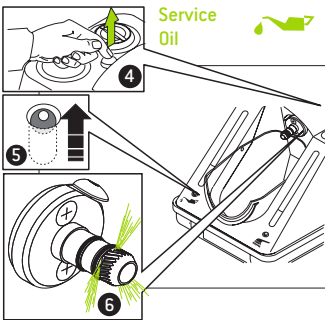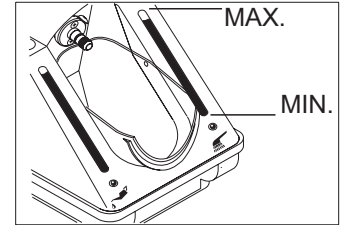


Service Oil

¡ Controle el funcionamiento !

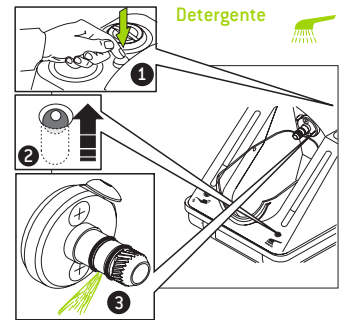

Detergente

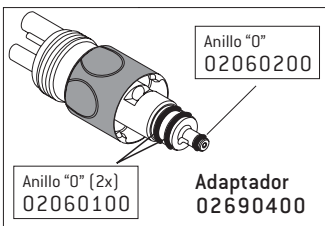


Anillo "O"
02060200


Anillo "O" [2x]
02060100

Adaptador
02690400



**¡ Controle los anillos "O" !
¡ Observe bien la posición
correcta y / o
posibles defectos !**

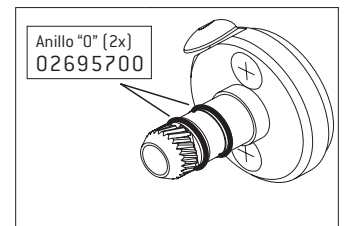

Anillo "O" [2x]
02695700

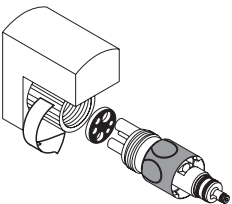

**¡ Atornille bien las conexiones !
(Hermeticidad)**

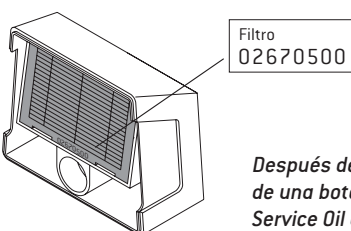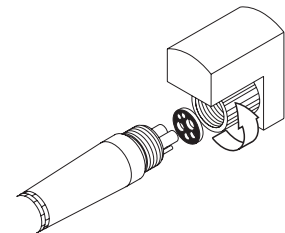

Filtro
02670500

Después del consumo
de una botella de
Service Oil de 500 ml
(corresp. a 7000 ciclos)

¡ Cambio del filtro !

Filtro
02675200

Anual

