



## Brugsanvisning



CE

assistina  
301 plus

# Indholdsfortegnelse

---

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Symboler .....</b>                      | <b>4</b>  |
| I brugsanvisningen .....                   | 4         |
| På det medicinske udstyr .....             | 5         |
| På emballagen/på beholderen .....          | 6         |
| <b>1. Indledning .....</b>                 | <b>7</b>  |
| <b>2. Udpakning .....</b>                  | <b>9</b>  |
| <b>3. Leveringsomfang .....</b>            | <b>10</b> |
| <b>4. Sikkerhedsanvisninger .....</b>      | <b>11</b> |
| <b>5. Beskrivelse .....</b>                | <b>12</b> |
| Forside .....                              | 12        |
| Bagside .....                              | 13        |
| <b>6. Ibrugtagning .....</b>               | <b>14</b> |
| Første påfyldning .....                    | 17        |
| <b>7. Drift .....</b>                      | <b>20</b> |
| Vedligeholdelsesprogram .....              | 20        |
| Påsætning og afgang af adapteren .....     | 21        |
| Oliesmøring af fastspændingssystemet ..... | 24        |
| <b>8. Rengøring .....</b>                  | <b>25</b> |
| <b>9. W&amp;H tilbehør .....</b>           | <b>26</b> |

---

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>10. Vedligeholdelse .....</b>                | <b>28</b> |
| Udskiftning af o-ringene .....                  | 29        |
| Udskiftning af filterpakken .....               | 30        |
| Udskiftning af luftfiltret .....                | 31        |
| <b>11. Service .....</b>                        | <b>32</b> |
| Returforsendelser .....                         | 32        |
| Klargøring af returforsendelsen .....           | 33        |
| <b>12. Tekniske data .....</b>                  | <b>34</b> |
| <b>13. Bortskaffelse .....</b>                  | <b>35</b> |
| <b>Garantibevis .....</b>                       | <b>36</b> |
| <b>Autoriseret W&amp;H-servicepartner .....</b> | <b>37</b> |

## Symboler

## I brugsanvisningen



ADVARSEL!  
[Risiko for personskade]



OBS!  
[Risiko for tingskade]



Almene oplysninger,  
uden fare  
for mennesker eller ting



CE-mærkning



Må ikke bortskaffes sammen  
med husholdningsaffaldet.



OBS!  
Brandfarlig væske og damp.

# Symboler

## På det medicinske udstyr



Bemærk brugsanvisningen



Produktionsdato



CE-mærkning



Medicinsk udstyr



DataMatrix Code  
til produktinformation  
inklusive UDI (Unique Device  
Identification)



Producent



Varenummer



Serienummer

# Symboler

## På emballagen/på beholderen



Opad



Skrøbeligt




Skal beskyttes mod fugt



Varemærket "Der Grüne Punkt" –  
Duales System Deutschland  
GmbH



Varemærke fra RESY OfW GmbH  
til markering af genanvendelig  
transportemballage og  
sekundær emballage af papir  
og pap.

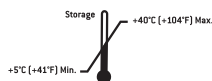

Tilladt  
temperaturområde  
under opbevaring



CE-mærkning



Medicinsk udstyr



Bemærk brugsanvisningen



Producent



Forsigtig! I henhold til amerikansk lovgivning er salg af dette medicinske udstyr kun tilladt af eller på ordinerings af en tandlæge, en læge eller andet sundhedsfagligt personale med en licens i den amerikanske stat, hvor han eller hun praktiserer, og hvor det medicinske udstyr skal anvendes.



Skal beskyttes mod varme



Skal anvendes inden



OBS!  
Brandfarlig væske og damp.



EUH210 Sikkerhedsdatablad kan  
på anmodning rekvireres.

# 1. Indledning

---

## **For din egen og dine patienters sikkerhed**

Inden apparatet tages i brug første gang, bedes du læse brugsanvisningen. I den forklares det, hvordan du håndterer det medicinske udstyr, så du sikrer dig fejlfri funktion samt økonomisk og sikker behandling.



Følg sikkerhedsanvisningerne.

## **Anvendelsesområder**

Anordning til rengøring af spraykanalerne og til smøring af bevægelige dele på tandlægetekniske overførselsinstrumenter, turbiner, luftmotorer og luftdrevne instrumenter til fjernelse af tandsten.



Enhver anden brug kan beskadige det medicinske udstyr og herved medføre risici og fare for brugeren og tredjemand.

Ved oparbejdningen af overførselsinstrumenterne med det medicinske udstyr sker der ingen desinfektion og ingen sterilisering. Efter rengøring af spraykanalerne og oliesmøring af overførselsinstrumenterne med det medicinske udstyr, er det nødvendigt med en afsluttende desinfektion og sterilisering.

## **Brugerens kvalifikation**

Vi har udviklet og fremstillet W&H Assistina med henblik på målgruppen tandlæger, tandhygiejniskere og deres tandmedicinske fagassistenter.

# Indledning

---



## Produktion i henhold til EU-direktiv

Det medicinske udstyr opfylder kravene i forordningen (EU) 2017/745.

## Producentens ansvar

Producenten kan kun tage ansvaret for påvirkningerne på det medicinske udstyrs sikkerhed, pålidelighed og ydeevne, når nedenstående anvisninger overholdes:


- > Det medicinske udstyr skal anvendes i overensstemmelse med denne brugsanvisning.
- > Det medicinske udstyr har ingen dele, som kan repareres af brugeren (med undtagelse af: Udskiftning af o-ringe, beholdere, filtre og luftfiltre). Ændringer eller reparationer må kun udføres af en autoriseret W&H-servicepartner (se side 37).
- > Ved utilladelig åbning af enheden bortfalder kvalitetsgarantien eller øvrige krav.

Usagkyndig brug, ikke-tilladt montering, ændring eller reparation af det medicinske udstyr, tilsidesættelse af vores anvisninger eller brug af tilbehør og reservedele, der ikke er godkendt af W&H, fritager os fra enhver form for garantiydelse eller andre krav.




Alle alvorlige hændelser, der er forekommet i forbindelse med det medicinske udstyr, skal indberettes til producenten og de ansvarlige myndigheder!


## 2. Udpakning

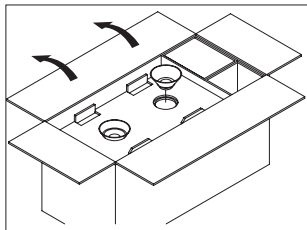


Gør brugsanvisningen tilgængelig.  
Tag den hvide og den grønne tragt ud.

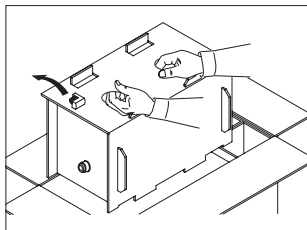

Tag basisadapteren af.  
Tag Assistina ud i den isolerede æske.

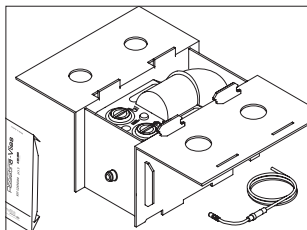

Åbn æsken ved åbningen.  
Tag lufttilslutningsslangen ud af kuplen og basisudstyret.

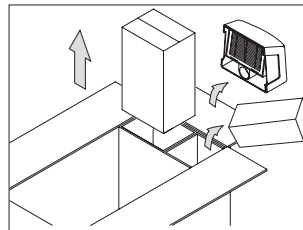

Tag serviceolien, rengøringsmidlet, udsugningsfiltret og specialtilbehøret ud af siderommerne.

W&H-emballagen er miljøvenlig og kan anvendes til genbrug.

Vi anbefaler dog at du opbevarer originalemballagen.

### 3. Leveringsomfang

---

- > W&H rengørings- og vedligeholdelsesapparat Assistina (REF 00030125, 00030140)
- > Komplet udsugningsfilter
- > Basisadapter REF 02685000
- > Påfyldningstragt, hvid, REF 02689300
- > Påfyldningstragt, grøn, REF 02689400
- > Lufttilslutningsslange 2 m, REF 02697000, komplet
- > Basisudstyr 5 lag engangsgaze REF 02690300
- > 2 reservetætninger REF 02680600 og  
2 reserve-o-ringe REF 02695700
- > Brugsanvisning

## 4. Sikkerhedsanvisninger

---



**Følg altid sikkerhedsanvisningerne.**

- > Apparatet må kun stilles op i rum med tilstrækkelig udluftning!
- > Hold apparatet lukket under vedligeholdelsesprocessen!



**GHS02 OBS!**

H226 Brandfarlig væske og damp.


- > P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- > P233 Hold beholderen tæt lukket.
- > P280 Bær beskyttelseshandsker/øjebeskyttelse.
- > P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- > P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til de lokale/  
regionale/nationale/internationale bestemmelser.



- > Stil det medicinske udstyr på en plan, vandret overflade.


## 5. Beskrivelse

Forside

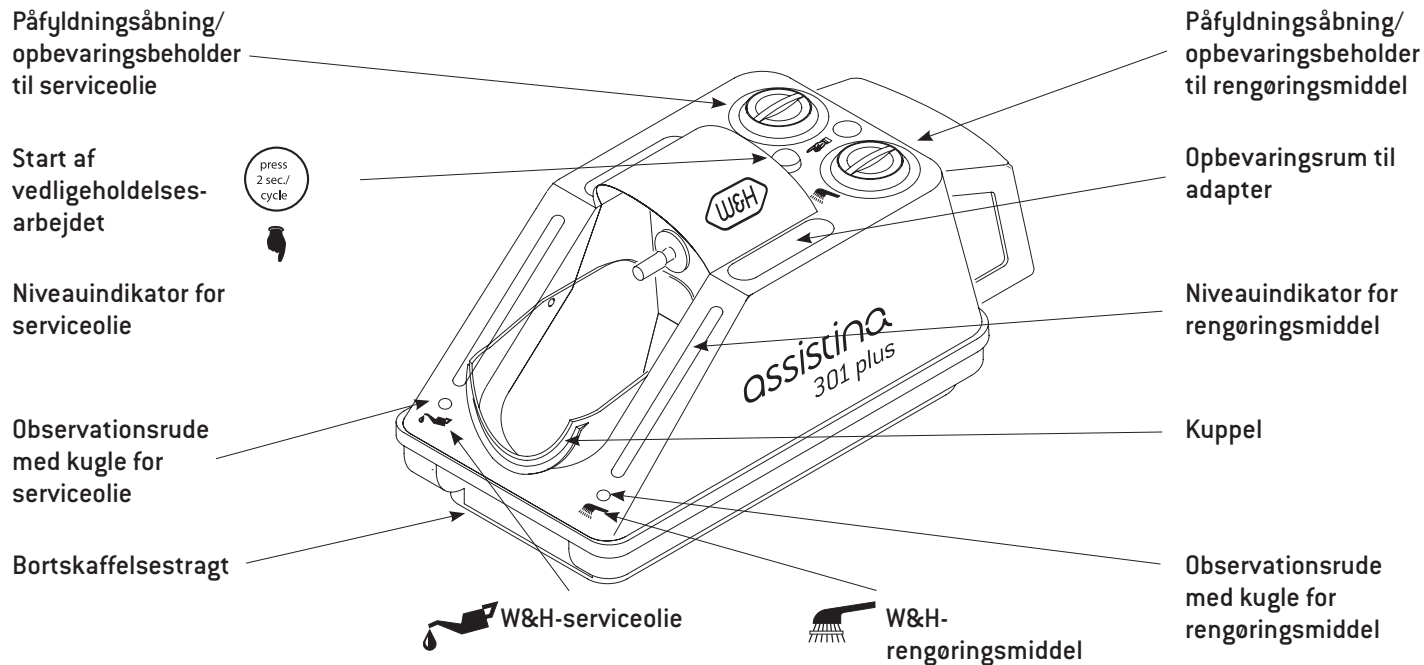

Komplet  
udsugningsfilter


Hurtiglukkende  
kobling til  
trykluft

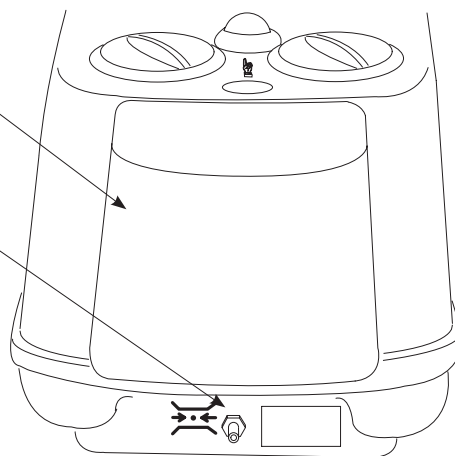

## 6. Ibrugtagning




- > Serviceolien skal have stuetemperatur, når den påfyldes.
- > Vær forsigtig med aldrig at bytte om på tragterne (hvid til hvid, grøn til grøn), og opbevar dem et støvfrit sted!
- > Kontrollér niveauindikatoren!

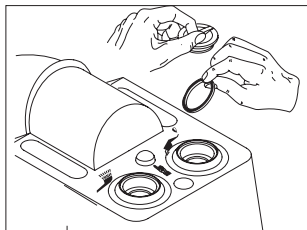


Skru begge låg af, og fjern begge  
transporttætninger (funktionsfejl)!


# Ibrugtagning

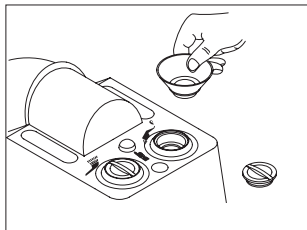


Skru låget af den hvide opbevaringsbeholder.  
Sæt den hvide tragt i.

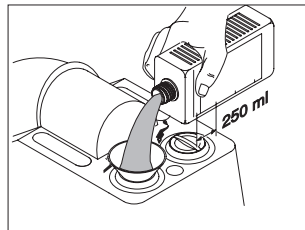


Fyld 250 ml  
rengøringsmiddel på.

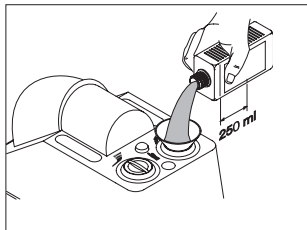


Fyld 250 ml serviceolie på.

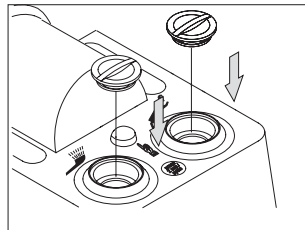


Luk opbevaringsbeholderen  
samt serviceolien og  
rengøringsmidlet.

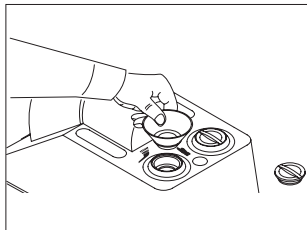

Skru låget af den grønne opbevaringsbeholder.  
Sæt den grønne tragt i.

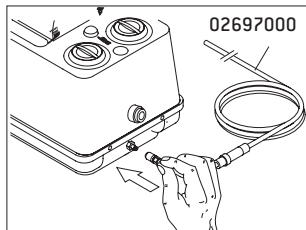

Sæt tilslutningsslangens hurtiglukkende kobling på koblingstilslutningen på Assistina. Tilslut tryklufslangen.

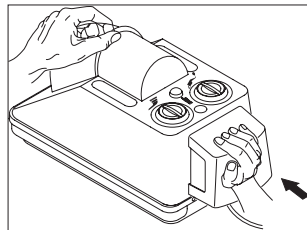

Sæt udsugningsfiltret godt på.




Det luftfilter, der er indbygget i tilslutningsslangen, er kun et finfilter. Det kan ikke rense ufiltreret og muligvis forurenede kompressorluft. Udskift finfilteret, hvis det er snavset.




> Brug kun ikke-forurenede, oliefriske, tørre og filtrerede trykluft i henhold til ISO 7494-2.

## Ibrugtagning

## Første påfyldning

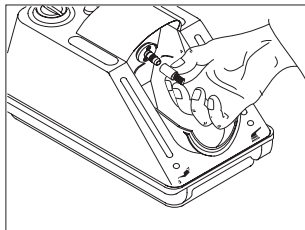


Træk drypbeskyttelsen af vedligeholdelsesstuds, og opbevar den et sikkert sted. Luk kuplen.

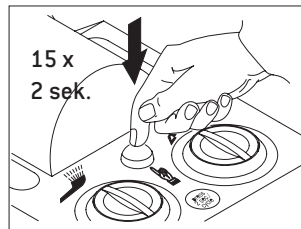

Tryk på startknappen ca. 15 gange i 2 sekunder. Vent 2 sekunder mellem hvert tryk.

 Hvis der ikke ses nogen væske eller hvis der ikke er nogen væske i bortskaffelsestragten, så er forsyningsslangerne ikke helt fyldte endnu.

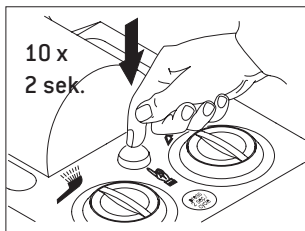


Tryk 10 gange på knappen i 2 sekunder.


 > I forbindelse med testen må der ikke sættes et overførselsinstrument på, og der må ikke tilsluttes nogen turbine, luftmotor eller instrument til fjernelse af tandsten!

> Tag adapteren af, hvis den er sat på vedligeholdelsesstuds.


# Ibrugtagning

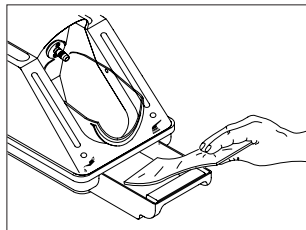

Læg et gazeindlæg i  
bortskaffelsestragten.

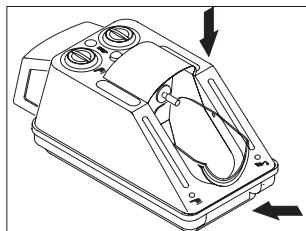

Luk kuplen og  
bortskaffelsestragten.

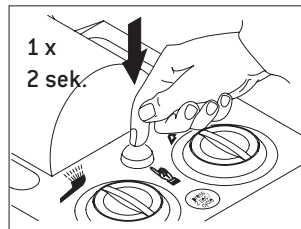

Tryk én gang  
på startknappen  
i 2 sekunder.



Hvis gazeindlægget er fugtet, fungerer det.  
Gentag i modsat fald proceduren 2 til 3 gange.  
Gennemvædede gazeindlæg skal bortskaffes som servietter til overfladedesinfektion.



I tilfælde af driftsfejl (f.eks. vibrationer, unormale lyde, hvis instrumentet bliver varmt, hvis instrumentet svigter, i tilfælde af utæthed) skal det medicinske udstyr straks tages ud af drift, og du skal så henvende dig til en autoriseret W&H-servicepartner.

# Ibrugtagning

## Funktionsindikator

Kontrollér funktionsindikatoren med jævne mellemrum!

- > Tryk på startknappen i 2 sekunder.  
I højre observationsrude ses en grøn kugle for rengøringsmidlet.
- > Slip startknappen.  
I venstre observationsrude ses en grøn kugle for serviceolien.




Efter et par sekunder synker de to kugler igen.

Den korrekte vedligeholdelse kan ses på begge funktionsindikatorer.

Hvis kuglen ikke er synlig under kørslen af programmet, er det tegn på en funktionsfejl.

## Funktionskontrol af det mekaniske drev

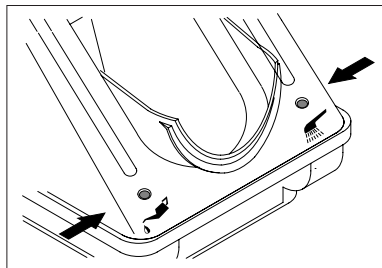

- > Sæt et overførselsinstrument med isat roterende instrument på vedligeholdelsesstudsen på Assistina.
- > Tryk på startknappen i 2 sekunder.



Vedligeholdelsescyklussen begynder, og det roterende instrument roterer.

Hvis det roterende instrument ikke roterer, er det tegn på en funktionsfejl.

## 7. Drift

## Vedligeholdelsesprogram




- > Brug beskyttelsespåklædning, beskyttelsesbriller, beskyttelsesmaske og handsker.
- > Følg instruktionerne omkring "Hygiejne og vedligeholdelse" i brugsanvisningen til overførselsinstrumenterne.


### Overførselsinstrumenter med ISO-kobling

Vedligeholdelsesprogrammet afsluttes automatisk efter ca. 35 sekunder.


> Drej kuplen nedad.

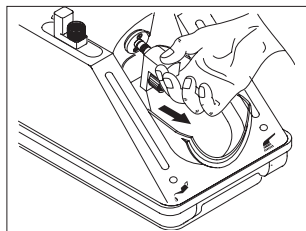


Tryk på den grønne udløsningsknap, og træk basisadapteren af. Opbevar adapteren i opbevaringsrummet.

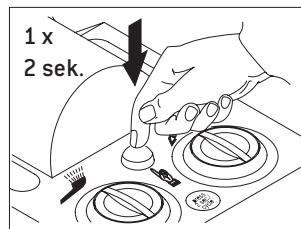

Tryk 1 gang på startknappen i ca. 2 sekunder. Åbn kuplen efter vedligeholdelsen.

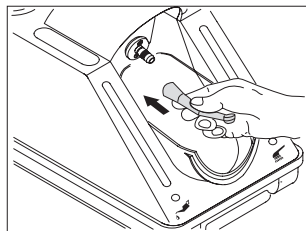

Sæt overførselsinstrumentet med sprayudgangsåbningen nedad til anslaget på vedligeholdelsesstudsen. Luk kuplen og bortskaffelsestragten.

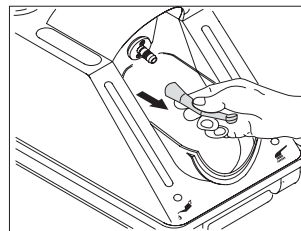


Tryk på den grønne udløsningsknap på vedligeholdelsesstudsen, og tag samtidigt overførselsinstrumentet af.

## Turbiner

Vedligeholdelsesprogrammet afsluttes automatisk efter ca. 35 sekunder.


> Brug basisadapteren REF 02685000 med standard 4-hulstilslutning.

> Drej kuplen nedad.

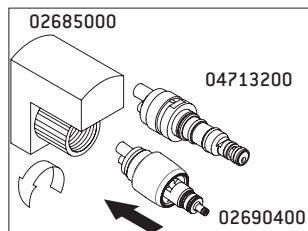

### W&H-turbiner med hurtigkobling:

Skru basisadapteren sammen med adapteren. Adapterne egner sig ikke til brug på turbineslangen.

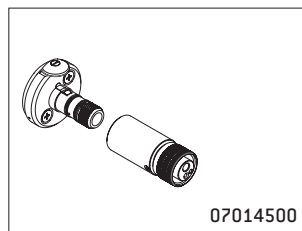


### Turbiner med

> 2- eller 3-hullers Borden-tilslutning og


> forbindelse fra sprayluft til drivluft:

Skru basisadapteren sammen med turbinen. Sæt basisadapteren på motorstudsden.

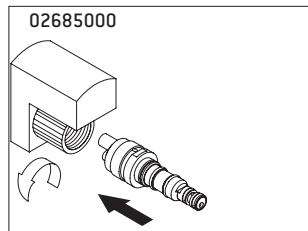


### Andre turbiner med hurtigkobling:

Skru basisadapteren sammen med den pågældende hurtigkobling (f.eks. adapter 02692000, 04713200 ...).

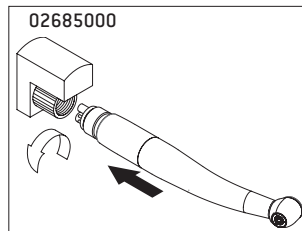


### Turbiner med standard 4-hulstilslutning:

Skru basisadapteren sammen med den pågældende turbine.

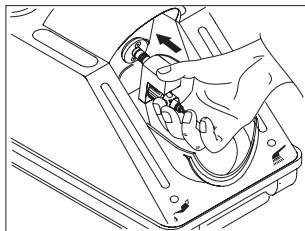


Sæt adaptergruppen eller adaptergruppen med turbinen på vedligeholdelsesstudsens til anslaget.

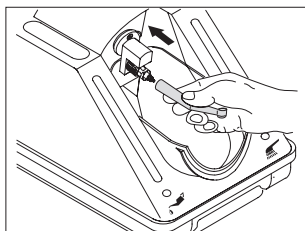

Sæt turbinen med hurtigkobling på sprayudgangsåbningen nedad til anslaget på adaptergruppen. Luk kuplen og bortskaffelsestragten.



Tryk 1 gang på startknappen i ca. 2 sekunder. Åbn kuplen efter vedligeholdelsen.

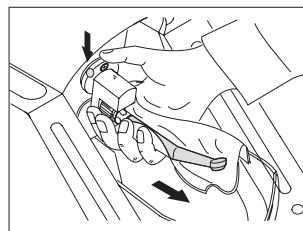

Tryk på den grønne udløsningsknap på vedligeholdelsesstudsens, og tag samtidigt turbinen af adaptergruppen.

### Luftmotorer og luftdrevne instrumenter til fjernelse af tandsten

Vedligeholdelsesprogrammet afsluttes automatisk efter ca. 35 sekunder.

- > Brug basisadapteren REF 02685000 med standard 4-hulstilslutning.
- > Indstil i denne forbindelse luftmotorens drejering til højre- eller venstregang (i "nulstillingen" udføres der ingen vedligeholdelse).
- > Vedligehold dem på samme måde som turbiner (se side 21).




## FG-vinkelstykker

- > Rengør spændetangen mindst én gang om ugen.
- > Tag det roterende instrument ud.
- > Brug adapteren 02693000.




Brug beskyttelsespåkledning, beskyttelsesbriller, beskyttelsesmaske og handsker.

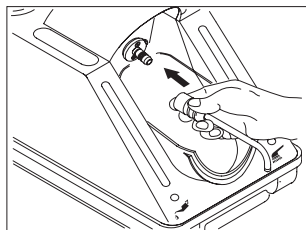


Sæt adapteren på vedligeholdelsesstudsens med udgangsåbningen vendt nedad. Kuplen forbliver i første omgang åben.



Tryk 1 gang på startknappen i ca. 2 sekunder.

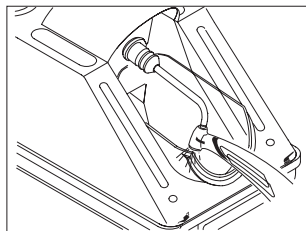

Tryk overførselsinstrumentet på adapteren nedefra. Støt overførselsinstrumentet på kanten af kuplen.

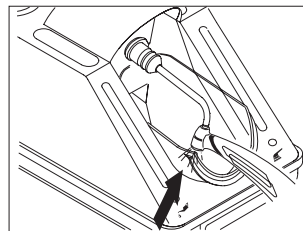

Tryk overførselsinstrumentet ind mod adapteren i ca. 10 sekunder. Luk kuplen. Lad den resterende tid af vedligeholdelsescyklussen køre.

## 8. Rengøring



Vær opmærksom på dine lokale og nationale lovgivning, retningslinier, normer og bestemmelser for rengøring og desinfektion.




> Brug beskyttelsespåkledning, beskyttelsesbriller, beskyttelsesmaske og handsker.



### Rengøringsmidler


> Brug kun vaske- og rengøringsmidler, som er beregnet til rengøring af medicinsk udstyr af metal og plastic.

### W&H anbefaler udvendig rengøring af Assistina

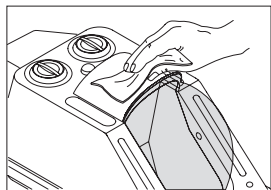

- > Én gang om ugen eller efter behov.
- > Brug W&H-rengøringsmidlet til udvendig rengøring af kabinettet.

### Rengør kuplen og bortskaffelsestragten

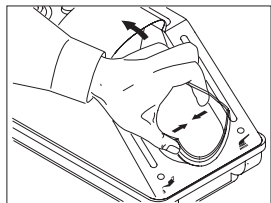

- > Efter behov
- > Tryk kuplen en smule sammen.
- > Løft kuplen ud af holderen.
- > Brug W&H-rengøringsmidlet til indvendig rengøring af kuplen.
- > Rengør bortskaffelsestragten i en termodesinfektor.

## 9. W&H tilbehør

---



Brug kun originalt tilbehør og originale reservedele fra W&H eller tilbehør, der er godkendt af W&H!

### Specialtilbehør

**02676400** Drypbeskyttelse til vedligeholdelsesstuds

**02679000** Adapter til aftagelige vinkelstykkehoveder

**02680600** Tætning

**02685000** Basisadapter

**02689300** Påfyldningstragt, hvid

**02689400** Påfyldningstragt, grøn

**02690400** Adapter til alle W&H produkter med systemet Roto Quick

**02691000** Adapter, der passer til overførselsinstrumenterne T1 CLASSIC fra firmaet Sirona Dental Systems

**02692000** Adapter, der passer til turbiner fra serierne T1, T2, T3 fra firmaet Sirona Dental Systems

**02693000** Adapter til fastspændingssystem

**05204600** Entran vinkelstykkestud

**02697000** Lufttilslutningsslange 2 m, med forskrunding 6 x 4 mm

**04713200** Adapter, der passer til Multiflex-tilslutningen fra firmaet Kaltenbach & Voigt

**07014500** Adapter Assistina Borden

## W&H tilbehør

---

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| <b>02675200</b> | Luftfilter til lufttilslutningsslange 02697000    |
| <b>02695700</b> | O-ring til vedligeholdelsesstuds                  |
| <b>02670500</b> | Filterpakke                                       |
| <b>02675910</b> | 500 ml W&H-serviceolie                            |
| <b>02680200</b> | 1000 ml W&H-rengøringsmiddel                      |
| <b>02680500</b> | Pakke med W&H-serviceolie og W&H-rengøringsmiddel |
| <b>02690300</b> | Basisudstyr 5 lag engangsgaze                     |
| <b>02694500</b> | Engangsgaze, pakke med 20 stk.                    |

## 10. Vedligeholdelse

---

### **Regelmæssig kontrol af Assistina**

Det er nødvendigt at foretage regelmæssig kontrol af funktionen og sikkerheden:

#### **Ved hver brug:**

- > Kontrollér funktionsindikatoren.

#### **En gang om ugen:**

- > Kontrollér niveauindikatorerne.


#### **En gang om året:**

- > Foretag en funktionskontrol (side 19).
- > Kontrollér finfilteret i lufttilslutningsslangen for snavs.

## Vedligeholdelse



- > Udskift straks beskadigede eller utætte o-ringe.
- > Brug ikke skarpt værktøj!

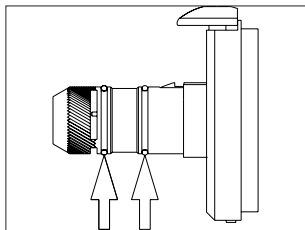


Kontrollér o-ringene på vedligeholdelsesstudsene. Udskift o-ringene i tilfælde af synlige defekter eller hver anden måned. Udskift straks manglende o-ringe.



O-ringene kan udskiftes uden specialværktøj. Fedtfrie fingre letter udskiftningen.

2 reserve-o-ringe  
REF 02695700 er  
hensigtsmæssige.

## Udskiftning af o-ringene

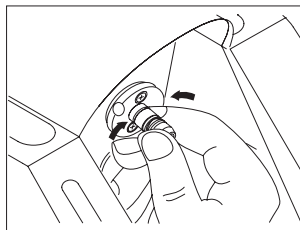


Tryk o-ringens fast sammen med tommel- og pegefinger, og træk o-ringens af. Sæt en ny o-ring på.




### Udskiftning af filterpakken

- > Grib aldrig ind i udsugningsfiltrets lameller (fare for beskadigelser)!
- > Foretag kun vedligeholdelse, hvis der er isat et udsugningsfilter med funktionsdygtig filterpakke i W&H Assistina.


> Udskift filterpakken i udsugningsfiltret efter ca. 7.000 vedligeholdelsescykler (svarende til forbrug af en flaske W&H-serviceolie på 500 ml).

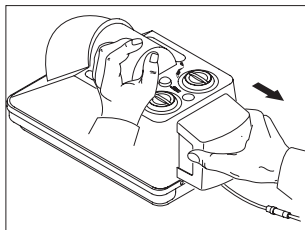

Træk udsugningsfiltret vandret  
bagud og af.

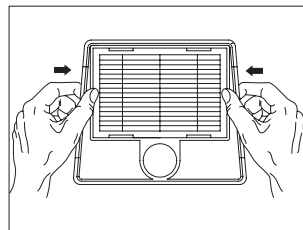

Tag filterpakken ud af  
emballagen.  
Tryk filterpakken ind i  
filterhuset ved rammen.  
Sæt udsugningsfiltret korrekt  
på igen.

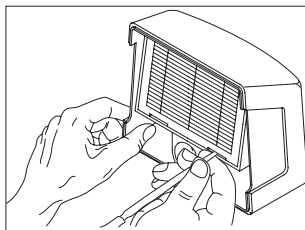

Tryk filterpakken ud med en  
egnet genstand.  
Skal bortskaffes som  
specialaffald.

## Vedligeholdelse


## Udskiftning af luftfiltret




Inden luftfiltret udskiftes, skal den centrale lufttilførsel lukkes.




Udskift luftfiltret ved tilsmudsning eller mindst én gang om året.

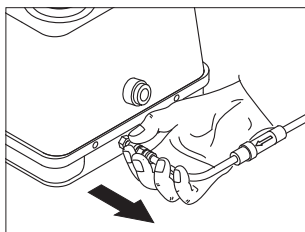


Tag lufttilslutningsslangen af.

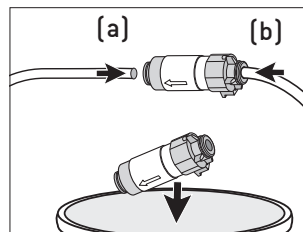

Udskift luftfiltret, og sæt lufttilslutningsslangen (a, b) på.

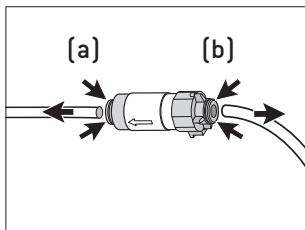

Skub ringen (a, b) hen til luftfiltret, og træk lufttilslutningsslangen af.

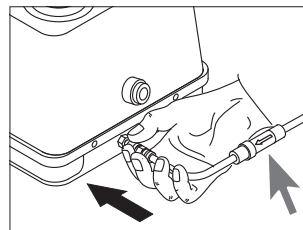

Sæt lufttilslutningsslangen på.



Vær opmærksom på luftfiltrets gennemstrømningsretning.

### Returforsendelser

> Henvend dig til det ansvarlige dentallager eller et af vores servicekontorer ved eventuelle spørgsmål (se side 37)




Returvarer skal returneres i originalemballagen!


2 transporttætninger  
REF 02680600 er  
hensigtsmæssige.

## Service


## Klargøring af returforsendelsen

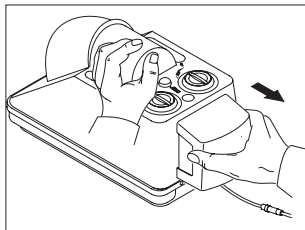


Træk udsugningsfiltret vandret af.

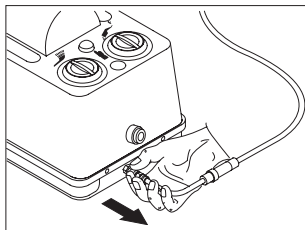


Frakobl lufttilslutningsslangen.

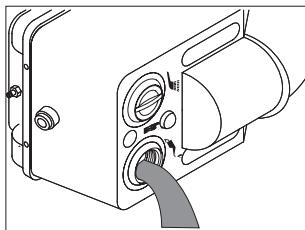


Tøm opbevaringsbeholderne med rengøringsmiddel og serviceolie. Beholderne må ikke tømmes samtidigt. Rengøringsmidlet og serviceolien må ikke blandes!

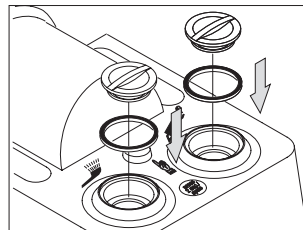

Læg en tætning i hver påfyldningsåbning. Skru alle låg på. Sæt transporttætningen på den anden beholder, inden den første beholder tømmes.

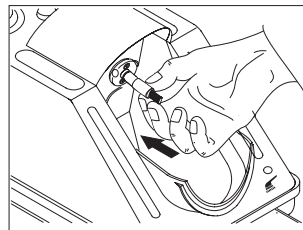

Sæt drypbeskyttelsen REF 02676400 på vedligeholdelsesstuds.

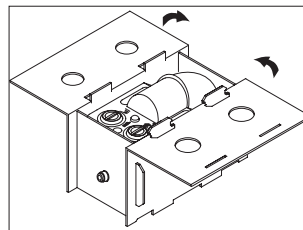

Hvis den ikke længere findes: Bestil W&H-emballage fra dit lager, eller brug en sikker reserveemballage.

## 12. Tekniske data

---

|                     |                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Højde:              | 223 mm                                                                                                                                                             |
| Bredde:             | 190 mm                                                                                                                                                             |
| Dybde (med filter): | 415 mm                                                                                                                                                             |
| Vægt:               | 2,70 kg                                                                                                                                                            |
| Luftforbrug         | ca. 60 NI/min.                                                                                                                                                     |
| Lydstyrke:          | 63 dB (A) (i en afstand på 50 cm)                                                                                                                                  |
| Flowtryk:           | 4 bar til 10 bar (regulering foregår med indbygget automatisk trykregulator)                                                                                       |
| Påfyldningsmængde:  | 250 ml W&H-serviceolie F1, tilstrækkeligt til ca. 3.500 vedligeholdelsescykler<br>250 ml W&H-rengøringsmiddel, tilstrækkeligt til ca. 2.500 vedligeholdelsescykler |

### Omgivelsesbetingelser

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Temperatur under transport:  | 0 °C til +50 °C (+32 °F til +122 °F)   |
| Temperatur under opbevaring: | +5 °C til +40 °C (+41 °F til +104 °F)  |
| Temperatur under brug:       | +10 °C til +40 °C (+50 °F til +104 °F) |

## 13. Bortskaffelse

---



Sørg for, at delene ikke er kontaminerede, når de bortskaffes.



Vær opmærksom på dine lokale og nationale lovgivning, retningslinier, normer og bestemmelser for bortskaffelse.

> Medicinsk udstyr



> Emballage

# Garantibevis

Dette W&H produkt er fremstillet med stor omhu af højt kvalificerede fagfolk. En lang række forskellige tests og kontroller garanterer problemfri funktion. Du bedes være opmærksom på, at garantikravene kun gælder, når alle anvisninger i den vedlagte brugsanvisning bliver overholdt.

**W&H påtager sig som producent ansvaret for materiale- eller produktionsfejl fra købsdatoen inden for en garantiperiode på 12 måneder. Garantien dækker ikke tilbehør og forbrugsmaterialer.**

Vi kan ikke påtage os noget ansvar for skader som følge af usagkyndig behandling eller i tilfælde af reparationer udført af tredjemand, der ikke er autoriseret af W&H.

Garantikrav skal rettes til leverandørerne eller en autoriseret W&H-servicepartner og købsnotaen skal vedlægges. I tilfælde af at der ydes garanti, vil dette hverken forlænge garantien eller en eventuel forældelsesfrist for mangelsbeføjelser.

# 12 måneders garanti

## Autoriseret W&H-servicepartner

---

Besøg W&H på internettet på <http://wh.com>

Under menupunktet "Service" finder du nærmeste autoriserede W&H-servicepartner.

Eller scan QR-koden.



**Producent**

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria

t +43 6274 6236-0, f +43 6274 6236-55  
office@wh.com wh.com

Form Nr. 50458 ADK  
Rev. 019 / 20.04.2020  
Ret til ændringer forbeholdes