

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su
distribuidor o
en **wh.com**



El agua más pura para todos los sistemas



multidem


Tratamiento del agua de nueva generación

Aproveche ahora las numerosas ventajas que le ofrece la instalación de su nuevo sistema de depuración de agua Multidem de W&H.

Multidem ofrece un agua desmineralizada de gran calidad para la generación de vapor en las autoclaves. Con ello se garantiza un rendimiento óptimo y homogéneo y la prolongación de la vida útil de su esterilizador o equipo de depuración. Además, el dispositivo está equipado con una pistola de pulverización especialmente idónea para la limpieza del instrumental antes de la esterilización.



Un manejo extremadamente fácil

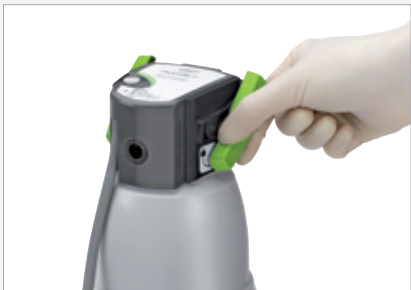

1. Para sustituir un cartucho gastado, abra el asa de cierre.



2. Gire el asa de cierre hasta llegar al tope, pulse el botón de barrido para la descarga de la presión y quite el cabezal del filtro del cartucho gastado.



3. Una vez retirada la tapa protectora, coloque verticalmente el cabezal del filtro en un nuevo cartucho. Ahora Multidem estará de nuevo plenamente operativo.

Compatible con todos los dispositivos

El sistema de tratamiento del agua también se puede utilizar en muchas de las autoclaves y equipos de tratamiento convencionales.



* Válido para los dispositivos Lisa Fully Automatic a partir de la fecha de fabricación 04/2011

1. Conexión directa
Multidem permite conectarse directamente a la Lisa Completamente Automática y a todos los esterilizadores que se rellenan automáticamente.

2. Mediante una pieza de conexión
Con una pieza de conexión (SAT/Water-Supply-Kit) podrán conectarse las autoclaves Lisa, Lisa 300/500 y Lina al Multidem.

3. Relleno manual
El esterilizador Lisa MB, así como todos los esterilizadores que no se rellenan automáticamente podrán hacerlo con la ayuda de la pistola de pulverización.

Principales Ventajas

Facilidad de uso

- › El cambio de cartucho se realiza de forma rápida y sin necesidad de herramientas
- › Es posible colocar los cartuchos sin fijación

Compatible

- › Se puede utilizar en las autoclaves y los equipos de purificación convencionales
- › Implementación flexible en combinación con la pistola de pulverización

Económico

- › No es necesaria una toma de corriente
- › Resina mejorada de intercambio iónico

Seguro

- › El agua pura cumple las recomendaciones y especificaciones pertinentes para el funcionamiento de los esterilizadores de vapor y para el tratamiento de los instrumentos
- › Una buena calidad del agua constante y sin depósitos de cal



Datos técnicos

Modelo:	Multidem C27
Principio de tratamiento de agua:	Desmineralización
Conexión directa al esterilizador:	Sí
Número de esterilizadores conectables:	Hasta 2 unidades
Posibilidad de llenado manual:	Sí (pistola de spray)
Agua desmineralizada según EN 13060 y ANSI/AAMI ST55:	Sí
Calidad de entrada del agua:	Agua potable
Calidad de salida del agua:	0,5-2 µS/cm
Presión de agua (mín./máx.):	2-8,6 bar
Temperatura de entrada del agua:	4-30 °C/40-86 °F
Agua producida:	60 l/h
Dimensiones del equipo (an x al x p):	12,4 x 12,3 x 47,6 cm
Peso:	2,7 kg
Posición de funcionamiento:	Vertical
Alimentación eléctrica externa necesita:	No
Válvula de seguridad Water Block®:	Sí
Dispositivo antirretorno según EN 1717:	Sí
Contenido suministrado:	Cabezal del filtro, cartucho con 2,7 kg, tubos flexibles y conexiones (incl. Water Block®), Pistola de pulverización opcional

Cuando estén los equipos desconectados, tenga en cuenta que el seguro correspondiente para evitar reflujos cumpla las directrices, normas e indicaciones específicas del país.

Distribución:

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italy**
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

Wehadent Ibérica S.L Unipersonal
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**
t +34 96 353 20 20
oficinas.es@wh.com
wh.com