

#whdentalwerk



video.wh.com

Вече при Вашия
дистрибутор
или wh.com



„Това е

ONE



която съкращава
МОЕТО време за работа.“



assistina^{ONE}



ONE за ново ниво на поддръжка

Assistina One е първият избор за поддръжка на дентални инструменти с трансмисия като наконечници, въздушни микромотори и въздушни скалери. Новото поколение апарат с един порт на W&H е оборудвано с изключителната система Quick Connect за куплиране на различни наконечници. Адаптира се без усилие към индивидуалните изисквания и безпроблемно се интегрира във всеки работен процес.



Въртящ се свалям прозорец
Уплътнява зоната за поддръжка и се сваля безпроблемно



Система Quick Connect
Гъвкава смяна между наконечници с Quick ISO и Quick RM адаптори



Стартов бутон с едно натискане
За интуитивно и лесно боравене

Кратко време на цикъл
Само 18 секунди за целия процес на смазване и почистване



Готови за употреба пълнители за презареждане
За бързо, чисто и лесно зареждане на масло за смазване и почистваща течност



HEPA филтър
За спазване на хигиенните стандарти и чиста работна среда



Гладки повърхности
За цялостно почистване на апарата



ONE за перфектна грижа

Целият процес на смазване и почистване на спрей канала е с продължителност само 18 секунди. Това прави Assistina One най-бързото решение за поддръжка в своя клас. Работи само с компресиран въздух и не е необходимо свързване към електричество. Апаратът се настройва и е готов за употреба за нула време. Със своя стартов бутон с едно натискане и практична система с пълнители за презареждане с масло и почистваща течност, Assistina One е модерно решение за поддръжка за дентални практики и клиники с високи изисквания към грижата за наконечниците.



„Това е

ONE



която МЕ
подкрепя.“

ONE за по-прецизна работа

Качествените инструменти с трансмисия изискват качествена поддръжка. Всъщност правилното и професионално обслужване играе ключова роля за дълготрайността и запазването на стойността на наконечниците. Апаратът осигурява перфектна поддръжка и извършва правилно циклите на смазване, необходими за функционирането и дългия експлоатационен живот на денталните наконечници.

ONE за по-ефективна работа

Чрез новаторския процес на пулверизиране на маслото, денталните инструменти с трансмисия се смазват по-бързо и по-добре от всякога. Маслото първо се пулверизира в адаптора, за да образува фина мъгла, която след това се впръсква в инструмента под високо налягане. Замърсяванията в инструмента с трансмисия се отстраняват и всички предавки се смазват без да се задвижват. С активно засмукване и HEPA филтър аерозолите се извличат от камерата, поддържайки чиста и безопасна работна среда.

ONE за повече ефективност

Assistina One осигурява цялостно смазване на всички предавки, правилно почистване на спрей каналите и изсушаване на вътрешните части с компресиран въздух. Почистването на спрей каналите предотвратява запушвания, причинени от варовикови отлагания, и по този начин осигурява безпроблемна работа, по-дълъг експлоатационен живот и по-ниски разходи за обслужване.

Оранжево:

Цялостно смазване на предавките

Зелено:

Правилно почистване на спрей каналите и изсушаване на вътрешните части



ONE за повече удобство

Assistina One отговаря изцяло на нуждите на потребителите в денталните практики. Различни адаптори за високо ниво на гъвкавост, интуитивен дизайн за удобна работа и отлични резултати при обработка: новото поколение на решението за поддръжка с един порт издига грижата за наконечници, микромотори и скалери на изцяло ново ниво.



ONE за по-бърза работа

С революционната система Quick Connect от W&H, смяната между наконечниците никога не е била по-лесна. Просто свържете адаптора Quick ISO или Quick RM и процесът на поддръжка на всички инструменти с трансмисия със стандартна връзка ISO или 4/6 отвора може да започне. Благодарение на големия избор на адаптори Assistina One отговаря на изискванията на всички дентални практики и клиники.

Quick RM за турбини



Quick ISO за прави и обратни наконечници



ONE за повече гъвкавост

За специфични за марката връзки като Roto Quick, просто изберете правилния адаптор, свържете и започнете работа! Сканирайте QR кода за пълното портфолио от адаптори.



Това е ONE, която улеснява **МОЯ работен процес.**

Изберете адаптор.



Свържете наконечника.



Затворете въртящия се прозорец.




Натиснете стартовия бутон. Програмата за почистване и смазване започва автоматично.



Само след 18 секунди процесът на почистване и смазване е завършен и наконечникът е отлично обслужен.



ONE масло

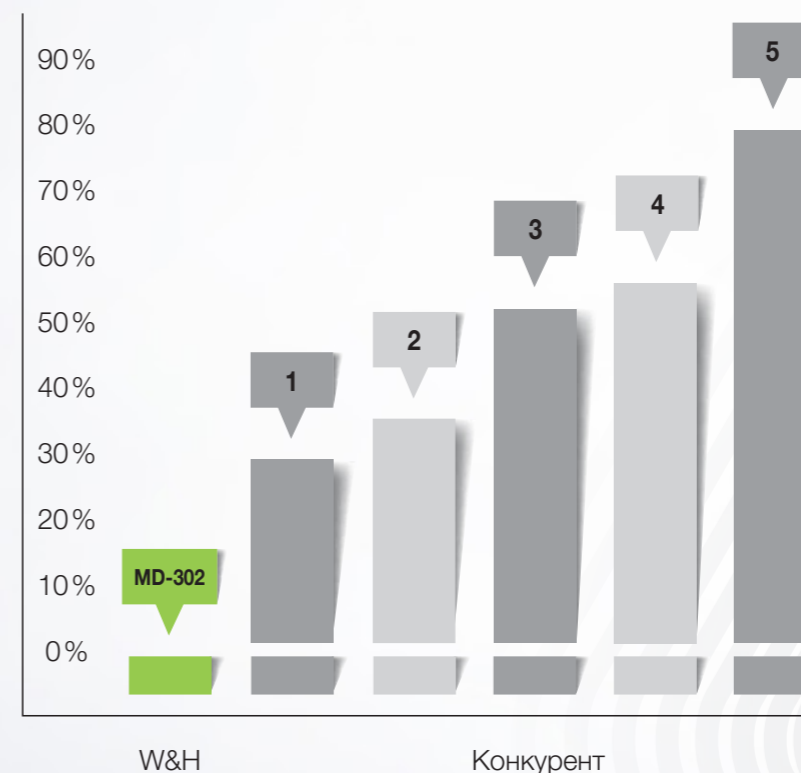

Поддръжката на наконечници с Assistina One е по-рентабилна, отколкото ръчното смазване или други системи. Лабораторните тестове с масла показват, че комплектът Assistina One Care с масло MD-302 води до намаляване на степента на триене, както и до значително по-ниско износване на предавките в сравнение с най-разпространените конкурентни продукти.

Износването на предавките може да бъде намалено от 28% до 77%.

ONE срещу 20



=



*400 ml спрей-флакон с масло

Комплектът Assistina Care се равнява на 20 спрей-флакона с масло MD-400*. Това означава, че могат да бъдат обработени повече от 2800 наконечници, което спестява пари, време и отпадъци. С максимално смазване при минимален разход, Assistina One е изключително икономично решение.

#whdentalwerk
 f @ in v
 video.wh.com

Вече при Вашия
 дистрибутор
 или wh.com



„Това е

ONE

която МЕ
 кара да се
 усмихвам.“



assistina ONE

Бърза, гъвкава и ефективна


Assistina One ускорява ежедневните процеси и улеснява грижата за денталните наконечници. С най-краткото време на цикъл в своя клас и превъзходни резултати Assistina One е първокласно решение за поддръжка - предназначено за дентални специалисти.

W&H AIMS
**Безопасността
 е с предимство!**



В денталната практика хигиената е от първостепенно значение. W&H AIMS трябва да Ви подкрепи тук: с бърз достъп до широка гама от продукти, основни познания и цялата подходяща информация.

За Вашата безопасност и безопасността на Вашите пациенти.
aims.wh.com

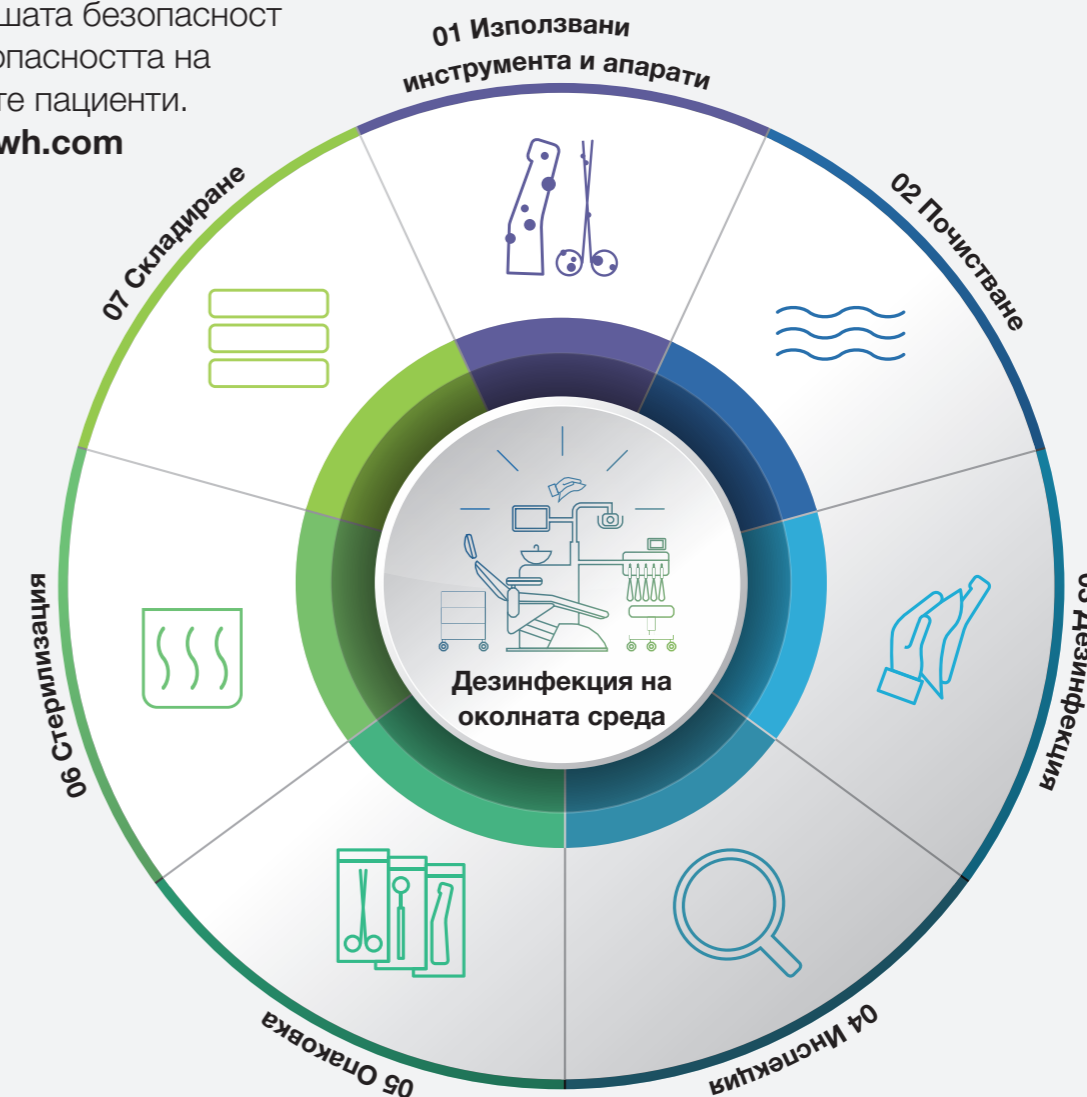

- Обеззаразяване
- Почистване
- Дезинфекция
- Инспекция и хигиена/поддръжка
- Опаковка
- Стерилизация
- Проследимост и съхранение

Технически данни

Търговско наименование: Тип:	Assistina One MB-301
Процес:	Почистване на спрей-канални, смазване
Подходящ за:	Прави и обратни наконечници, турбини, въздушни скалери, въздушни микромотори
Консумация на въздух:	около 50 l/min.
Работно налягане:	5 – 10 bar (вграден автоматичен регулатор на налягането)
Размери (Ш × Д × В):	166 × 383 × 243 mm
Тегло:	2,2 kg
Капацитет:	200 ml W&H Activefluid (почистващ разтвор) 200 ml W&H Service Oil F1



Комплект консумативи Assistina One Care

Комплектът съдържа пълнител с почистващ разтвор, пълнител със Service Oil F1 и HEPA филтър. Всички консумативи могат лесно да се сменят без инструменти.

Производител:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Дистрибуция:

W&H Bulgaria Ltd.
14 Svilenitsa Str.
1463 Sofia, **Bulgaria**
t +359 2 8549565, +359 2 8549566
f +359 2 8549590
office.bg@wh.com
wh.com

Фиг. Снимки. Допълнително оборудване и съдържанието на показаните аксесоари не са включени в съдържанието на доставката.

20662 ABG Rev. 001 / 15.11.2023
Правата за промени запазени