

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf **wh.com**




Piezo- Spitzensystem.

Langlebig. Sicher. Effektiv.
Von Profis für Profis.



W&H Piezo-Spitzensystem

Das W&H Spitzensystem wurde gemeinsam mit Endanwendern entwickelt und speziell auf die technischen Anforderungen der W&H Piezotechnologie abgestimmt. Es ist perfekt für die Anforderungen der jeweiligen Anwendungsgebiete und die einzelnen Behandlungsschritte.

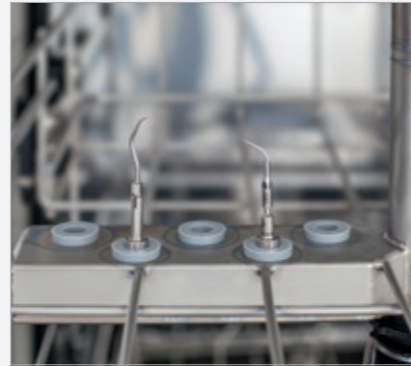

Hygiene und Pflege
Sämtliche Spitzen und der Spitzenwechsler sind thermodesinfizierbar und sterilisierbar.





Schnelle, einfache und sichere Handhabung
Der W&H Spitzenwechsler ermöglicht eine schnelle und sichere Handhabung. Die integrierte Drehmomentkontrolle vermeidet ein Überdrehen und ermöglicht das einfache und sichere Wechseln der Spitze.




Universalspitzen

Einfache, schonende und effiziente supragingivale Zahnsteinentfernung in allen Quadranten.

Scaling

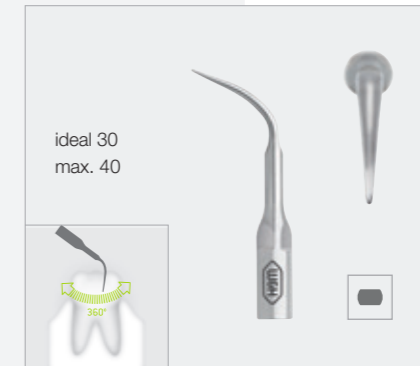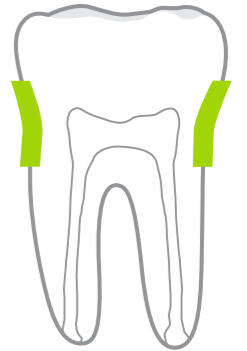


1UQ / 1U / 1US
Zur Grobdeposition von supragingivalem Zahnstein.

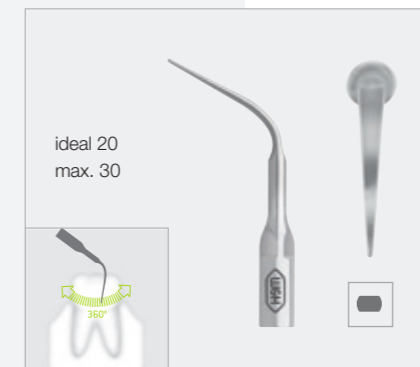

2UQ / 2U / 2US
Zur Feindeposition von supragingivalem Zahnstein, sowie für die Behandlung von Recall Patienten.



3UQ / 3U / 3US
Zur Feindeposition von supragingivalem Zahnstein, besonders geeignet für die Interdentalreinigung.

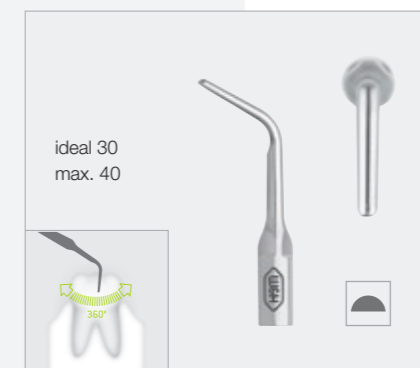


4U
Zur Grobdeposition von supragingivalem Zahnstein, speziell für die Entfernung von großen Zahnsteinflächen.

Parodontologiespitzen

Durch ihre schlanke Form ist ein optimaler und zugleich schonender Zugang zu den Parodontaltaschen möglich.

Paro

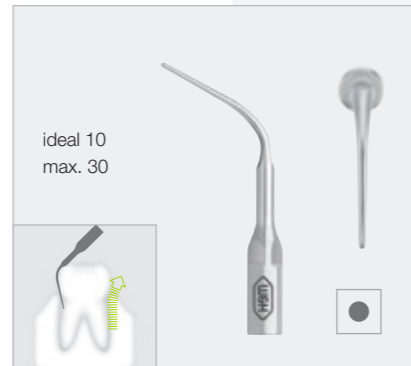

ideal 10
max. 30

1PQ / 1P / 1PS


Entfernung von subgingivalen Ablagerungen, besonders geeignet für tiefe Parodontaltaschen.



ideal 10
max. 30

3PrQ / 3Pr

Rechtsgebogene Spitze für das parodontale Debridement, empfohlen für die Erhaltungsbehandlung von mitteltiefen bis tiefen Taschen sowie Furkationen.

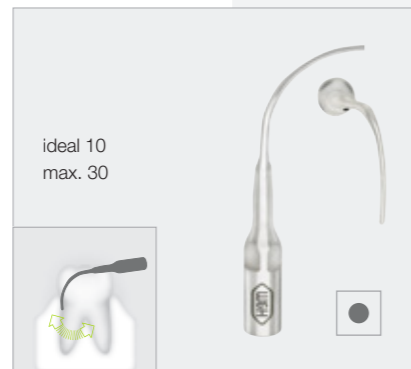

ideal 10
max. 30

3PIQ / 3PI

Linksgebogene Spitze für das parodontale Debridement, empfohlen für die Erhaltungsbehandlung von mitteltiefen bis tiefen Taschen sowie Furkationen.



ideal 25
max. 30

1IQ / 1I Implant-clean



Spitze zur effizienten und schonenden Reinigung von Implantaten und den dazugehörigen Restaurationen.

Für die unterstützende Parodontitistherapie (UPT), Recall und Biofilmmangement.

Parodontologiespitzen

Diamantierte Spitzen unterstützen die gründliche Reinigung der Wurzeloberfläche in der Initialtherapie von Parodontitispatienten.

Paro

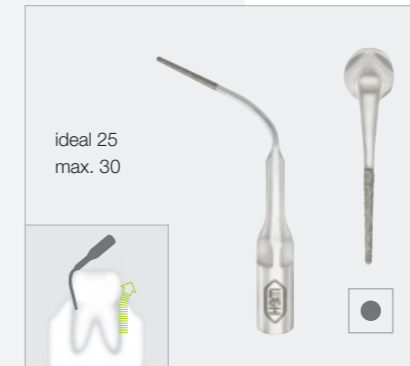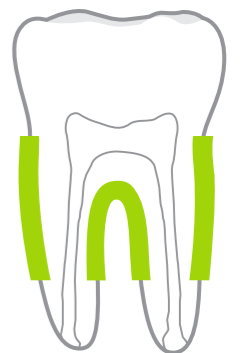

ideal 25
max. 30

4PQ / 4P / 4PS


Diamantierte Spitze zur Reinigung der Wurzeloberfläche.



ideal 25
max. 30

5PrQ / 5Pr


Rechtsgebogene Spitze mit einer Diamantierung zur Reinigung der Wurzeloberfläche.

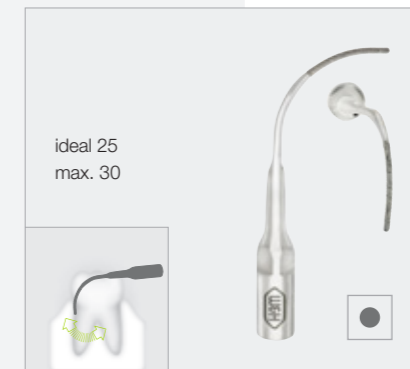

ideal 25
max. 30

5PIQ / 5PI

Linksgebogene Spitze mit einer Diamantierung zur Reinigung der Wurzeloberfläche.

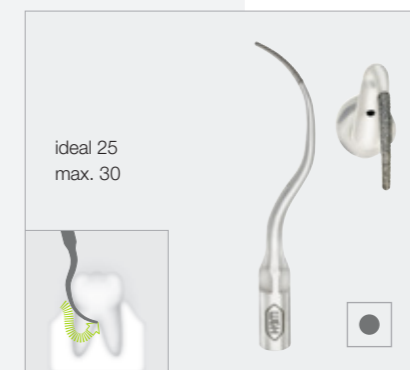

ideal 25
max. 30

5PQ / 5P

Diamantierte Spitze zur Reinigung von Furkationen und Konkavitäten.


Für die initiale Parodontitistherapie und Entfernung von Konkrementen.

Endodontiespitzen

Endo




Ob Spülen eines Wurzelkanals oder die komplexe Revision an einem Endodontiepatienten. W&H bietet Ihnen das perfekte Sortiment an Endospitzen.

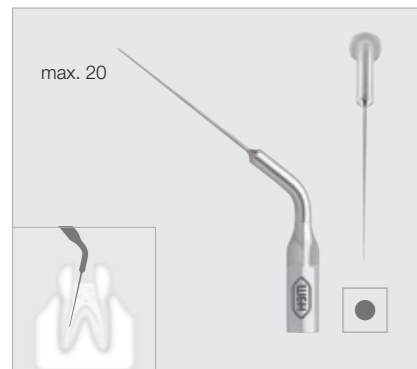

1E / 1ES
Nichtschneidendes Instrument zur effektiven Spülungsaktivierung im Wurzelkanalsystem.



2E
Spitze zum lateralen thermischen Kondensieren von Guttapercha.

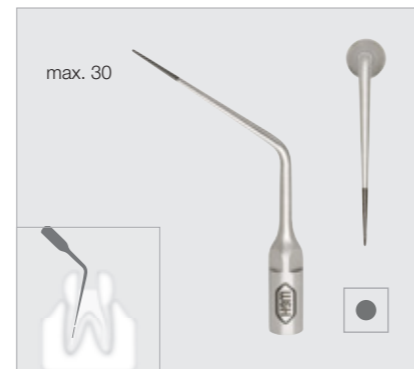

3E
Entfernen von abgebrochenen Wurzelkanal-Instrumenten.



4E
Pulpekammerboden Präparation.




5E
Einvibrieren und Entfernen von Wurzelkanal-Stiften.



6E
Entfernung von Wurzelkanal-Füllungen und Wurzelkanal Kalzifizierungen.

Restorationsspitzen

Restoration

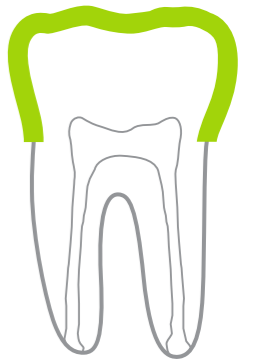


Die Spitzen sind die perfekte Ergänzung zu Ihren Hand- und Winkelstücken und ermöglichen durch die Diamantierung eine hohe Abtragsleistung.




1R
Erweiterung von Fissuren.



2R
Diamantierte Spitze zur Veneerpräparation für eindeutig definierte Präparationsränder bei maximalem Schutz der Gingiva und des Nachbarzahns.

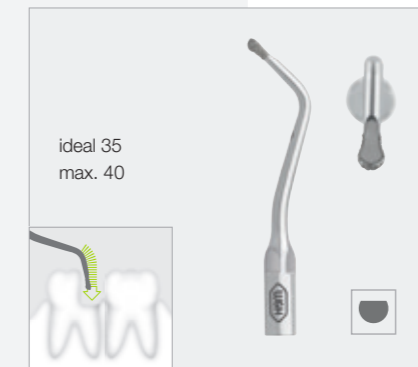

3Rd
Teildiamantierte Spitze zum Finieren approximaler distaler Kavitätenränder.

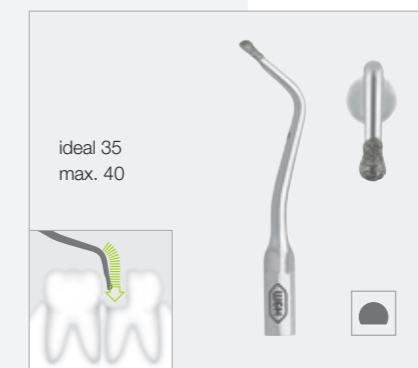

3Rm
Teildiamantierte Spitze zum Finieren approximaler mesialer Kavitätenränder.

Kompatibilität von Spitzen mit W&H Handstücken

	Q-Link*	W&H/EMS/Mectron			W&H/NSK/Satelec**		
	PB-5 L Q	PB-5 L	PA-1 LED	PB-3	PB-5 L S	PB-3 LED S	PB-3 S
Tigon+			X			X	
Proxeo Ultra	X	X			X		
Pyon 2				X			
Built-In	X	X		X	X		X

* Q-Link Spitzen (z. B. 1UQ, 2UQ) sind mit dem PB-5 L Q kompatibel.

** W&H Spitzen mit Satelec Gewinde (z. B. 1US, 2US) sind mit den W&H Handstücken PB-5 L S, PB-3 LED S und dem PB-3 S kompatibel.

Hinweis: EMS®, Mectron®, NSK® und Satelec® sind Marken von Drittparteien, die mit W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH nicht in Verbindung stehen. Bei Verwendung von Spitzen von Drittanbietern hat der Anwender für die korrekte Einstellung der Leistungsparameter des W&H Piezogerätes zu sorgen.

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Ludwigstraße 27
83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**
t +49 8651 904 244-0
f +49 8651 904 244-4
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com