

#whdentalwerk



video.wh.com


Ora disponibile presso
il vostro rivenditore
o su **wh.com**



Set di punte piezoelettriche.


Durevole. Sicuro. Efficace.

Dai professionisti per
i professionisti.

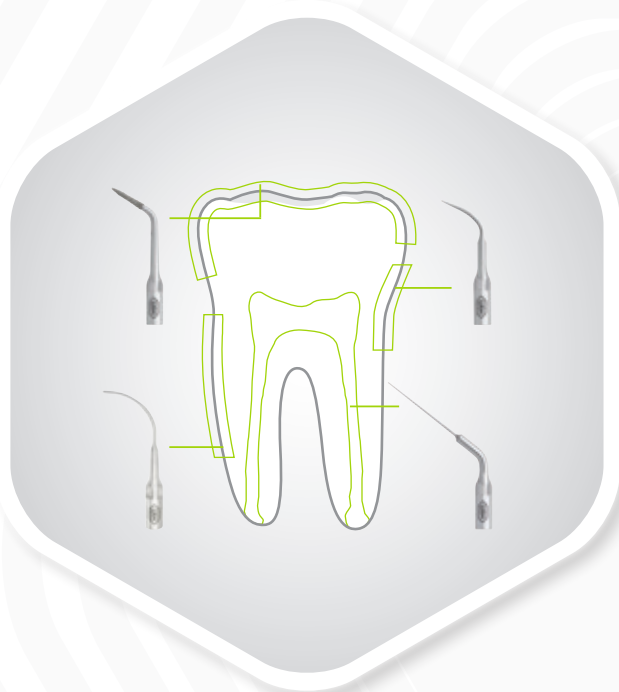

Set di punte piezoelettriche W&H

Il set di punte W&H è stato sviluppato in collaborazione con l'utente finale e adattato in maniera specifica ai requisiti tecnici della tecnologia piezoelettrica W&H. Perfetto per i requisiti di ogni settore applicativo e per ogni singola fase di trattamento.

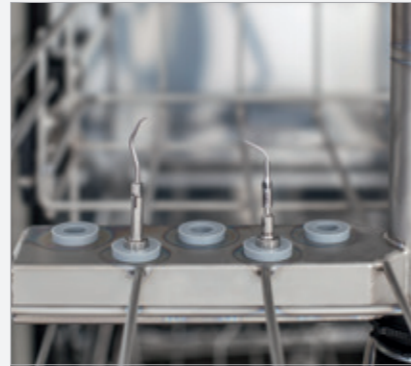

Igiene e manutenzione

Tutte le punte così come lo scambiatore di punte sono termodisinfettabili e sterilizzabili.



Utilizzo rapido, semplice e sicuro



Lo scambiatore di punte W&H consente un impiego rapido e sicuro. Il controllo integrato della coppia impedisce un serraggio eccessivo e consente di sostituire la punta in modo semplice e sicuro.



Punte universali


Rimozione semplice, efficace e delicata di tartaro sovragengivale in tutti i quadranti.

Ablazione

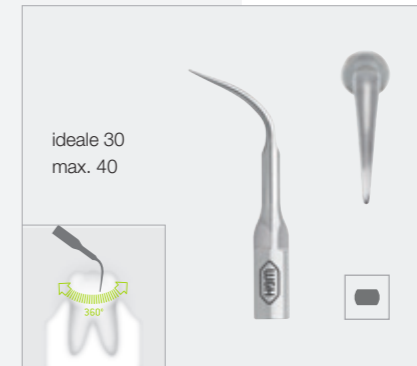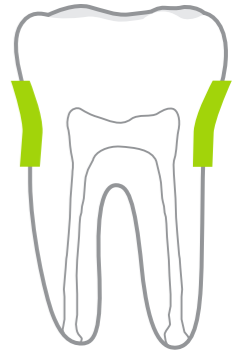


1UQ / 1U / 1US

Per la pulizia grossolana del tartaro sovragengivale.

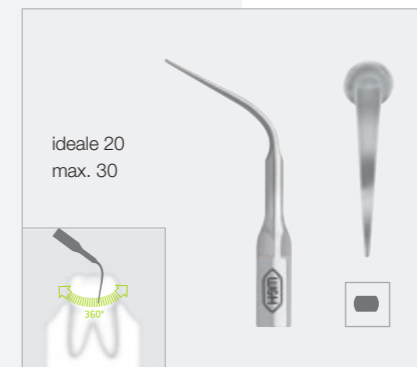


2UQ / 2U / 2US

Per la pulizia fine del tartaro sovragengivale e per il trattamento di pazienti Recall.

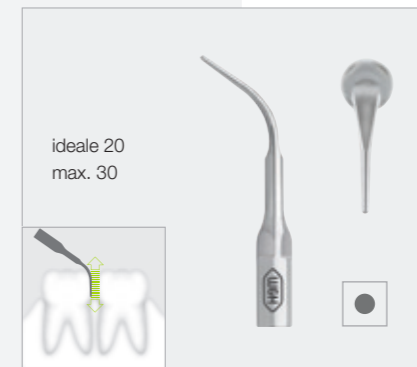

3UQ / 3U / 3US

Per la pulizia fine del tartaro sovragengivale, particolarmente adatta per la pulizia interdentale.

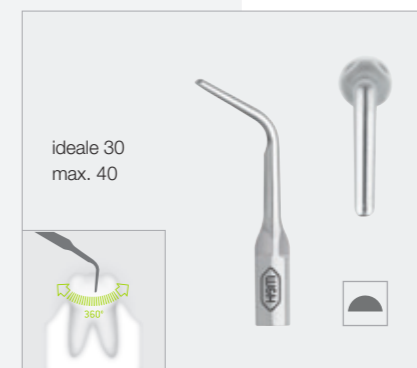


4U

Per la pulizia grossolana del tartaro sovragengivale, in particolare per l'eliminazione di grandi superfici di tartaro.

Punte per parodontologia

Grazie alla forma particolarmente stretta raggiunge facilmente e senza causare traumi le tasche parodontali.

Paro

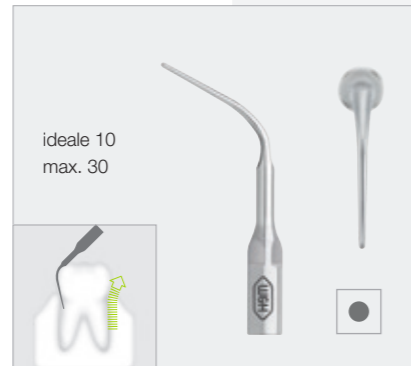

ideale 10
max. 30

1PQ / 1P / 1PS


Eliminazione di depositi subgingivali, adatta in particolare per tasche parodontali profonde.



ideale 10
max. 30

3PrQ / 3Pr

Punta curvata a destra per il debridement parodontale, consigliata per il trattamento di mantenimento di tasche di profondità da media a elevata e forcazioni.

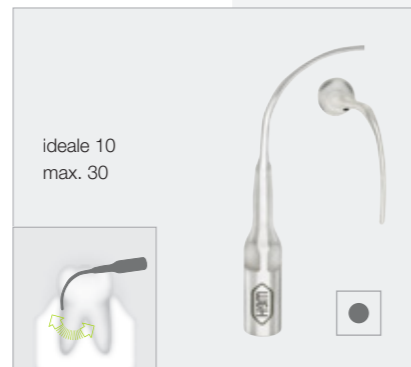

ideale 10
max. 30

3PIQ / 3PI

Punta curvata a sinistra per il debridement parodontale, consigliata per il trattamento di mantenimento di tasche di profondità da media a elevata e forcazioni.



ideale 25
max. 30

1IQ / 1I Implant-clean



Punta per una pulizia efficiente e delicata degli impianti e dei relativi restauri.

Per il trattamento della parodontite di supporto (SPT), il recall e la gestione del biofilm.

Punte per parodontologia

Punte diamantate per una pulizia accurata della superficie radicolare durante il trattamento iniziale di pazienti affetti da parodontite.

Paro

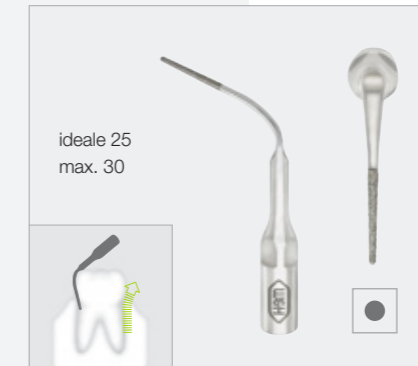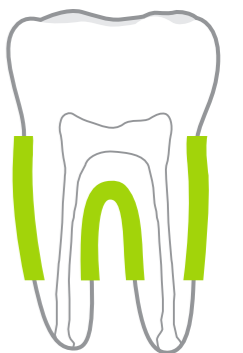

ideale 25
max. 30

4PQ / 4P / 4PS


Punta diamantata per la pulizia della superficie radicolare.



ideale 25
max. 30

5PrQ / 5Pr


Punta curvata a destra con diamantatura per la pulizia della superficie radicolare.

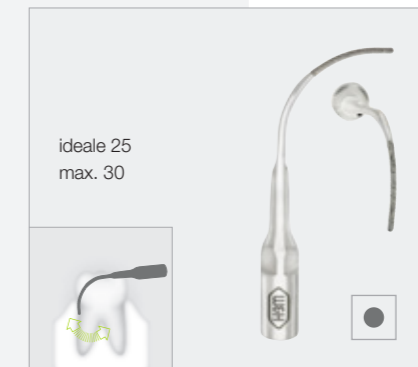

ideale 25
max. 30

5PIQ / 5PI

Punta curvata a sinistra con diamantatura per la pulizia della superficie radicolare.

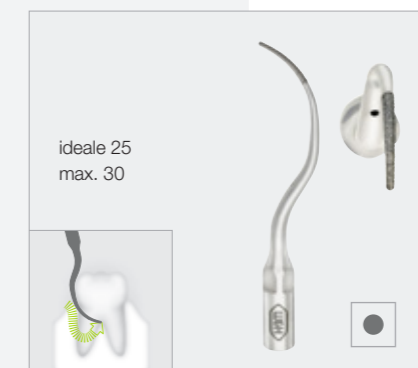

ideale 25
max. 30

5PQ / 5P

Punta diamantata per la pulizia di forcazioni e concavità.


Per il trattamento della parodontite iniziale e l'eliminazione di concrementi.

Punte per endodonzia


Endo




Dal lavaggio del canale radicolare a una revisione complessa in un paziente endodontico, W&H offre il perfetto assortimento di punte per endodonzia.

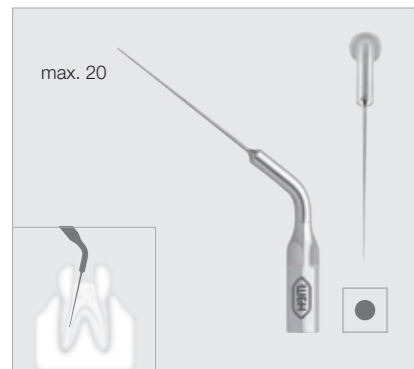

1E / 1ES
Strumento non tagliente per l'effettiva attivazione del lavaggio nel sistema del canale radicolare.

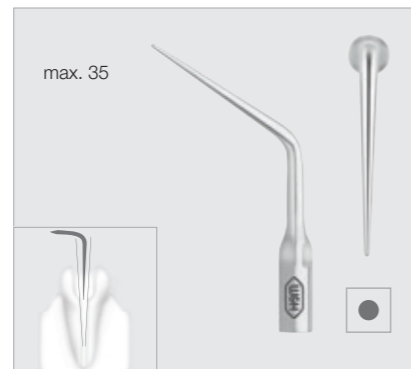

2E
Punta per il condensamento termico laterale della guttaperca.

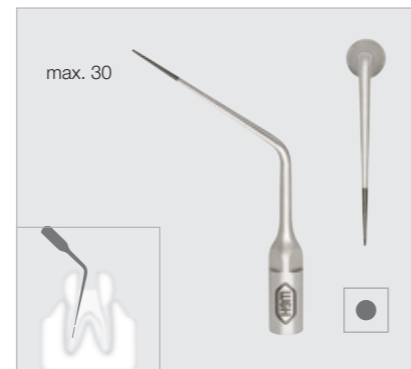


3E
Rimozione di frammenti dello strumento del canale radicolare.



4E
Preparazione del pavimento della camera pulpare.




5E
Inserimento e rimozione delle punte del canale radicolare.

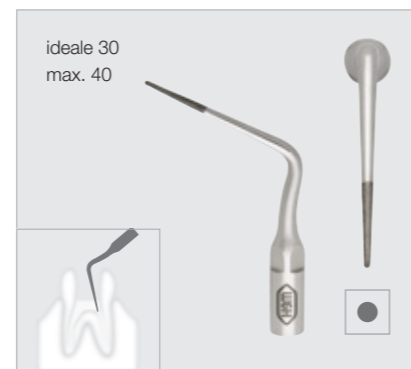

6E
Rimozione di otturazioni e calcificazioni del canale radicolare.

Punte per restauro odontoiatrico

Restauro

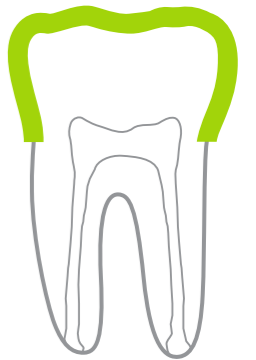


Le punte si integrano perfettamente a manipoli e contrangolo garantendo un'elevata efficienza di asportazione mediante la diamantatura.




1R
Allargamento di fessure.



2R
Punta diamantata per la preparazione di faccette, per bordi di preparazione definiti in modo chiaro con la massima protezione delle gengive e del dente attiguo.

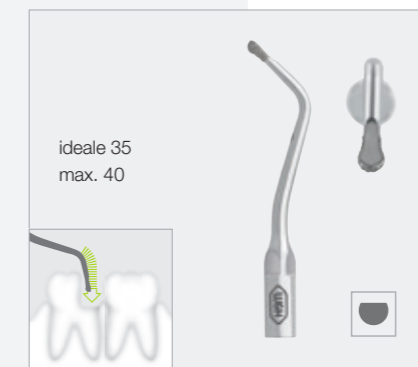

3Rd
Punta parzialmente diamantata per rifinire bordi di cavità approssimali e distali.

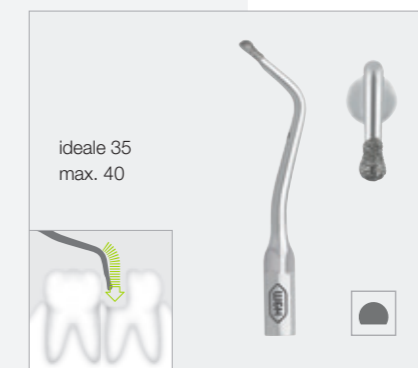

3Rm
Punta parzialmente diamantata per rifinire bordi di cavità approssimali e mesiali.

Punte **compatibili** con manipoli W&H

	Q-Link*	W&H/EMS/Mectron			W&H/NSK/Satelec**		
	PB-5 L Q	PB-5 L	PA-1 LED	PB-3	PB-5 L S	PB-3 LED S	PB-3 S
Tigon+			X			X	
Proxeo Ultra	X	X			X		
Pyon 2				X			
Built-In	X	X		X	X		X

* Le punte Q-Link (ad es. 1UQ, 2UQ) sono compatibili con PB-5 L Q.

** Le punte W&H con la filettatura Satelec (ad es. 1US, 2US) sono compatibili con i manipoli W&H PB-5 L S, PB-3 LED S e PB-3 S.

Avviso: EMS®, Mectron®, NSK® e Satelec® sono marchi di terze parti, che non hanno alcun rapporto di collaborazione con W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. Se si utilizzano punte di fornitori terzi, l'utilizzatore deve garantire la corretta impostazione dei parametri di prestazione dell'ablatore piezoelettrico W&H.

Produttore:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribuzione:

W&H Italia S.r.l.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italia**
t +39 035 6663911
f +39 035 0662504
office.it@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com