

#whdentalwerk



video.wh.com

Agora no seu
fornecedor ou
em **wh.com**



Sistema de pontas Piezo.


Durável. Seguro. Eficiente.

De profissionais para
profissionais.



Sistema de Pontas Piezo da W&H

O sistema de pontas da W&H foi desenvolvido em colaboração com usuários finais e desenhado especialmente para os requisitos técnicos da tecnologia Piezo da W&H. É perfeito para as respectivas áreas de aplicação e adequado para cada etapa de tratamento.

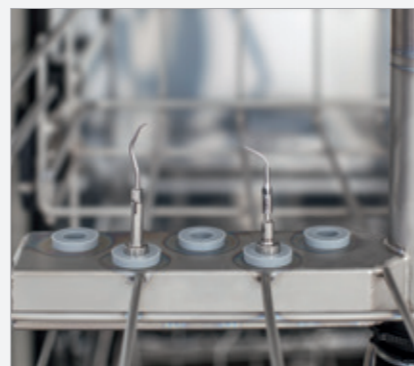

Higiene e manutenção

Todas as pontas e substituidores de pontas são desinfetáveis termicamente e esterilizáveis.



Utilização rápida, simples e segura


O substituidor de pontas W&H permite uma utilização rápida e segura. O controle de torque integrado previne um apertamento excessivo e facilita a troca das pontas com facilidade e segurança.



Pontas Universais


Remoção simples, eficiente e cuidadosa de todo cálculo dental supra-gengival. Para todos os quadrantes.

Raspagem

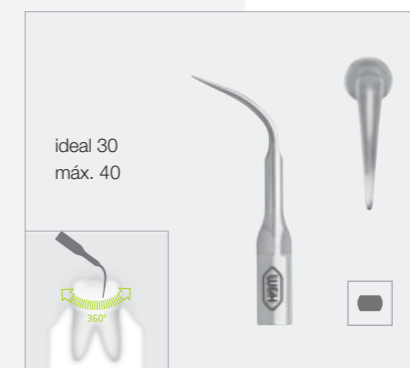

1UQ / 1U / 1US

Para a remoção de cálculo supra-gengival grosseiro.

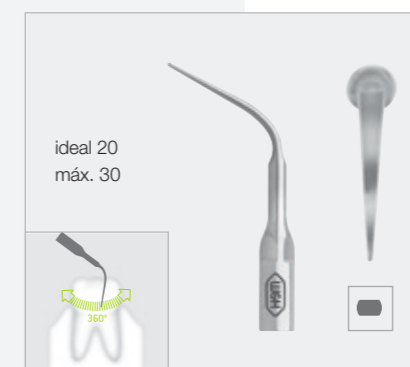


2UQ / 2U / 2US

Para a remoção fina de cálculo supra-gengival, bem como para o tratamento de pacientes em manutenção.



3UQ / 3U / 3US

Para o polimento e remoção fina de cálculo supra-gengival, especialmente adequada para limpeza interdental.

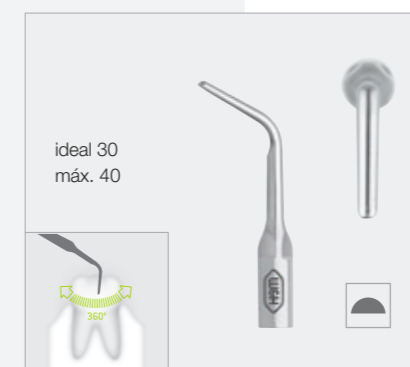


4U

Para a remoção de cálculo supragengival grosseiro, especialmente para os casos com grandes acúmulos de cálculo.

Pontas de Periodontia

A sua forma delgada facilita um acesso ideal e atraumático às bolsas periodontais.

Perio

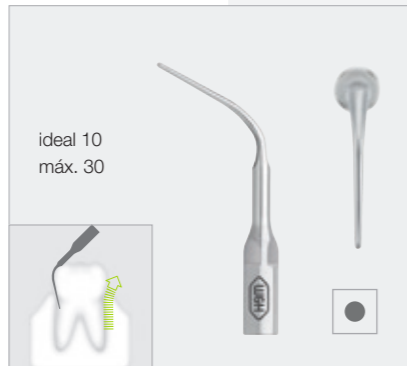


1PQ / 1P / 1PS

Remoção de depósitos subgingivais, especialmente adequado para bolsas periodontais profundas.



3PrQ / 3Pr

Ponta angulada para direita. Recomendada para manutenção de bolsas periodontais moderadas e profundas, bem como região de furca.

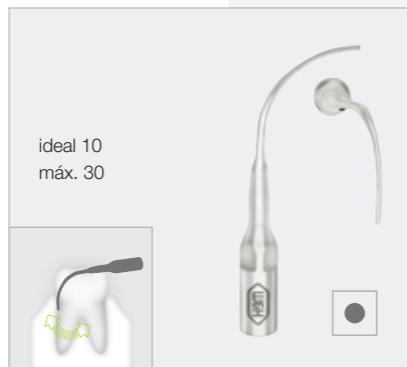

3PIQ / 3PI

Ponta angulada para esquerda. Recomendada para manutenção de bolsas periodontais moderadas e profundas, bem como região de furca.



1IQ / 1I Implant-clean



Ponta para uma limpeza eficiente e cuidadosa de implantes e suas respectivas restaurações.

Para Terapia Periodontal de Suporte (TPS), manutenção e controle de biofilme.

Pontas de Periodontia


Pontas revestidas de diamante para uma limpeza completa da superfície radicular durante o tratamento inicial de pacientes com doença periodontal.

Perio

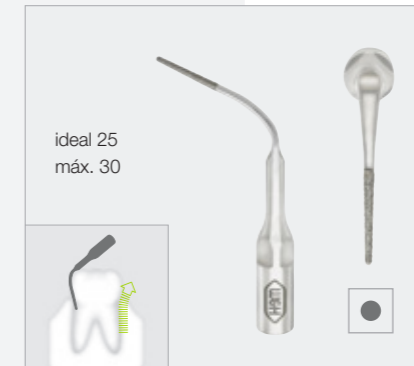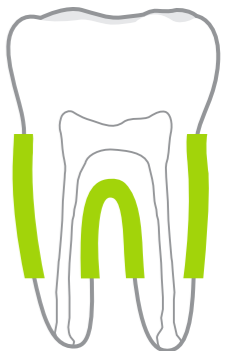


4PQ / 4P / 4PS

Ponta diamantada para uma limpeza eficiente da superfície radicular.

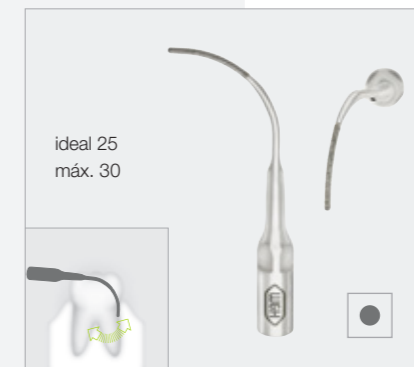


5PrQ / 5Pr

Ponta diamantada e angulada para direita. Para uma limpeza eficiente da superfície radicular.

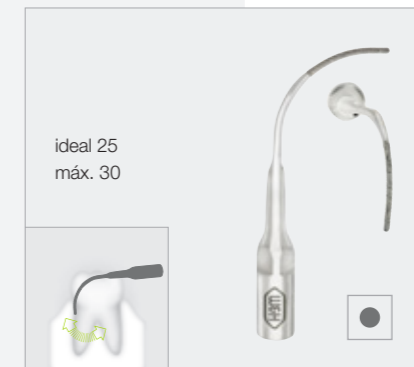

5PIQ / 5PI

Ponta diamantada e angulada para esquerda. Para uma limpeza eficiente da superfície radicular.

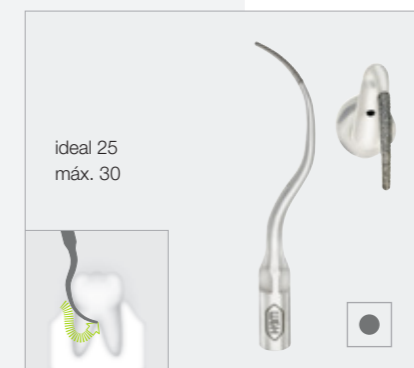

5PQ / 5P


Ponta com revestimento de diamante para uma limpeza eficiente de bifurcações e concavidades.

Para terapia periodontal inicial e remoção de placas de cálculo.

Pontas de Endodontia

Endo


W&H oferece uma gama perfeita de pontas para endodontia, tanto para a irrigação de canal radicular, quanto para condutas complexas em canais tratados endodonticamente.

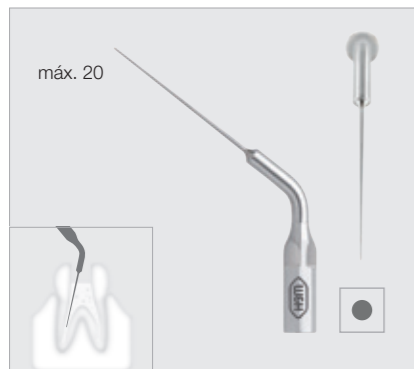

1E / 1ES
Instrumento não cortante para a irrigação eficaz no final do conduto radicular.




2E
Ponta para condensação térmica lateral de guta-percha.

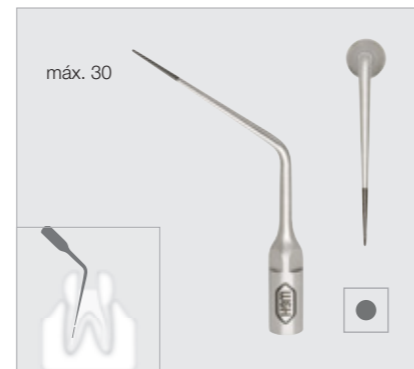


3E
Remoção de instrumentos fraturados no conduto radicular.



4E
Preparo da câmara pulpar.

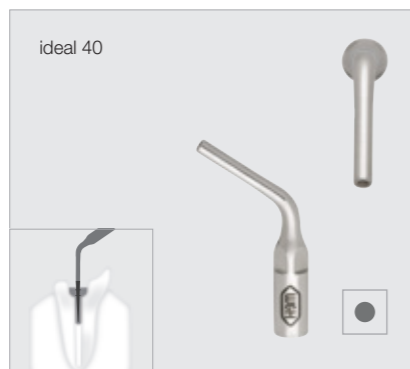

5E
Vibração e remoção de pinos intrarradiculares.


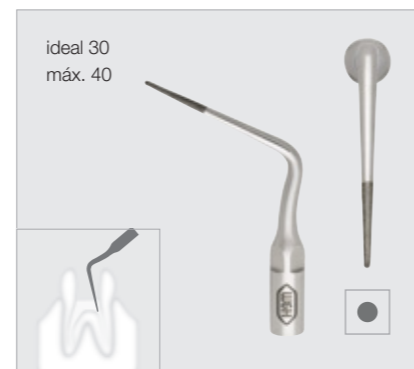


6E
Remoção de obturações do canal radicular e calcificações.

Pontas de Restauração

Restauração


As pontas são o complemento perfeito para as suas peças de mão e contra-ângulos. Graças ao revestimento diamantado um elevado grau de abrasão é alcançado.

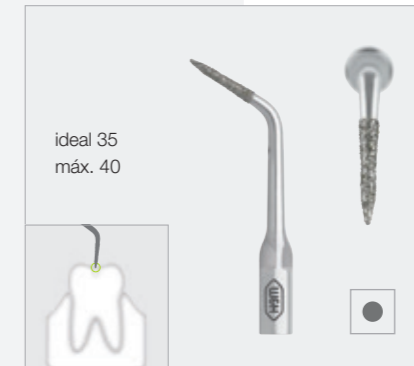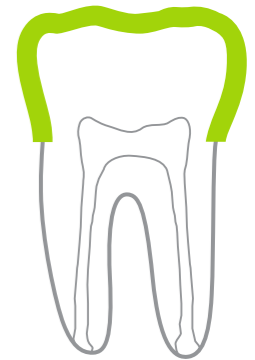


1R
Ampliação de fissuras.



2R
Ponta diamantada. Preparo de laminados, para uma definição perfeita das margens do preparo com máxima proteção aos dentes adjacentes.

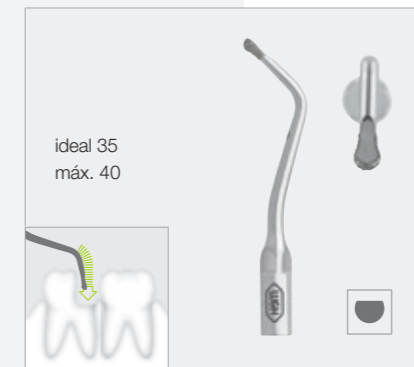

3Rd
Ponta parcialmente diamantada. Preparo e acabamento das arestas distais.

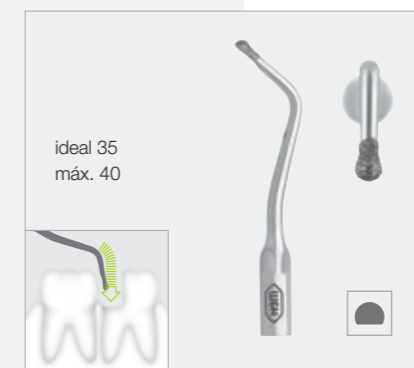

3Rm
Ponta parcialmente diamantada. Preparo e acabamento das arestas mesiais.

Compatibilidade das pontas com as peças de mão W&H

	Q-Link*	W&H/EMS/Mectron			W&H/NSK/Satelec**		
	PB-5 L Q	PB-5 L	PA-1 LED	PB-3	PB-5 L S	PB-3 LED S	PB-3 S
Tigon+			X			X	
Proxeo Ultra	X	X			X		
Pyon 2				X			
Built-In	X	X		X	X		X

* As pontas Q-Link (por ex. 1UQ, 2UQ) são compatíveis com a PB-5 L Q.

** As pontas W&H com rosca Satelec (por ex. 1US, 2US) são compatíveis com as peças de mão PB-5 L S, PB-3 LED S e PB-3 S da W&H.

Indicação: EMS®, Mectron®, NSK® e Satelec® são marcas comerciais de terceiros que não são afiliadas à W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. Em caso de uso de pontas de terceiros, o usuário deve garantir o ajuste correto dos parâmetros de potência do dispositivo piezo da W&H.

Produtor:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1

5111 Bürmoos, **Austria**

t +43 6274 6236-0

f +43 6274 6236-55

office@wh.com

wh.com