

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su  
distribuidor o  
en **wh.com**




# Sistema de puntas Piezo.

Duraderas. Seguras.


Eficaces.

De profesionales para  
profesionales.

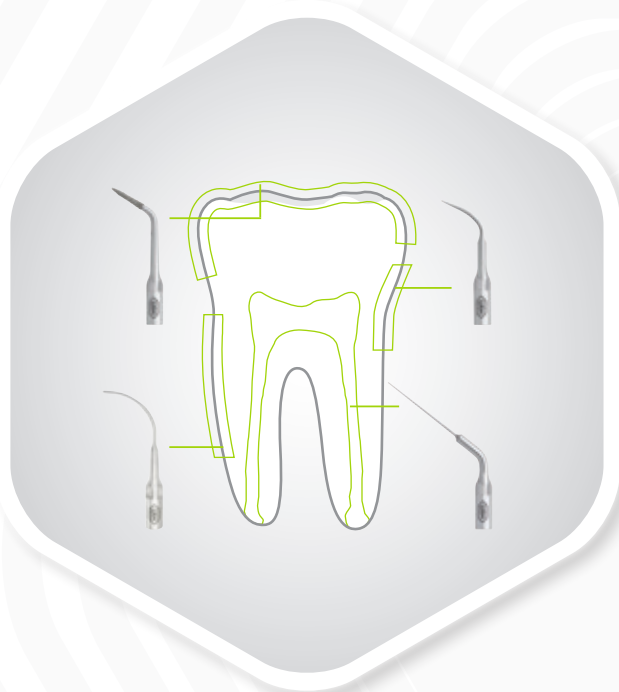

## W&H Sistema de puntas Piezo

El sistema de puntas W&H se ha desarrollado en colaboración con los usuarios finales y se ha adaptado de una manera específica a los requisitos técnicos de la tecnología Piezo de W&H. Perfectas para los requisitos de las respectivas áreas de aplicación y para cada uno de los pasos de tratamiento individuales.

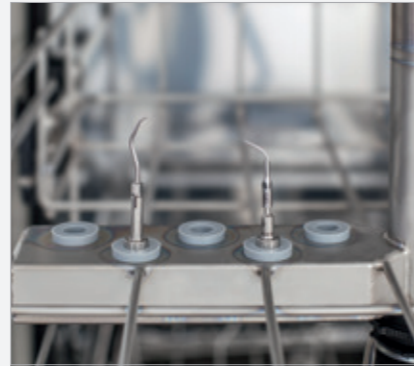

### Higiene y mantenimiento

Todas las puntas y el cambiador de puntas son termodesinfectables y esterilizables.



### Manejo rápido, sencillo y seguro



El cambiador de puntas de W&H permite un manejo rápido y seguro. El control integrado del torque evita una torsión excesiva y permite cambiar la punta de forma sencilla y segura.



## Puntas universales


Eliminación sencilla, cuidadosa y eficaz del sarro supragingival en todos los cuadrantes.

## Scaling

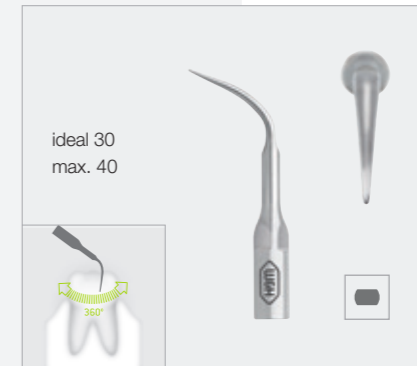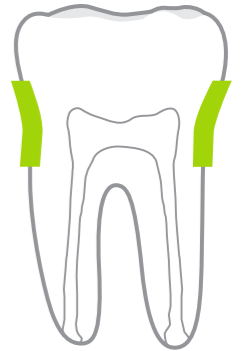

### 1UQ / 1U / 1US

Para una primera depuración del sarro supragingival.

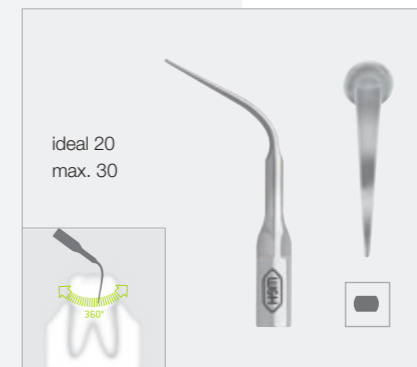


### 2UQ / 2U / 2US

Para la depuración refinada del sarro supragingival, así como para el tratamiento de revisión de pacientes.



### 3UQ / 3U / 3US

Para la depuración refinada del sarro supragingival, especialmente adecuada para la limpieza interdental.

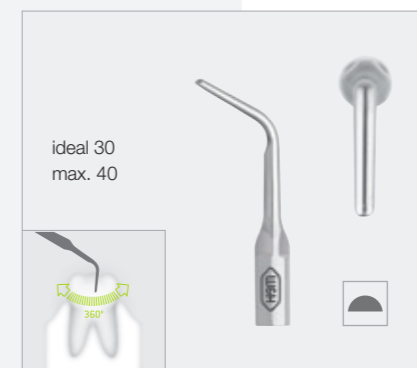


### 4U

Para una primera depuración del sarro supragingival, especial para la eliminación de grandes placas de sarro.

## Puntas para periodoncia

Gracias a su forma estilizada, el acceso a las bolsas periodontales se realiza de forma óptima y, a la vez, cuidadosa.

**Para el tratamiento de la periodontitis (STP), retirada y gestión del biofilm.**

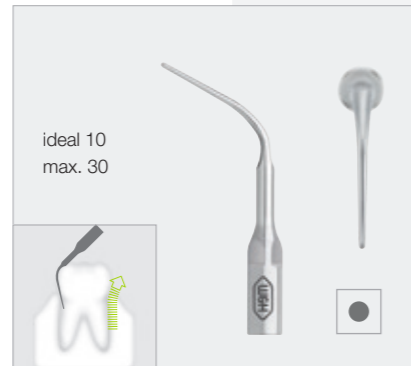


### 1PQ / 1P / 1PS

Eliminación de depósitos subgingivales, especialmente adecuado para bolsas periodontales profundas.



### 3PrQ / 3Pr

Punta curvada hacia la derecha para el desbridamiento periodontal, recomendado para el tratamiento de mantenimiento de bolsas de profundidad media a alta, así como bifurcaciones.

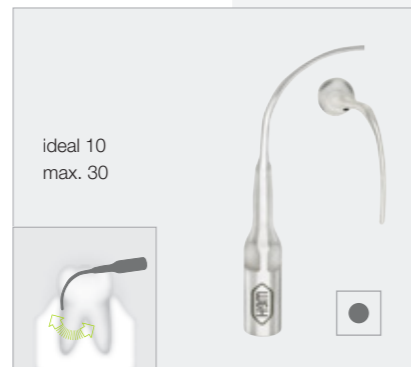

### 3PIQ / 3PI

Punta curvada hacia la izquierda para el desbridamiento periodontal, recomendado para el tratamiento de mantenimiento de bolsas de profundidad mediana a alta, así como de bifurcaciones.



### 1IQ / 1I Implant-clean

Punta para la limpieza eficaz y cuidadosa de los implantes y de sus restauraciones.


## Paro



## Puntas para periodoncia


Las puntas diamantadas permiten realizar una limpieza minuciosa de la superficie radicular en el tratamiento inicial de los pacientes con periodontitis.

**Para el tratamiento inicial de la periodontitis y para la eliminación de concreciones.**

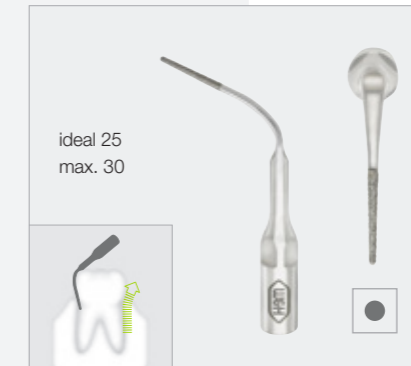


### 4PQ / 4P / 4PS

Punta de diamante para la limpieza de la superficie radicular.

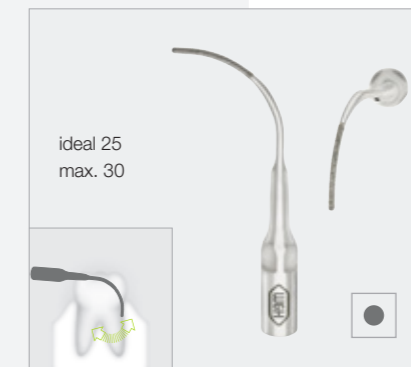


### 5PrQ / 5Pr

Punta de diamante torcida hacia la derecha para la limpieza de la superficie radicular.

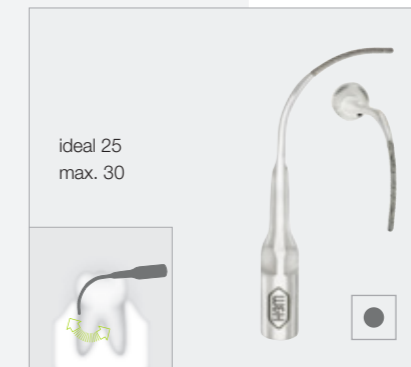

### 5PIQ / 5PI


Punta de diamante torcida hacia la izquierda para la limpieza de la superficie radicular.

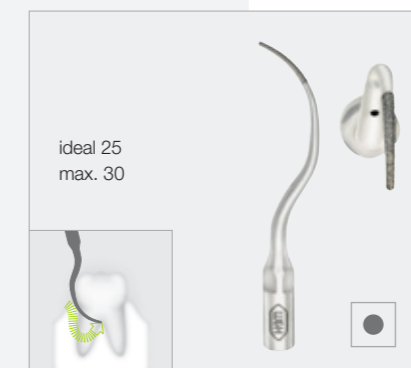

### 5PQ / 5P

Punta de diamante para la limpieza de bifurcaciones y concavidades.



## Paro

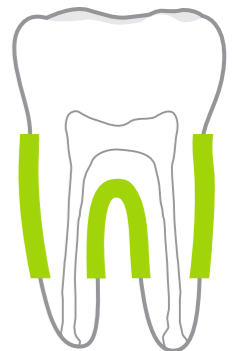

## Puntas para endodoncia

W&H le ofrece una gama perfecta de puntas para endodoncia, ya sea para tratar un canal radicular o para la revisión compleja de un paciente al que se le ha realizado una endodoncia.


## Endo

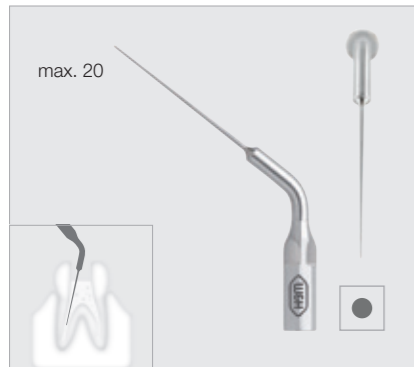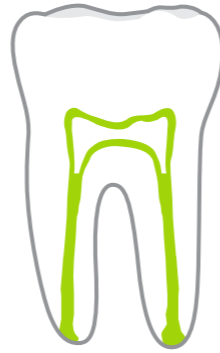

**1E / 1ES**  
Instrumento no cortante para una eficaz activación de la limpieza en el sistema del canal radicular.



**2E**  
Punta para la condensación térmica lateral de gutapercha.

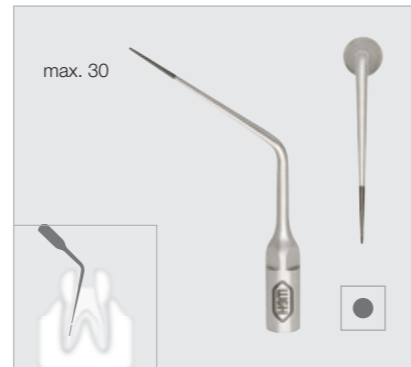

**3E**  
Eliminación o extracción de elementos fracturados del canal radicular.



**4E**  
Preparación del fondo de la cámara pulpar.



**5E**  
Cementado y eliminación de pernos radiculares mediante vibración.





**6E**  
Eliminación de obturaciones y calcificaciones del conducto radicular.


## Puntas de restauración

Las puntas constituyen el complemento perfecto para sus piezas de mano y sus contra-ángulos y, gracias al diamantado, presentan un alto rendimiento de retirada de material.


## Restoration

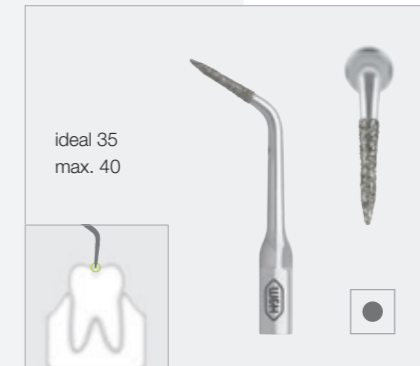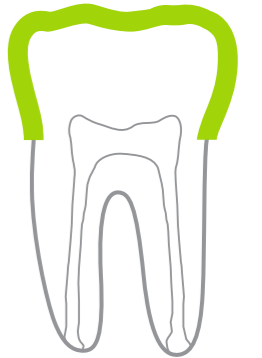

**1R**  
Ampliación de fisuras.

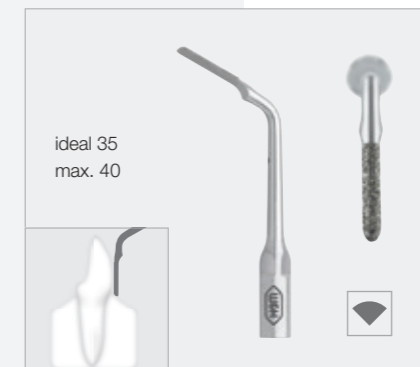

**2R**  
Punta diamantada para la preparación de la restauración tipo Veneer y apta para márgenes claramente definidos con la máxima protección de la encía y de la pieza adyacente.

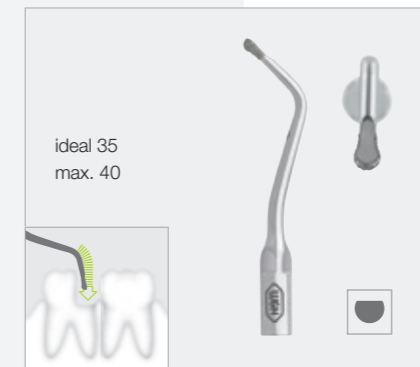

**3Rd**  
Punta diamantada para los bordes proximal y distal de las cavidades.



**3Rm**  
Punta diamantada para los bordes proximal y medial de las cavidades.

# Compatibilidad de las puntas con las piezas de mano de W&H

	Q-Link*	W&H/EMS/Mectron			W&H/NSK/Satelec**		
	PB-5 L Q	PB-5 L	PA-1 LED	PB-3	PB-5 L S	PB-3 LED S	PB-3 S
Tigon+			X			X	
Proxeo Ultra	X	X			X		
Pyon 2				X			
Built-In	X	X		X	X		X

\* Las puntas Q-Link (por ejemplo, 1UQ, 2UQ) son compatibles con el PB-5 L Q.

\*\* Las puntas W&H con rosca Satelec (por ejemplo, 1US, 2US) son compatibles con las piezas de mano W&H PB-5 L S, PB-3 LED S y PB-3 S.

Nota: EMS®, Mectron®, NSK® y Satelec® son marcas comerciales de terceros que no están afiliados a W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. Cuando se utilizan puntas de terceros, el usuario debe ajustar los parámetros de rendimiento de la unidad Piezo W&H en consecuencia.

## Fabricante:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
 5111 Bürmoos, **Austria**  
 t +43 6274 6236-0  
 f +43 6274 6236-55  
 office@wh.com  
 wh.com

## Distribución:

**Wehadent Iberica S.L Unipersonal**  
 C/Canónigo Tárrega, 33  
 46014 Valencia, **España**  
 t +34 96 353 20 20  
 oficinas.es@wh.com  
 wh.com