

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf wh.com



Präzision mit extra kleinem Kopf.



endea

Winkelstücke speziell für Nickel-Titan-Feilen

Vielseitig, präzise und praktisch.

Die Endea Winkelstücke garantieren bestmöglichen Zugang zur Behandlungsstelle und wurden speziell für effizientes Arbeiten mit hochelastischen Feilen aus Nickel-Titan entwickelt. Egal ob Luftmotor, Elektromotor oder drehmomentgesteuerter Motor, mit dem Endea Winkelstück EB-75 (16:1) können die am Markt erhältlichen Feilen die erforderliche Drehzahl erreichen.




Extrem kleiner Kopf für einen besseren Zugang

zur Behandlungsstelle. Mit verkürzten Feilenschäften wird die Gesamt-Arbeitshöhe verringert und der Zugang im posterioren Bereich der Mundhöhle erleichtert.

Alle Vorteile auf einen Blick

- › Kleiner Kopf für bestmöglichen Zugang zur Behandlungsstelle
- › Hygienisch perfekt, handlich und griffsicher
- › Voll kugelgelagert für eine präzise Übertragung der Drehzahl auf die Feile
- › Thermodesinfizierbar und sterilisierbar

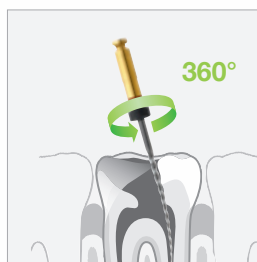

Präzise, schnelle und effiziente Aufbereitung

des Wurzelkanals mit 360° Rotation.

Technische Daten



Typ:	EB-75	EB-79
Übersetzungsverhältnis:	16:1	2:1
Empfohlene Wurzelkanalinstrumente nach EN ISO 1797-1:1995:	Nickel-Titan-Feilen, geeignet für 360° Rotation, Schaftdurchmesser 2,35 mm (Typ 1)	
Anschlussdurchmesser:	20 mm	
Kupplungssystem:	Motoren mit ISO-Anschluss nach ISO 3964 (DIN 13.940)	

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Ludwigstraße 27
83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**
t +49 8651 904 244-0
f +49 8651 904 244-4
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com