

#whdentalwerk



video.wh.com

Ora disponibile presso
il vostro rivenditore
o su **wh.com**



Precisione con testina piccola.



endea


Contrangolo progettati per lime al nichel-titanio

Versatile, pratico e preciso.


I contrangolo Endea garantiscono il migliore accesso possibile all'area di trattamento e sono stati specificatamente progettati per lavorare efficacemente con lime al nichel-titanio molto elastiche. Sia che venga collegato a un micromotore ad aria, elettrico o a un motore a controllo di coppia, con il contrangolo Endea EB-75 (16:1) le lime disponibili sul mercato raggiungono la velocità necessaria.

I vantaggi in breve

- › Testina piccola, per un migliore accesso all'area di trattamento
- › Impugnatura perfettamente igienica e sicura grazie al trattamento antiscivolo
- › Dotata di cuscinetti a sfera per una trasmissione precisa della velocità alla lima
- › Sterilizzabile e disinfettabile attraverso termodisinfezione

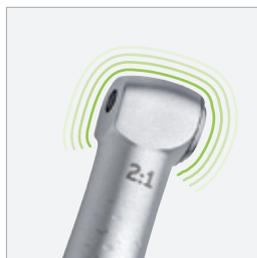

Testina estremamente piccola per un accesso migliore all'area di intervento. Le lime dal fusto più corto diminuiscono l'altezza globale di lavoro e facilitano l'accesso nella parte posteriore del cavo orale.

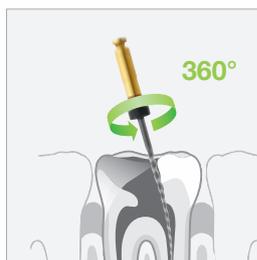

Preparazione canalare **rapida, precisa ed efficace** grazie alla rotazione a 360°.

Dati tecnici



Tipo:	EB-75	EB-79
Rapporto di trasmissione:	16:1	2:1
Si raccomandano strumenti canalari conformi alla norma EN ISO 1797-1 1995:	Lime al nichel titanio per rotazione su 360°, diametro gambo 2,35 mm (tipo 1)	
Diametro attacco:	20 mm	
Raccordo:	Micromotori con attacco ISO conforme ISO 3964 (DIN 13.940)	

Produttore:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribuzione:

W&H Italia S.r.l.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italia**
t +39 035 6663911
f +39 035 0662504
office.it@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com