

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su
distribuidor o
en wh.com



Precisión con un cabezal extrapequeño.



endea

Contra-ángulos especiales para limas de níquel-titanio

Versátil, preciso y práctico.


Los contra-ángulos Endea garantizan el mejor acceso a la zona de tratamiento y se han diseñado especialmente con limas de alta elasticidad de níquel-titanio asegurando la eficacia en el trabajo. No importa si se trata de un micromotor eléctrico, micromotor de aire o de un micromotor del torque; con el contra-ángulo Endea EB-75 (16:1) las limas disponibles en el mercado pueden alcanzar la velocidad requerida.

Ventajas

- › Minicabezal para un mejor acceso a la zona de tratamiento
- › Su forma ergonómica proporciona un perfil de agarre optimizado
- › Transmisión precisa de las revoluciones a la lima gracias a sus rodamientos
- › Termodesinfectable y esterilizable



Cabezal extremadamente pequeño para acceder mejor a la zona de tratamiento. Los vástagos de lima acortados reducen la altura total de trabajo y facilitan el acceso en el área posterior de la cavidad bucal.

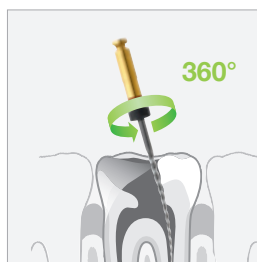

Tratamiento preciso, rápido y eficaz del canal radicular con rotación de 360°.

Datos técnicos



Tipo:	EB-75	EB-79
Transmisión:	16:1	2:1
Limas para el canal radicular recomendados según EN ISO 1797-1:1995:	Limas de níquel-titanio, adecuados para rotación de 360°, diámetro de mango 2,35 mm (tipo 1)	
Diámetro de conexión:	20 mm	
Sistema de acoplamiento:	Micromotores con conexión ISO según ISO 3964 (DIN 13.940)	

Fabricante:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribución:

Wehadent Ibérica S.L Unipersonal
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**
t +34 96 353 20 20
oficinas.es@wh.com
wh.com