

#whdentalwerk



video.wh.com

Вече при Вашия
дистрибутор
или **wh.com**



W&H куплунги

Универсални системни
интерфейси



rotc quick

Универсални системни интерфейси

Roto Quick куплунгът представлява адаптор за пренос на въздух, вода, електрическо захранване и светлина между захранващия шлаух на денталния юнит и въздушно задвижвания инструмент.



Универсални

За всички турбини, въздушни микромотори и скалери с Roto Quick връзка.



Съвместими

Съвместими с всички стандартизирани турбинни шлаухи.



Хигиенични

Възвратният клапан предотвратява връщане на замърсения воден спрей и така намалява опасността от инфекция.



Интелигентни

Предаването на електрическото захранване Ви дава възможност да се възползвате от революционни технологии, като пръстен с 5x LED+.




Гъвкави

Въртене на инструментите на 360° за лесно и ергономично боравене.



Ергономични

Най-леката система на пазара.

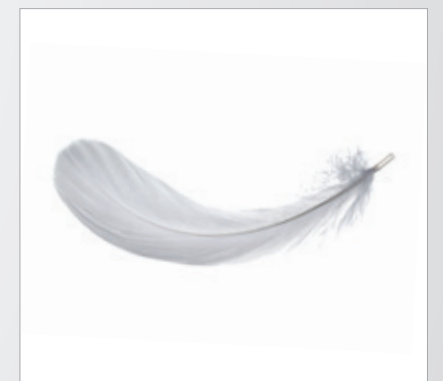

Регулируеми

Безстепенно регулиране на подаването на вода за спрея за бърза настройка от потребителя - дори по време на манипулация.



W&H Roto Quick

куплунги

Леки, гъвкави и подлежащи на стерилизация: куплунгите Roto Quick на W&H са универсални и са подходящи за използване с инструменти с LED+, LED и халогенна светлина. 24 месеца гаранция (с изключение на RQ-53 и RQ-54 с 12 месеца гаранция).



Roto Quick куплунги:	RQ-03	RQ-04	RQ-14	RQ-24	RQ-34	RQ-53*	RQ-54*
Светлина:	–	–	–	да	да	да	да
Регулиране на спрея:	–	–	да	–	да	–	–
Връзка:	с 2(3)-отвора	Стандартна връзка с 4-отвора	Стандартна връзка с 4-отвора	с 6-отвора	с 6-отвора	с 2(3)-отвора	Стандартна връзка с 4-отвора

* с интегриран генератор на светлина



W&H куплунг за Multiflex®* връзка:	
Светлина:	LED
Регулиране на спрея:	да
Връзка:	с 6-отвора



Куплунг RM-34 LED на W&H за Multiflex®* връзка

Лесен и безкомпромисен: куплунгът RM-34 LED на W&H може да се използва веднага. Това означава, че куплунгът с LED може да се използва в допълнение към стандартни шлаухи за захранване на халогенни светлини, без да се прави и най-малката промяна в денталния юнит. Дълъг експлоатационен живот – 24 месеца гаранция.

* Multiflex® е регистрирана търговска марка на Kaltenbach & Voigt GmbH Германия

Производител:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
 5111 Bürmoos, **Austria**
 t +43 6274 6236-0
 f +43 6274 6236-55
 office@wh.com
 wh.com

Дистрибуция:

W&H Bulgaria Ltd.
 14 Svilnitsa Str.
 1463 Sofia, **Bulgaria**
 t +359 2 8549565, +359 2 8549566
 f +359 2 8549590
 office.bg@wh.com
 wh.com