

#whdentalwerk



video.wh.com

Вече при Вашия
дистрибутор
или **wh.com**



Минимално
инвазивен,
максимално
моцнен



piezomed

BOOST


Изключителна мощност и бързина

С функцията за усилване (Boost) зададената мощност може да се увеличи за кратко време с 20 %.



Новата сила в костната хирургия

Piezomed улеснява работата на хирурга: благодарение на иновативната ултразвукова технология с изключителна прецизност се отстранява единствено костна субстанция. Околните меки тъкани остават невредими. Забележително облекчение и за пациента: по-бърза работа, по-малко болка!

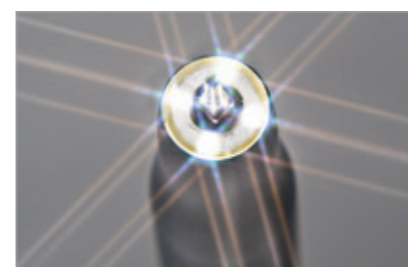


Иновативен LED пръстен

Осветяването без сянка осигурява идеална визуализация на работната зона.



Подобрена прецизност при рязане

Нов, усъвършенстван дизайн на зъбците осигурява прецизен срез и спестява време!

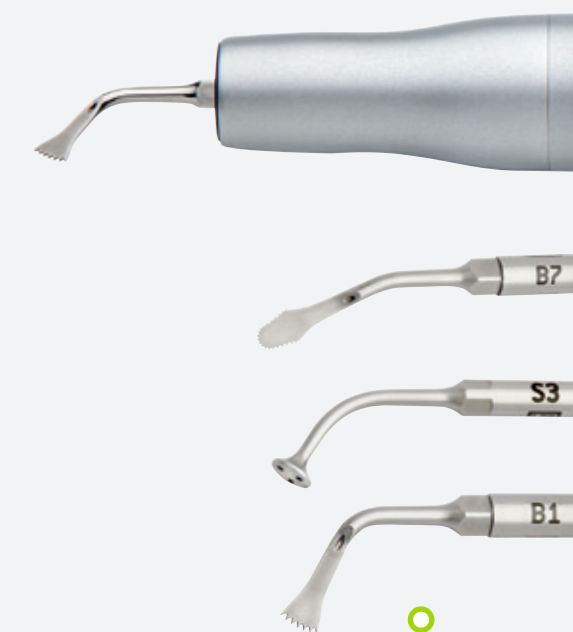

Автоматична функция за разпознаване на накрайника

Piezomed разпознава поставения накрайник и по този начин го предпазва от претоварване.



Ефективно охлаждане

Изходът на спрея в близост до работната част на накрайника осигурява ефективно охлаждане.

Автоматична функция за разпознаване на накрайника

Световна иновация: Веднага след поставяне на накрайника, Piezomed го разпознава автоматично и определя правилната мощност според съответната група накрайници. По този начин не само се улеснява работата, но се и повишава безопасността. Опасността от претоварване на накрайниците е ограничена, като по този начин се удължава експлоатационният им живот!



Автоматична функция за разпознаване на накрайника

Piezomed разпознава накрайника при поставянето му и автоматично определя мощността според съответната група накрайници.



Всички накрайници по местата си

Прегледно подредени и готови за използване в практична поставка за накрайници.



Нов дизайн на зъбците

Ситно назъбен режещ трион за фини срезове, с малка загуба на кост при вземане на автогенна костна присадка.

	3
	90
	50%

Индивидуална настройка

Мощността може да се променя ръчно в рамките на настройката за съответната група накрайници.



Накрайник за латерален синус лифт

Щадящо отделя мембраната на Шнайдер от костта. Мембраната се защитава и чрез образувания филм от охлаждащото средство.



Нов специален режещ трион

Новият режещ трион удивлява със своята изключително висока ефективност при рязане. Работите ефективно и спестявате време!

Piezomed се адаптира към Вашия стил на работа

Piezomed се настройва към Вашия личен начин на работа. Апаратът запаметява последните избрани от Вас настройки и Ви подпомага с три индивидуални режима на работа: »Мощен« (Power), »Постоянен« (Basic) и »Плавен« (Smooth). Освен това, с асортимент от иновативни инструменти, W&H предлага правилния за всяко приложение инструмент.



Охлаждане точно, където е необходимо

Подаването на охлаждащото средство в максимална близост до работната точка осигурява оптимално охлаждане на инструмента и на твърдите тъкани.



Практичен педал за управление

Мултифункционалният педал за управление дава възможност за стерилна работа и оптимална свобода на движение на ръцете.


Мощен работен режим (Power)

Мощността на апарата се повишава с увеличаване на натиска върху накрайника. (Възможна е функцията за усилване.)



Постоянен работен режим (Basic)

Независимо от натоварването върху накрайника, мощността на апарата остава непроменена. (Възможна е функцията за усилване.)

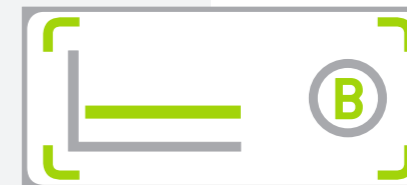

Плавен работен режим (Smooth)

Мощността на апарата се намалява с увеличаване на натиска върху накрайника.



Гъвкавост и ергономичност

Безжичен педал за управление на няколко W&H апарата, като Implantmed и Piezomed.



Абсолютна свобода на движение

Благодарение на безжичния педал за управление, можете свободно да изберете оптимална позиция в работната зона. Това означава пълна безопасност по време на лечението.



Един апарат за всички приложения

Контрол на функциите на Implantmed и Piezomed само с един педал за управление.

»Невероятно лесна употреба при комбинация между Implantmed и Piezomed.«

Проф. д-р Хосе Калво Гирадо, D.D.S, PhD, Eu PhD, M.S.,
орален хирург, Испания

безжичен!

Никога досега хирургичните интервенции не са били толкова бързи и безопасни

Piezomed Ви предоставя всички предимства на иновативната ултразвукова технология: високочестотните микровибрации дават възможност за срезове с невероятна прецизност. В допълнение, те осигуряват и така наречения кавитационен ефект за операционна област без почти никакво кървене. С други думи: Piezomed е минимално инвазивен, максимално мощен!

Вземане на автогенна костна присадка

Идеален за костна присадка. За фини и дълбоки срезове за рекордно кратко време!

Екстракция с периотом

Дори и при сложни екстракции могат да се избегнат нараняванията на костта и меките тъкани.

Микрометрични срезове

Piezomed дава възможност за минимално инвазивни операции с максимална хирургична прецизност.



Латерален синус лифт

Щадяща подготовка на костта и аугментация. Отделяне на мембраната без да се перфорира.

Разделяне на алвеоларен гребен

Хирургичните срезове са прецизни и надеждни, няма кървене на мястото на оперативната интервенция.

Селективни срезове

Предпазване на меките тъкани: нервите, съдовете и мембраните не се засягат. По-бърз оздравителен процес!

Технически данни

CE

0297

Вид:	SA-320
Мрежово напрежение:	100 – 130 V / 220 – 240 V
Допустимо колебание на напрежението:	±10 %
Номинален ток:	0,1 – 1,0 A / 0,1 – 0,5 A
Честота:	50 – 60 Hz
Макс. консумирана мощност:	90 VA
Макс. изходна мощност:	24 W
Дебит на охлаждащото средство при 100 %:	мин. 50 ml/min
Размери (Ш x Д x В):	256 x 305 x 109 mm
Тегло:	7 kg

Производител:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Дистрибуция:

W&H Bulgaria Ltd.
Pirin Str. 91, Office Nr. 6
1680 Sofia, **Bulgaria**
t +359 2 8549565, +359 2 8549566
f +359 2 8549590
office.bg@wh.com
wh.com

Фиг. Снимки. Допълнителното оборудване и съдържанието на показаните аксесоари не са включени в съдържанието на доставката.

20390 ABG Rev. 005 / 10.05.2019
Правата за промени запазени