


#whdentalwerk



video.wh.com

Plus d'info
sur
wh.com

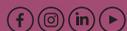

Les turbines les plus fantastiques

au monde par W&H



syneo



synea VISION

La gamme d'équipement pour les professionnels très exigeants. Des turbines haut de gamme à la technologie de pointe !



synea FUSION

La gamme d'équipement particulièrement économique. Jamais la qualité légendaire Synea n'a été aussi abordable !

Des turbines pour les professionnels très exigeants

Une technologie de pointe pour des résultats de préparation impeccables : les deux gammes de turbines Synea se caractérisent par une puissance accrue, une parfaite ergonomie et un excellent rapport qualité/prix. Synea Vision intègre des innovations dont la bague à cinq LED+ stérilisable et Synea Fusion garantit une qualité et une rentabilité optimales.




Meilleure visibilité
Meilleurs contrastes, éclairage naturel et excellent rendu des couleurs avec LED+.



Refroidissement optimal
Grâce au spray à 4 ou 5 directions, la pointe de l'instrument rotatif est constamment refroidie, en toutes circonstances.



Concept hygiène breveté de la tête
Pas d'aspiration des aérosols dans la tête de la turbine si le rotor s'arrête grâce à la circulation d'air.

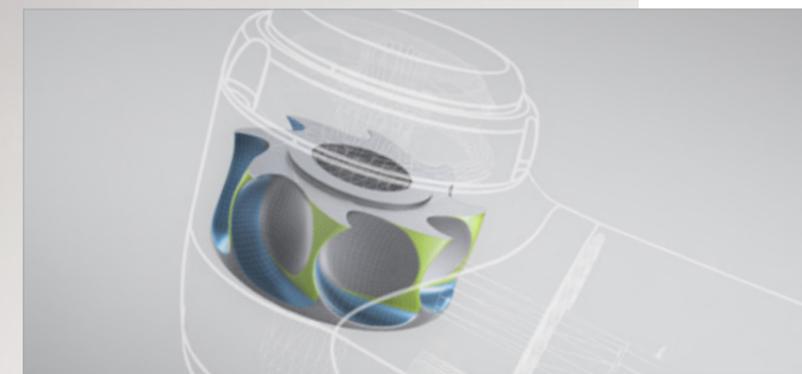

Pleine puissance avec le rotor Power Blade
La géométrie optimisée de l'ailette permet d'atteindre une efficacité maximale sur le rotor. Pour un couple et une puissance optimums au cours de la préparation.




Ergonomique, légère et silencieuse
Travailler sans effort et sans stress avec des turbines sensiblement plus légères.


Synea Vision : Encore en avance sur le futur

Les premières turbines stérilisables au monde avec une bague à cinq LED+ impressionnent par leur éclairage sans zone d'ombre. Elles constituent en tous points des turbines de qualité supérieure. Découvrez un travail aux sensations inédites, sans zone d'ombre.

synea^{VISION}

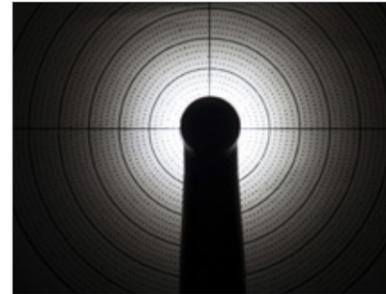

Synea Vision avec cinq LED+
Éclairage sans zone d'ombre de la zone de traitement avec la bague à cinq LED+ unique.

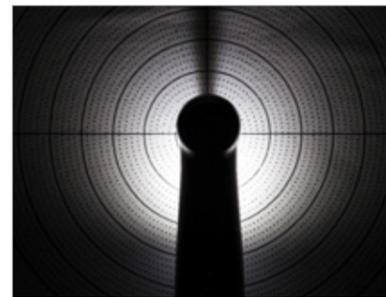

Synea Fusion
par comparaison : LED+ standard.
Le confort puissance 5 !
Cinq LED et cinq spray révolutionnent la visibilité et le confort d'utilisation.



Synea Vision : Turbine haute puissance TK-100 L et micro-turbine TK-94 L

La TK-100 L est la turbine haute puissance sans zone d'ombre. Plus de puissance sans effets indésirables, comme une usure excessive ou une sortie d'air au niveau de la tête de la turbine. Avec sa tête extrêmement réduite, la TK-94 L est idéale pour les interventions peu invasives et offre un excellent accès à la zone de traitement.




Tête réduite très pratique
Avec une tête d'un diamètre de seulement 9 mm et une hauteur de tête totale de 17,2 mm avec une fraise de 16 mm insérée les patients à faible ouverture de bouche, comme les enfants et les personnes âgées, sont les premiers à bénéficier de ces avantages.



Les autres avantages en un clin d'oeil


- › Ergonomie optimale
- › Légères
- › Équilibre parfait
- › Bonne prise en main
- › Fonctionnement et rotor très silencieux
- › Roulement à billes en céramique
- › Concept hygiène de la tête
- › Longévité accrue
- › Qualité autrichienne
- › Thermodésinfectables et stérilisables
- › Garantie de 24 mois

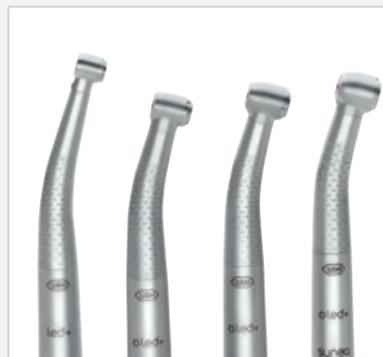

Turbines sur mesure
La bonne taille de tête pour chaque application facilite l'accès à la zone de traitement.




Particulièrement résistantes
Un aspect neuf, jour après jour grâce au revêtement spécial anti-rayures.

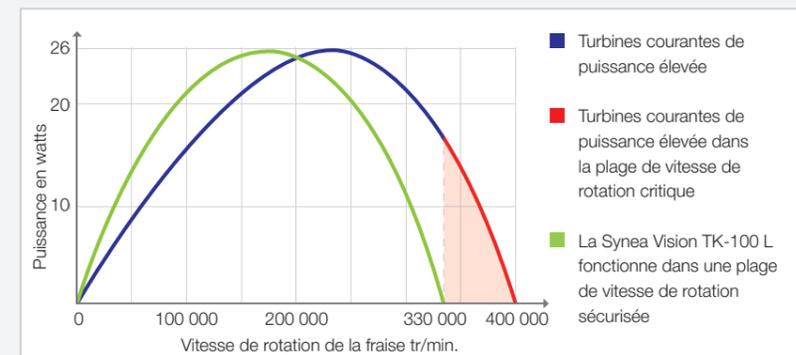

Durée de vie prolongée

Plus de puissance par une utilisation optimale du couple sans épuiser la vitesse de rotation maximale. Pour une puissance optimale tout en préservant durablement le roulement à billes du rotor.

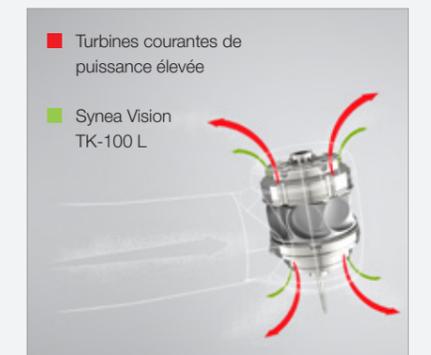

Hygiène irréprochable

Sortie d'air minimale sur la tête à la puissance maximale pour plus de fiabilité et une meilleure hygiène.

Expérience utilisateurs

synea VISION



Dr Martin Schiffl, chirurgien-dentiste
Salzbourg, Autriche

» Le concept d'éclairage innovant de la turbine W&H avec bague à 5 LED+ offre une parfaite visibilité de la partie travaillante, même dans des conditions défavorables. «



Dr Sunil Hirani, chirurgien-dentiste
Milton Keynes, Grande-Bretagne

» La turbine Synea Vision est l'une des meilleures turbines que j'ai utilisées. Elle doit ses qualités à son faible poids, à son couple exceptionnel et à sa bague à LED dont la forte intensité lumineuse éclaire parfaitement les zones difficiles au fond de la bouche. «



Dr Mats Bäckström Falun, chirurgien-dentiste
Suède

» Le couple exceptionnel favorise l'élimination efficace de la substance dentaire naturelle et des matériaux pour prothèses dentaires hautement résistants. «

Synea Vision : Caractéristiques techniques



Modèles avec roulements à billes en céramique intégral :	TK-94 L / TK-94 LM	TK-97 L / TK-97 LM	TK-98 L / TK-98 LM	TK-100 L / TK-100 LM
Lumière :	LED+ / barreau de verre monobloc	Anneau de lumière à 5 LED+ / barreau de verre monobloc		
Connexion :	1 Roto Quick / 2 Multiflex®**			
Dimensions de la tête :	Ø 9 mm	Ø 10 mm	Ø 11,5 mm	Ø 13 mm
Hauteur de la tête :	17,2 mm (avec fraise 16 mm)	21,1 mm (avec fraise 19 mm)	21,4 mm (avec fraise 19 mm)	
Puissance* :	14 W	21 W	24 W	26 W
Vitesse de rotation (tr/min) :	410 000 ± 30 000	400 000 ± 30 000	360 000 ± 30 000	330 000 ± 30 000
Instruments rotatifs :	Fraise FG, conforme ISO 1797-1, avec Ø 1,6 mm			
Diamètre maxi. de la partie travaillante :	1,5 mm	2 mm	2 mm	2,5 mm
Longueur maxi. :	16 mm	21 mm	25 mm	25 mm
Poids :	39 g / 67 g	38 g / 68 g	40 g / 69 g	40 g / 70 g
Pression de fonctionnement du Roto Quick :	3 ± 0,3 bar 2,5 à 4 bar			
Pression de fonctionnement du Multiflex® :				
Spray :	5 buses			

* La puissance s'applique à une pression de fonctionnement nominale de 3 bar et une pression d'air de retour de 0,2 bar maxi

** Multiflex® est une marque d'une partie tierce non affiliée à W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH



Les raccords W&H Roto Quick permettent d'utiliser de nombreux instruments à anneau de lumière à 5 LED+, LED+, LED et ampoules halogènes

- › Click & Pull
- › Réglage en continu de l'alimentation en eau du spray
- › Clapet anti-retour
- › Stérilisable
- › Garantie de 24 mois



Raccord W&H RM-34 LED pour connexion Multiflex®**

- › Possibilité d'utiliser des LED sans modifier l'unit dentaire
- › Longévité accrue de la LED
- › Réglage en continu de l'alimentation en eau du spray
- › Clapet anti-retour
- › Garantie de 24 mois

Information réglementaire :

Dispositif Médicaux Classe 2a / CE 0297 / DQS Réservés aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation ou sur l'étiquetage du produit.

Synea Fusion :

Des turbines Synea à l'efficacité maximale


Un confort d'utilisation et une puissance sans compromis associés à un prix particulièrement abordable : découvrez les avantages de la gamme Synea Fusion !

Les autres avantages en un clin d'oeil

- › Parfaite ergonomie
- › Légères
- › Fonctionnement et rotor très silencieux
- › Roulement à billes en céramique
- › Concept hygiène de la tête
- › Longévité accrue
- › Qualité autrichienne
- › Thermodésinfectables et stérilisables
- › Garantie de 12 mois



Refroidissement optimal des quatre côtés
Refroidissement constant et nettoyage optimal de la zone de traitement grâce au spray à 4 directions.

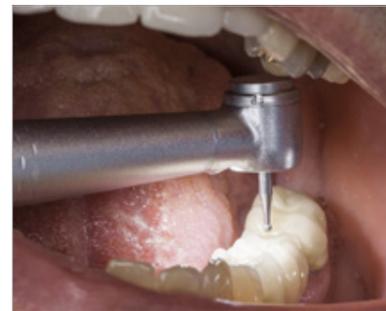

Expérience LED+
Éclairage optimal, rendu naturel des couleurs et positionnement idéal des LED.



Vous avez le choix

Faites votre choix parmi deux tailles de tête et sélectionnez votre système de connexion. Avec le raccord W&H Roto Quick, profitez de l'éclairage LED+ et de la facilité de rotation à 360°.



Synea Fusion :


Caractéristiques techniques



Modèles :	TG-97 L / TG-97 L RM / TG-97 LM / TG-97 L N / TG-97	TG-98 L / TG-98 L RM / TG-98 LM / TG-98 L N / TG-98
Lumière :	LED+ / LED+ / barreau de verre monobloc / barreau de verre monobloc / -	
Connexion :	1 Roto Quick: TG-97, TG-97 L Raccord RM: TG-97 L RM 2 Multiflex [®] : TG-97 LM NSK Mach [®] : TG-97 L N	1 Roto Quick: TG-98, TG-98 L Raccord RM: TG-98 L RM 2 Multiflex [®] : TG-98 LM NSK Mach [®] : TG-98 L N
Dimensions de la tête :	Ø 10 mm	Ø 11,5 mm
Hauteur de la tête :	21,1 mm (avec fraise 19 mm)	21,4 mm (avec fraise 19 mm)
Puissance* :	18 W	21 W
Vitesse de rotation (tr/min) :	390 000 ± 30 000	360 000 ± 30 000
Instruments rotatifs :	Fraise FG, conforme ISO 1797-1, avec Ø 1,6 mm	
Diamètre maxi. de la partie travaillante :	2 mm	2 mm
Longueur maxi. :	21 mm	25 mm
Poids :	40 g / 43 g / 68 g / 50 g / 40 g	40 g / 44 g / 70 g / 52 g / 42 g
Pression de fonctionnement du Roto Quick :	3 ± 0,3 bar	
Pression de fonctionnement du Multiflex [®] :	2,5 à 4 bar	
Spray :	4 buses	

* La puissance s'applique à une pression de fonctionnement nominale de 3 bar et une pression d'air de retour de 0,2 bar maxi

** Multiflex[®] et NSK Mach[®] sont des marques de parties tierces non affiliées à W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

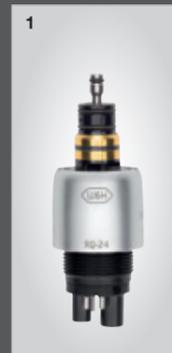

Les raccords W&H Roto Quick permettent d'utiliser de nombreux instruments à LED+, LED et ampoules halogènes

- › Click & Pull
- › Réglage en continu de l'alimentation en eau du spray
- › Clapet anti-retour
- › Stérilisable
- › Garantie de 24 mois



Raccord W&H RM-34 LED pour connexion Multiflex[®]**

- › Possibilité d'utiliser des LED sans modifier l'unité dentaire
- › Longévité accrue de la LED
- › Réglage en continu de l'alimentation en eau du spray
- › Clapet anti-retour
- › Garantie de 24 mois


Information réglementaire :

Dispositif Médicaux Classe 2a / CE 0297 / DQS Réservés aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation ou sur l'étiquetage du produit.

W&H AIMS
**La sécurité est
notre priorité !**

L'hygiène est d'une importance capitale au sein de votre cabinet dentaire. Vous pouvez compter sur W&H AIMS et sa gamme de produits très diversifiée, ses connaissances fondamentales et toutes les informations pertinentes disponibles en un clin d'oeil.

Pour votre sécurité et celle de vos patients. aims.wh.com

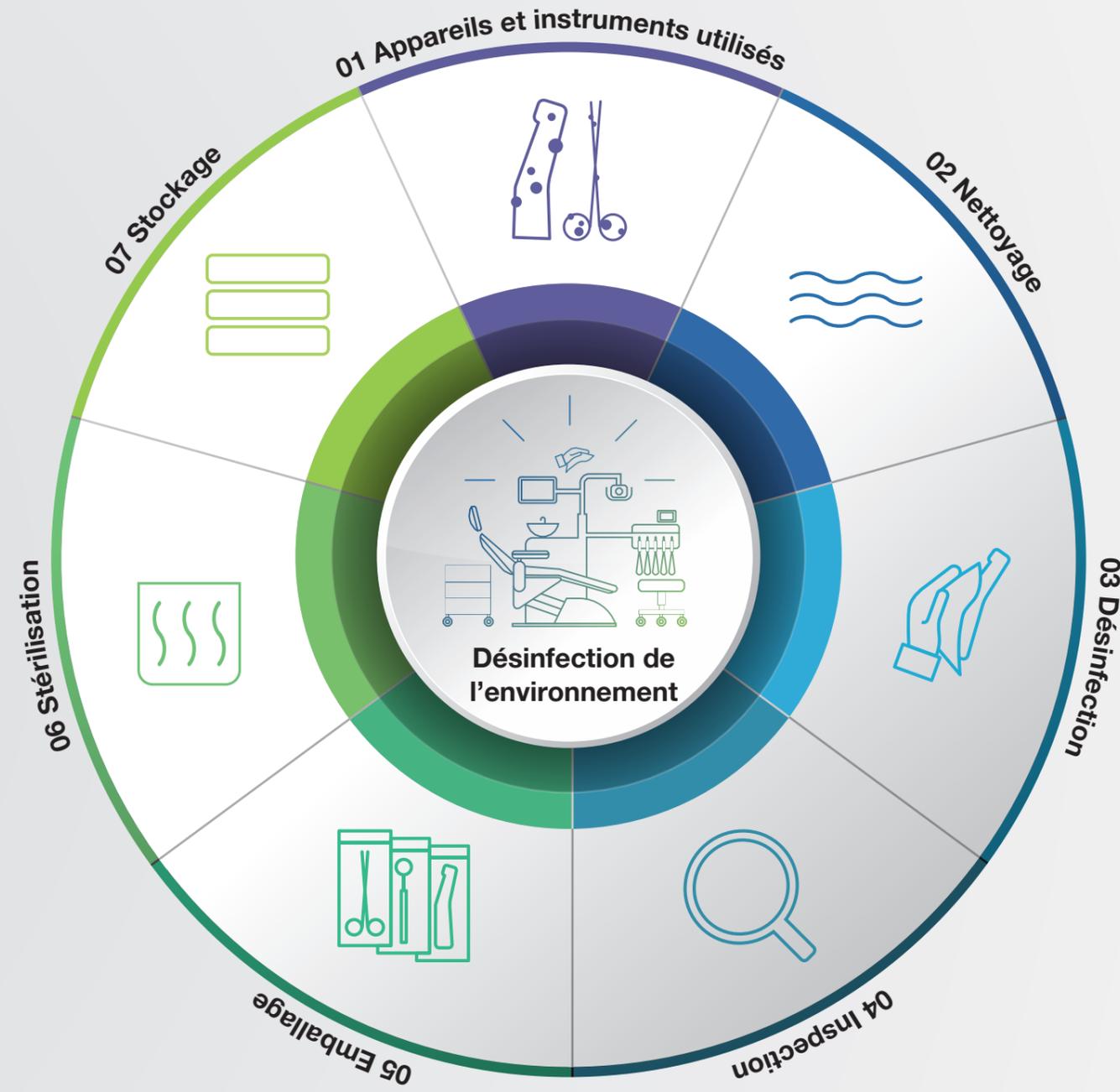

- 
Décontamination
- 
Nettoyage
- 
Désinfection
- 
**Inspection
et entretien/
maintenance**
- 
Emballage
- 
Stérilisation
- 
Traçabilité et stockage

Les turbines les plus harmonieuses

au monde par W&H



Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison standard.

Fabricant :

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribution :

W&H France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, **France**
t +33 388 773600
commercial.fr@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

20392 AFR Rev. 012 / 06.03.2024
Sous réserve de modifications