

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su
distribuidor o
en **wh.com**



Los contra-ángulos más legendarios

del mundo W&H



syneco

Las piezas de mano y contra-ángulos de W&H

People have Priority:
Para facilitar la elección de nuestras piezas de mano y contra-ángulos Synea, hemos seguido sus consejos y hemos creado dos gamas de instrumentos. Synea Vision: con innovaciones, como un revestimiento especial resistente a arañazos. Y Synea Fusion: Una serie de alta calidad y máxima rentabilidad.

VISION FUSION

Dos gamas de instrumental
Synea está disponible en dos gamas de instrumentos: Vision y Fusion.



Silenciosas
Mucho más silenciosas, gracias a la innovadora tecnología de engranajes.



Diseño monobloque
Ergonomía en una sola pieza, para unas condiciones de higiene óptimas.



Hecho a medida
El cabezal adecuado para cada aplicación.

Made in
AUSTRIA

Synea Vision Short Edition

La forma más rápida de conseguir más ergonomía.



Synea Power Edition

Para los materiales más duros.



synea VISION

La gama de instrumentos que cumplen las más altas exigencias. Piezas de mano y contra-ángulos hechos a medida de máxima precisión, elegancia y potencia.

synea FUSION

La solución eficiente y económica. ¡Nunca antes habían sido tan económicas las piezas de mano y los contra-ángulos de la acreditada calidad de Synea!

Synea Vision: las piezas de mano y contra-ángulos definitivos

Una solución para todas las aplicaciones:
con la gama de instrumentos Synea
Vision, W&H ha desarrollado una serie de
máxima calidad. Dos tamaños de cabezal
se encargan de ofrecer sorprendentes
posibilidades de acceso.
Y un nuevo revestimiento resistente a
los arañazos, mantiene su aspecto
impecable y alarga su vida útil.

La tecnología a su servicio

- › Diferentes tamaños de cabezales
- › Perfecta ergonomía y más silenciosos
- › Larga vida útil
- › Superficie resistente a arañazos
- › Durabilidad excepcional
- › 36 meses de garantía



Excelentes resultados de tratamiento

gracias a su funcionamiento
extremadamente silencioso y sus
optimizados diseños de cabezal.

synea VISION



Cabezales reducidos

Dos tamaños de cabezal de alta
velocidad y la altura de cabezal
más reducida del mundo a
revoluciones lentas. Ideal también
para los pacientes con aperturas
bucales pequeñas.

Superficie resistente a arañazos

Un revestimiento especial evita
el aspecto desgastado de los
instrumentos consiguiendo que
mantengan su apariencia como
la del primer día.

Spray quíntuple


El spray quíntuple para contra-
ángulos de alta velocidad garantiza
la refrigeración uniforme de la
zona de tratamiento, en cualquier
condición.

Gama versátil

¡Disponga de la pieza de mano y el
contra-ángulo correcto para cada
aplicación con la calidad de Synea!

Synea Vision Short Edition: el equilibrio perfecto entre potencia y ergonomía

La Synea Vision Short Edition facilita claramente
el desarrollo del tratamiento gracias a su peso y
longitud reducidos. Elija entre toda nuestra gama de
instrumentos de alta y baja velocidad. Junto con el
innovador y ultrarreducido micromotor EM-12 L,
equilibrio perfecto entre ergonomía y alto rendimiento.

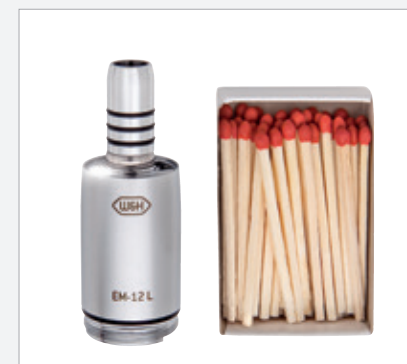

Pequeño, pero potente

Un innovador micromotor EM-12 L
con LED para una calidad de luz
natural de la zona de tratamiento.



Superficie resistente a arañazos

también en los contra-ángulos
Synea Vision Short Edition.



El mejor resultado

gracias al fácil acceso y
al pequeño cabezal.



Contra-ángulos para todos los casos

Synea Vision Short Edition
está disponible en la gama de
velocidades alta y baja, con la
posibilidad de 2 cabezales
distintos para velocidades altas.

Equilibrio perfecto

Los contra-ángulos
Short Edition se adaptan
perfectamente
a la mano.



Los contra-ángulos Synea
Vision Short Edition pueden
utilizarse en micromotores
con una longitud
de acoplamiento
ISO de 23 mm o inferior.
Compruebe la
compatibilidad con sus
micromotores actuales.
Su asesor W&H
estará encantado
de ayudarle.

Synea Power Edition:
Contra-ángulos de alto rendimiento
para materiales de alta resistencia

Con la serie especial Synea 900, W&H ha desarrollado tres potentes instrumentos de transmisión para aumentar la velocidad. La gama premium de la serie Synea — Synea Vision— se completa con el WK-900 LT, mientras que la gama de Synea Fusion se refuerza con el WG-900 A y el WG-900 LT.



Extraprecisa
gracias al diseño
adaptado del cabezal,
que guía mejor la fresa

Extrarrobusta
para reducir
los costes de
servicio

Extrapotente
para eliminar los
materiales más
resistentes

Sistema de
sujeción
extraestable
con un 20 %
más de fuerza
de sujeción



Extrasencillo
cambio de fresas gracias al
nuevo diseño de botón de
presión negro exclusivo e
inconfundible

Extrafuerte
con más
torque y mayor
potencia de
salida

Extraduradera
con al menos
un 20 % más
de vida útil

Synea Vision:
Datos técnicos



Modelos con luz: (barra de vidrio compacta)	WK-900 LT	WK-99 LT WK-99 LT S	WK-93 LT WK-93 LT S
Tamaño del cabezal:	Ø 10,7 mm	Ø 9,5 mm	Ø 9,1 mm
Altura de cabezal: con 19 mm (fresa FG) o 22,5 mm (fresa de contra-ángulo):	22,9 mm	22,3 mm	22 mm
Instrumentos rotatorios:	Fresa FG		
Diámetro máx. de la fresa:	Ø 2,5	Ø 2	
Longitud máx.:	25 mm	21 mm	
Multiplicación/reducción:	1:4	1:5	1:4,5
Spray:	3x	5x	
Áreas de aplicación:	› Preparación de coronas y cavidades › Remoción de empastes y metales	› Preparación de coronas y cavidades › Trepanar › Reseccionar › Acabados › Remoción de empastes y metales	



Modelos con luz: (barra de vidrio compacta)	WK-86 LT	WK-66 LT	WK-56 LT WK-56 LT S	HK-43 LT
Tamaño del cabezal:	Ø 9,5 mm			—
Altura de cabezal: con 19 mm (fresa FG) o 22,5 mm (fresa de contra-ángulo):	24,1 mm			—
Instrumentos rotatorios:	Fresa del contra-ángulo			Fresa de piezas de mano y contra-ángulos
Diámetro máx. de la fresa:	—			—
Longitud máx.:	34 mm			34 mm
Multiplicación/reducción:	8:1	2:1	1:1	1:1
Spray:	1x			
Áreas de aplicación:	› Excavación › Preparación cerca de la pulpa › Obturación del canal radicular › Sellado	› Excavación › Preparación cerca de la pulpa › Acabados	› Preparación de cavidades › Trepanar › Reseccionar › Separar › Acabados de márgenes de la cavidad y rellenos	› Preparar › Separar › Trepanar › Reseccionar en dientes anteriores › Técnica de trabajo fácil

Synea Fusion:

Excelente relación calidad-precio

Nunca antes había sido tan asequible la acreditada calidad Synea: con la gama de instrumental Synea Fusion, W&H ha desarrollado una serie en la que la rentabilidad desempeña un papel tan importante como la calidad.




Buena iluminación
Barra de vidrio compacta para una buena iluminación en la zona de tratamiento.

- Calidad al mejor precio**
- › Acreditada calidad Synea
 - › Máxima eficacia en la aplicación
 - › Máxima comodidad para el usuario



Perfil de sujeción mejorado
Para una sujeción segura y una higiene óptima.

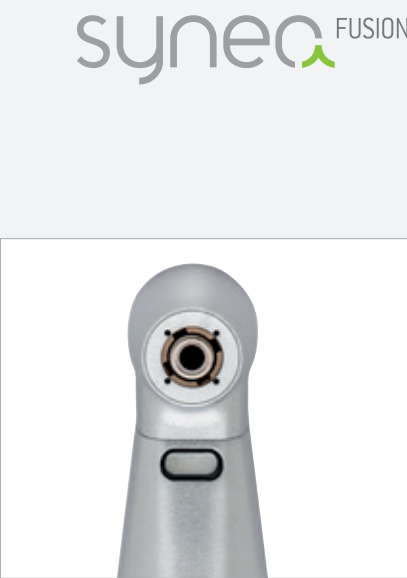

Refrigeración óptima por los cuatro lados
Refrigeración constante gracias al spray Quattro para contra-ángulos de alta velocidad.



Cabezal reducido
La mejor visibilidad y un acceso óptimo a la zona de tratamiento gracias a los pequeños cabezales.



Instrumentos especiales
Contra-ángulos oscilantes para tratamientos específicos.



Synea Fusion:

Datos técnicos



Modelos con luz: (barra de vidrio compacta)	WG-900 LT	WG-99 LT	WG-69 LT	WG-67 LT
Modelos sin luz:	WG-900 A	WG-99 A	WG-69 A	WG-67 A
Tamaño del cabezal:	Ø 10,7 mm	Ø 9,5 mm	Ø 10 mm	Ø 8,2 mm
Altura de cabezal: con 19 mm (fresa FG) o 22,5 mm (fresa de contra-ángulo):	22,9 mm	22,3 mm	–	
Instrumentos rotatorios:	Fresa FG		Trayectoria 0,9 para limas Intensiv	Trayectoria 1,1 para limas Dentatus
Diámetro máx. de la fresa:	Ø 2,5		predeterminado por las limas/puntas disponibles	
Longitud máx.:	25 mm			
Multiplicación/reducción:	1:4	1:5	2:1	
Spray:	3x	4x	1x	
Áreas de aplicación:	› Preparación de coronas y cavidades › Remoción de empastes y metales	› Preparación de coronas y cavidades › Trepanar › Reseccionar › Acabados › Remoción de empastes y metales	› Acabado de zonas interdentes y subgingival y de bordes de cavidades › Biselado de los bordes en las preparaciones por etapas y en las de cavidades › Abrasión de placa subgingival › Stripping en la ortopedia maxilar › Revolucioné máx. 40.000 rpm	› Remoción de excedentes › Pulido inicial › Pulido fino › Pulido del espacio interdental y subgingival › Revoluciones máx. 20.000 rpm




Modelos con luz: (barra de vidrio compacta)	WG-66 LT	WG-56 LT	
Modelos sin luz:	WG-66 A	WG-56 A	HG-43 A
Tamaño del cabezal:	Ø 9,5 mm		–
Altura de cabezal: con 19 mm (fresa FG) o 22,5 mm (fresa de contra-ángulo):	24 mm	24,1 mm	–
Instrumentos rotatorios:	Fresa del contra-ángulo	Fresa del contra-ángulo	Fresa de piezas de mano y contra-ángulos
Diámetro máx. de la fresa:	–	–	
Longitud máx.:	34 mm	34 mm	
Multiplicación/reducción:	2:1	1:1	
Spray:	1×		
Áreas de aplicación:	› Excavación › Preparación cerca de la pulpa › Acabados	› Preparación de coronas y cavidades › Trepanar › Reseccionar › Separar › Acabados de márgenes de la cavidad y rellenos	› Preparar › Separar › Trepanar › Reseccionar en dientes anteriores › Técnica de trabajo fácil

W&H AIMS

¡La seguridad es lo primero!

La higiene tiene una importancia vital en la clínica dental. W&H AIMS está aquí para ayudar con una amplia gama de productos, conocimientos fundamentales y toda la información pertinente en un solo vistazo.

Para su seguridad y la de sus pacientes.
aims.wh.com

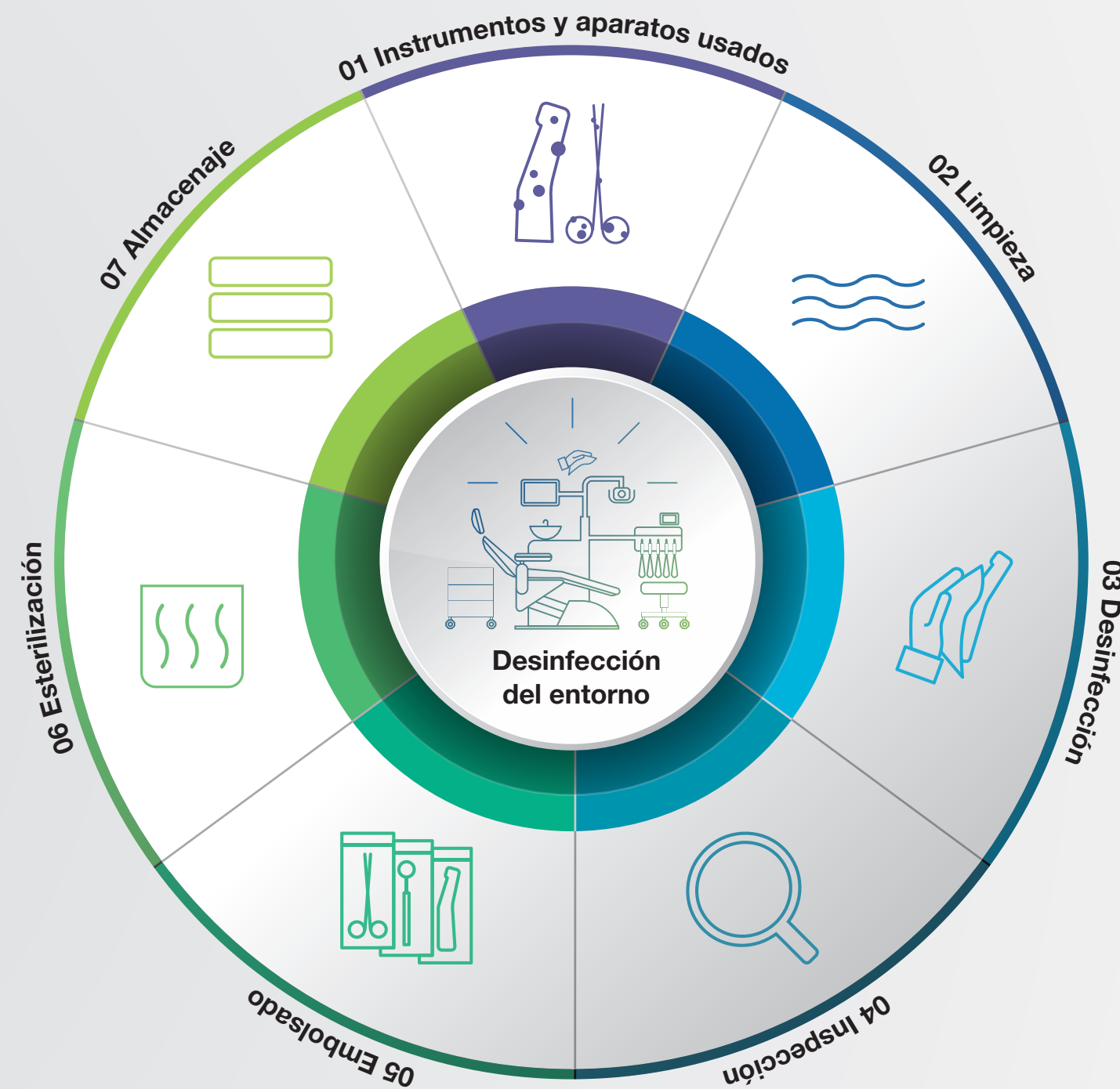

Los contra-ángulos con más éxito

del mundo W&H



Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales mostrados no se incluyen en el contenido suministrado.

Fabricante:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribución:

Wehadent Ibérica S.L Unipersonal
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**
t +34 96 353 20 20
oficinas.es@wh.com
wh.com

20393 ASP Rev. 010 / 09.12.2025
Salvo modificaciones