

#whdentalwerk



video.wh.com

Plus d'info

sur

wh.com



Détartreur à air

rapide et
puissant



proxeo SONIC

La prophylaxie a du style

Rapide et puissant.

Le détartreur à air comprimé avec spray intégré et deux faisceaux de lumière grand format est idéal pour éliminer mécaniquement la plaque et le tartre et pour nettoyer les surfaces radiculaires. Résultat : Des surfaces dentaires impeccablement entretenues améliorent le bien-être et la confiance des patients.



Réglable en continu

Une bague de contrôle règle l'intensité de la puissance pour s'adapter aux différents traitements.



Larges faisceaux de lumière

Deux larges faisceaux de lumière éclairent la zone de traitement.




Clé de changement d'insert

Remplacement facile des inserts avec la clé de changement d'insert W&H.



Spray intégré

Le spray intégré refroidit la zone de traitement sans interruption.

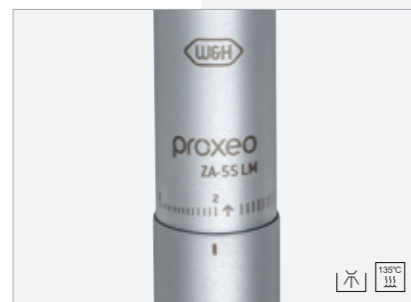

Conçu pour une hygiène optimale

Le nettoyage des instruments est particulièrement efficace grâce à leur surface lisse. Ils sont thermodésinfectables et stérilisables.

Des inserts pour chaque application

Une conception alliant polyvalence et ergonomie.

Le large choix et la conception optimale des inserts assurent l'élimination efficace et en douceur du tartre, même dans les zones difficilement accessibles.¹




Insert de prophylaxie 1AU

Application universelle, également pour les surfaces de molaires avec inclinaison linguale.



Insert de prophylaxie 2AU

Pour les dents antérieures du maxillaire inférieur, les surfaces linguales, particulièrement adapté dans les cas de tartre tenace.

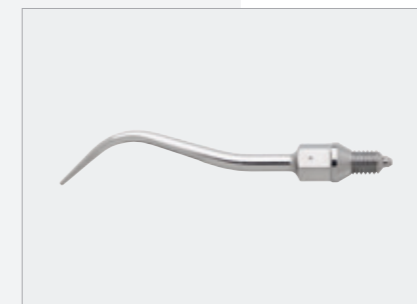

Insert de prophylaxie 3AU

Pour le détartage des collets et pour l'élimination des dépôts de nicotine.



Insert de parodontologie 1AP

Élimination des dépôts sous gingivaux, en particulier dans les poches parodontales profondes.



Insert de parodontologie 2APr, 2API

Pour l'élimination des dépôts sous gingivaux. Disponible en deux versions, coudé à droite ou à gauche.



Insert de parodontologie 3AP

Insert avec un revêtement diamant pour un débridement parodontal de furcations et de concavités.

¹Seidel, M., Borenus, H., Schorr, S. et al. Results of an experimental study of subgingival cleaning effectiveness in the furcation area. BMC Oral Health 21, 381 (2021).

Caractéristiques techniques

Détartreur à air Proxeo





Modèle :	ZA-55 LM / ZA-55 LS	ZA-55 / ZA-55 M
Lumière :	Oui	Non
Puissance réglable :	Oui	Non
Fréquence :	6 kHz	
Amplitude :	< 200 µm*	
Pression de fonctionnement :	3,4 ± 0,3 bar	
Débit de liquide de refroidissement :	20 – 50 ml/min	
Raccord :	RM-34 LED, Multiflex®** / Sirona®**	RQ-3, RQ-4, RQ-14 / Multiflex®**
Inserts W&H utilisables :	1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr, 3AP Les inserts des autres fabricants doivent être approuvés pour le détartreur à air W&H.	

* En fonction de l'insert et du réglage de la puissance.

** Multiflex® et Sirona® sont des marques de parties tierces non affiliées à W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.



Modèle :	ZE-55 BC	ZE-55 RM
Lumière :	Non	
Puissance réglable :	Non	
Fréquence :	6 kHz	
Amplitude :	< 200 µm*	
Pression de fonctionnement :	2,5 ± 0,3 bar	
Débit de liquide de refroidissement :	20 – 50 ml/min	
Raccord :	 Raccord fixe 	
Inserts W&H utilisables :	1AU, 2AU, 3AU, 1AP, 2API, 2APr, 3AP Les inserts des autres fabricants doivent être approuvés pour l'utilisation avec le détartreur à air W&H.	



Raccord W&H RM-34 LED pour connexion Multiflex®**

- › Possibilité d'utiliser des LED sans modifier l'unit dentaire
- › Longue durée de vie de la LED
- › Réglage en continu de l'alimentation en eau du spray
- › Clapet anti-retour
- › Garantie de 24 mois

Fabricant :

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribution :

W&H France S.à.r.l
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, **France**
t +33 388 773 600
commercial.fr@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Information réglementaire :

Dispositifs Médicaux Classe 2a / CE 0297 / DQS.
Réservés aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation ou sur l'étiquetage du produit.