

#whdentalwerk



video.wh.com

Вече при Вашия
дистрибутор
или **wh.com**



Надеждни. Ефективни. Прецизни.

Турбини



alegra

R0-54

3-ФЛЕКСЕН СПРЕЙ

за оптимално охлаждане на обработваната зона от всички страни.

ОПТИМАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА LED

за отлична видимост и осветяване на обработваната зона.

ВИСОК ВЪРТЯЩ МОМЕНТ

за бързо отстраняване на зъбните структури.

ПРЕЦИЗНА ИЗРАБОТКА

за тиха работа без вибрации.

МАЛКА ГЛАВА НА ТУРБИНАТА

за оптимална видимост на обработваната зона.

СИСТЕМА НА ЦАНГАТА С ПУШ БУТОН

за лесна и бърза смяна на борера без усилие.

КЕРАМИЧНИ ЛАГЕРИ

за изключително тиха работа и дълъг експлоатационен живот.

ВОДЕН ФИЛТЪР

за безупречно функциониране на спрея.

ИНОВАТИВНА СИСТЕМА НА ГЕНЕРАТОРА

в бързия куплинг Roto Quick за работа с турбини Alegro със светлина.

Дълъг експлоатационен живот и изключително тиха работа

Открийте новите изключително тихи турбини Alegro за ежедневна работа във Вашата практика. Разработени, за да отговарят на Вашите нужди с най-съвременните технологии. Произведени в Австрия: за отлични резултати от манипулациите.

С пулса на времето

W&H е динамична и бързо разширяваща се компания. Ние гарантираме надеждно обслужване и отличен сервиз. Нашата рецепта за успех: иновативни технологии, висококачествени материали, строги критерии за качество и дългогодишен опит в развитието на прецизните дентални инструменти.

Made in AUSTRIA

Дълъг експлоатационен живот

Керамичните лагери гарантират минимално износване. Особено при оптимална грижа и поддръжка!

Тиха работа

Турбините Alegro Ви предлагат отлично качество и тиха работа без вибрации благодарение на прецизното производство.

Сменяем воден филтър

Предотвратява навлизането на замърсявания в турбината.

Вашият надежден партньор


Тази комбинация превръща турбините на W&H в перфектни партньори при работа с Вашите пациенти.





Максимална ефективност и безопасност по време на работа

Гамата турбини Alegria предлага най-новата технология за отлични резултати при препарация! Убедете се в отличната ефективност по време на работа в съчетание с максимална безопасност: за Вас и Вашите пациенти.

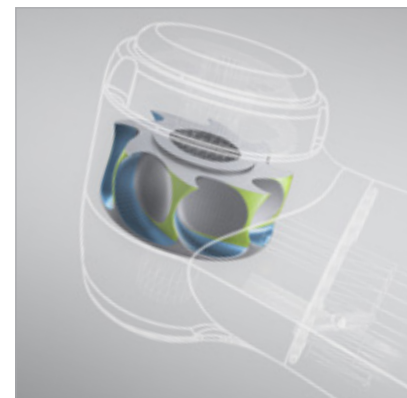

Пълен напред с голямата мощност от ротора

Оптимизираната геометрия на перките осигурява по-голяма ефективност на ротора. За максимален въртящ момент и оптимална мощност по време на препарация.



Прецизно охлаждане

3-флексният спрей охлажда обработваната зона от всички страни и гарантира безопасността по време на лечението.



Специално разработени турбини

От труднодостъпните зони до бързото отстраняване на зъбните структури: точният размер на главата за всяко приложение.

Система на хигиенната глава

Циркулиращият въздух в главата на турбината предотвратява засмукването на аерозолни частици при инерционното затихване на ротора.




Лесна смяна на борера

Оптимален баланс между лесното натискане на пуш бутона и максималната сила на задържане на системата на цангата. Не са необходими инструменти!




Хигиена и поддръжка на Вашите турбини

„По-добра поддръжка – по-дълго удоволствие.“ Редовното почистване и поддръжка на Вашите турбини предотвратява преждевременното износване и ненужните сервизни разходи.

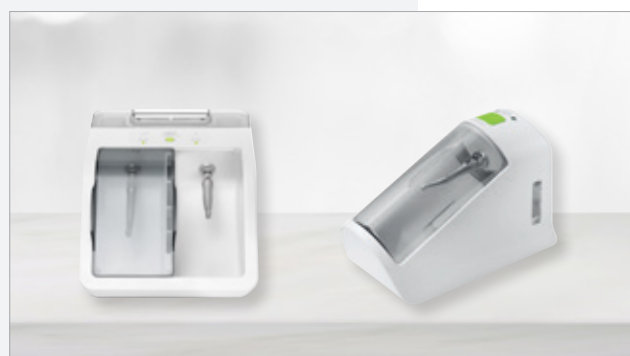

Кратки интервали на поддръжка – дълъг експлоатационен живот

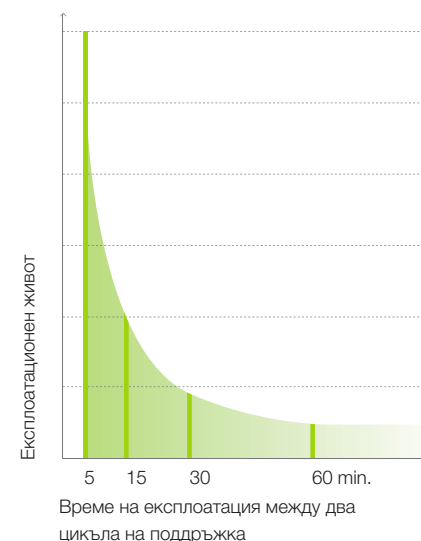

За всяко приложение

Маслото W&H Service Oil F1 е продукт на научно-изследователската дейност на W&H. То е разработено успоредно с модерната технология на задвижване в W&H инструментите. Това масло Ви дава увереността, че осигурявате оптимална поддръжка на продуктите на W&H.

Перфектно за ръчна поддръжка

W&H Service Oil F1 в спрей-флакон почиства и смазва Вашите турбини и по този начин осигурява безупречното им функциониране.

Поддръжка с едно натискане на бутона

Гамата апарати за поддръжка на W&H Ви предлага оптимално смазване на Вашите турбини. При това за рекордно кратко време!

Оптимална видимост и независим LED

Интегрирането на генератор в бързия куплунг Roto Quick Ви дава възможност за рентабилно разширяване на Вашата гама турбини Alegria с допълнителна LED турбина. Предимствата за Вас: гъвкавост при работа и в хигиенната обработка.



Отлична ергономичност

Свободното въртене на турбината на 360° на куплунга, ниското общо тегло и тънкият дизайн осигуряват работа без умора.

Други предимства накратко

- › Интегриран възвратен клапан: предотвратява засмукването на аерозолни частици в спрей каналите
- › Подлежат на термодезинфекция
- › Подлежат на стерилизация до 135 °C
- › 12 месеца гаранция



LED турбина + бърз куплунг с генератор = независима светлина

С помощта на генератора в бързия куплунг Roto Quick е възможно използването на турбини със светлина с шлаух без електрическо захранване.



Оптимална видимост

Позицията на LED диода при главата на турбината гарантира оптимална видимост и осветяване на обработваната зона.

Технически данни



Турбини с LED: Куплунги с генератор: Турбини без светлина:	TE-97 LQ* RQ-53 / RQ-54 TE-97 / TE-97 RM / TE-97 BC	TE-98 LQ* RQ-53 / RQ-54 TE-98 / TE-98 RM / TE-98 BC	TE-95 RM / TE-95 BC
Светлина (LED вариант):	LED и генератор		–
Размер на главата:	Ø 10,4 mm	Ø 12,2 mm	
Мощност**:	16 W	18 W	
Обороти (min ⁻¹):	390 000 ± 30 000	330 000 ± 30 000	
Ротиращи инструменти:	Турбинни борери, съгласно ISO 1797-1, с Ø 1,6 mm		
Максимален диаметър на работната част:	2 mm		
Максимална дължина:	21 mm	25 mm	
Тегло:			
› Турбини с LED	46 g	48 g	
› Куплунги с генератор	26 g / 20 g	26 g / 20 g	
› Турбини без светлина	46 g / 47 g / 47 g	48 g / 50 g / 50 g	49 g / 49 g
Работно налягане:	2,2–2,8 bar (препоръчан: 2,5 bar) (32–40 PSI)		
Сачмени лагери:	керамични		стоманени
Спрей:	3-флексен		единичен

* Турбините с LED светлина TE-97 LQ и TE-98 LQ са предназначени за използване само с W&H куплунги Roto Quick RQ-53 и RQ-54.

** Стойностите на производителност се отнасят при измерено работно налягане от 2,5 bar за турбини без светлина, 2,8 bar за турбини със светлина и налягане на обработения въздух макс. 0,2 bar. При работа с максимално допустимото работно налягане от 2,8 bar е възможно да се достигнат 16 W при TE-97, TE-97 RM, TE-97 BC, както и 18 W при TE-98, TE-98 RM, TE-98 BC.

Внимание: Не всички продукти, споменати в тази брошура, са налични във всички държави.
За повече информация се свържете с местния търговски партньор на W&H.

Производител:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
 5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
 office@wh.com
wh.com

Дистрибуция:

W&H Bulgaria Ltd.
 14 Svilnitsa Str.
 1463 Sofia, **Bulgaria**
t +359 2 8549565, +359 2 8549566
f +359 2 8549590
 office.bg@wh.com
wh.com