

#whdentalwerk



video.wh.com

Теперь у вашего
торгового агента или
на сайте **wh.com**



Надежно. Эффективно. Точно.

Турбинные наконечники



alegra

ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ СПРЕЙ

.....

для оптимального охлаждения обрабатываемого участка со всех сторон

ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СВЕТОДИОДА

.....

для отличного обзора и освещения области лечения

ВЫСОКИЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

.....

для большой производительности

ПРЕЦИЗИОННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ

.....

для бесшумной работы без вибрации

НЕБОЛЬШАЯ ГОЛОВКА ТУРБИННОГО НАКОНЕЧНИКА

.....

для оптимального обзора области лечения.

КНОПЧНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИМА

.....

для несложной и быстрой замены стоматологического бора с незначительным усилием.

КЕРАМИЧЕСКИЙ ШАРИКОПОДШИПНИК

.....

для тихого хода во время работы и длительного срока эксплуатации

ВОДЯНОЙ ФИЛЬТР

.....

для превосходной работы спреевых каналов

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГЕНЕРАТОРА

.....

в быстросъемном соединении Roto Quick для использования с турбинными наконечниками с оптикой серии Alegro

Длительный срок эксплуатации и тихая работа

Откройте для себя новые турбинные наконечники Alegro с тихим ходом во время работы, предназначенные для ежедневного использования. Они были разработаны с использованием инновационных технологий и в соответствии с пожеланиями наших клиентов. Сделано в Австрии. Для оптимального результата лечения.

Современные технологии

W&H — активная и быстроразвивающаяся компания. Мы гарантируем безупречное обслуживание и профессиональную поддержку. Залог нашего успеха — это инновационные технологии, превосходные материалы, строгие критерии качества и многолетний опыт в разработке прецизионных стоматологических инструментов.

Made in AUSTRIA

Длительный срок службы

Керамические шарикоподшипники гарантируют минимальный износ ваших инструментов. Необходимы правильная обработка и уход.

Тихая работа

Турбинные наконечники Alegro обеспечивают комфортную работу без вибраций благодаря прецизионному изготовлению.

Сменный водяной фильтр

Предотвращает попадание частиц грязи в турбинный наконечник.

Ваш надежный партнер

Турбинные наконечники от компании W&H идеально подходят для лечения ваших пациентов.





**Быстрое
и точное
препарирование**




**Длительный
срок службы**



**Оптимальный
обзор**

Максимальная эффективность и безопасность во время лечения

Линейка турбинных наконечников Alegra — это инновационная технология для великолепных результатов препарирования. Испытайте максимальную эффективность при лечении в сочетании с высоким уровнем безопасности для вас и ваших пациентов.

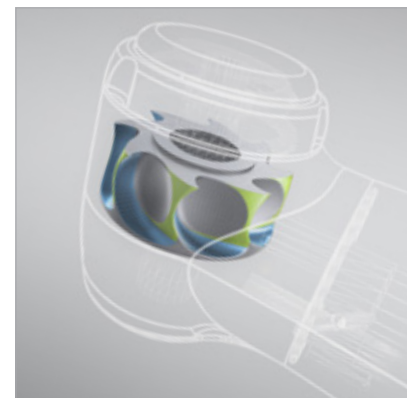

Максимальная мощность переднего хода благодаря ротору Power Blade

Благодаря оптимальной геометрии лопастей достигается более высокий КПД на роторе. Для достижения максимального усилия подачи и оптимальной производительности в течение всего препарирования



Точечное охлаждение

Трехточечный спрей обеспечивает охлаждение обрабатываемого участка со всех сторон и гарантирует безопасность во время лечения.



Турбинные наконечники, изготовленные на заказ

От труднодоступных областей до высокой производительности: разный размер головки для каждого клинического случая.

Система очистки головки

Без всасывания частиц аэрозоля при работе ротора по инерции благодаря циркуляции воздуха в головке турбинного наконечника.




Несложная замена стоматологического бора

Оптимальный баланс между простотой эксплуатации кнопочного зажима и максимальной силой фиксации зажимного устройства. Без вспомогательных инструментов!




Чистка турбинных наконечников и уход за ними

Чем лучше уход, тем дольше срок службы. Регулярная чистка инструментов и уход за ними помогут предотвратить преждевременный износ и избежать лишних сервисных затрат.

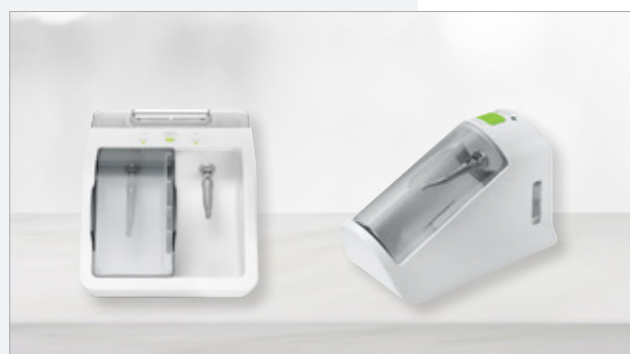

Короткие циклы обслуживания — длительный срок службы

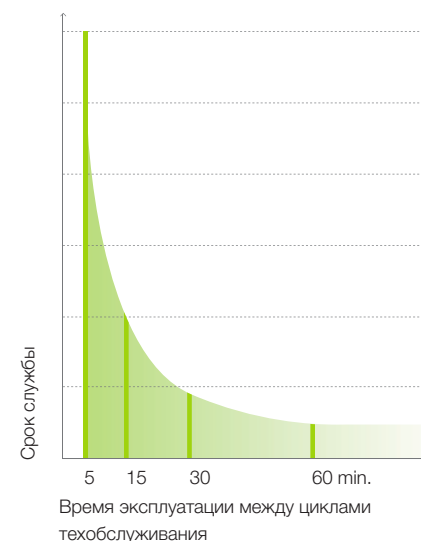

Для любой области применения

Сервисное масло W&H Service Oil F1 — результат научных разработок компании W&H. Оно было разработано на основе последних технологий W&H. Сервисное масло гарантирует наилучший уход за инструментами компании W&H.

Идеально подходит для ручной обработки

Сервисное масло W&H Service Oil F1 в аэрозоле для очистки и смазки турбинных наконечников обеспечит бесперебойную работу.

Уход одним нажатием кнопки

Приборы для очистки и обслуживания из ассортимента W&H обеспечивают оптимальную смазку турбинных наконечников. И все это в рекордные сроки!

Оптимальный обзор и независимый светодиод

Быстросъемное соединение Roto Quick со встроенным генератором предоставляет возможность дополнения вашей линейки турбинных наконечников серии Alegra наконечником со светодиодом. Ваши преимущества: универсальное применение и гигиеническая обработка.



Превосходная эргономика

Комфортная работа без усталости благодаря вращению турбинного наконечника на 360° в быстросъемном соединении, малому весу и эргономичному дизайну.

Преимущества, которые очевидны с первого взгляда

- › Встроенный обратный клапан предотвращает попадание аэрозоля в канал спрея
- › Замена компонентов пользователем
- › Возможность термической дезинфекции
- › Возможность стерилизации при 135 °C
- › Гарантия 12 месяцев



Турбинный наконечник со светодиодом + быстросъемное соединение с генератором = автономное освещение

Генератор в быстросъемном соединении Roto Quick позволяет использовать оптику турбинного наконечника без источника электроснабжения.



Оптимальный обзор

Расположение светодиода в головке турбинного наконечника обеспечивает оптимальные обзор и освещение области лечения.

Технические данные



Турбинные наконечники со светодиодами Соединение с генератором Турбинные наконечники без оптики	TE-97 LQ* RQ-53 / RQ-54 TE-97 / TE-97 RM / TE-97 BC	TE-98 LQ* RQ-53 / RQ-54 TE-98 / TE-98 RM / TE-98 BC	TE-95 RM / TE-95 BC
Оптика (модель со светодиодом)	Светодиод и генератор		—
Размер головки	Ø 10,4 мм	Ø 12,2 мм	
Мощность**	16 Вт	18 Вт	
Частота вращения (об/мин)	390 000 ± 30 000	330 000 ± 30 000	
Вращающиеся инструменты	Бор FG, в соответствии с ISO 1797-1, Ø 1,6 мм		
Максимальный диаметр рабочей части	2 мм		
Максимальная длина	21 мм	25 мм	
Вес:			
› Турбинные наконечники со светодиодами	46 г	48 г	
› Соединение с генератором	26 г / 20 г	26 г / 20 г	
› Турбинные наконечники без оптики	46 г / 47 г / 47 г	48 г / 50 г / 50 г	49 г / 49 г
Рабочее давление	2,2–2,8 бар (рекомендуется: 2,5 bar) (32–40 фунтов на кв. дюйм)		
Шарикоподшипник	Керамический		Стальной
Спрей	Тройной		Одинарный

* Турбинные наконечники TE-97 LQ и TE-98 LQ со светодиодом предназначены для использования с быстросъемными соединениями W&N Roto Quick RQ-53 и RQ-54.


** Значение мощности действительно при номинальном рабочем давлении для турбинных наконечников без оптики 2,5 бар, для турбинных наконечников с оптикой 2,8 бар и давления обратного воздуха макс. 0,2 бар. В режиме эксплуатации с максимально допустимым рабочим давлением 2,8 бар возможно достижение мощности 16 Вт у турбинных наконечников TE-97, TE-97 RM, TE-97 BC, а также 18 Вт у наконечников TE-98, TE-98 RM, TE-98 BC.

Внимание! Не все продукты, перечисленные в этой брошюре, доступны во всех странах.
Для получения более подробной информации обратитесь к местному партнеру W&N по сбыту.

Производитель:

W&N Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Авторизованный дилер:



Все изображения приводятся только в качестве иллюстраций.
Дополнительное оборудование и принадлежности не входят в комплект поставки.

20415 ARU Rev. 008 / 03.07.2026
С правом на изменения