

#whdentalwerk



video.wh.com

Вече при Вашия
дистрибутор
или **wh.com**



Издръжливи. Изключително леки. Компактни.

Прави и обратни
наконечници



alegra

ВЪНШЕН СПРЕЙ КЛИП

за оптимално охлаждане на обработваната зона.

ЛЕКА КОНСТРУКЦИЯ И ТЪНЪК ДИЗАЙН

за работа без умора.

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ

за максимална здравина и дълъг експлоатационен живот.

МАЛКА ГЛАВА

за оптимална видимост на обработваната зона.

СИСТЕМА НА ЦАНГАТА С ПУШ БУТОН

за лесна и бърза смяна на борера без усилие.

ЗАВЪРТАНЕ НА 360°

за работа без умора и отлична ергономичност.

ВИСОК ВЪРТЯЩ МОМЕНТ

за бързо отстраняване на зъбните структури.

Максимална ефективност

и безопасност по време на работа

С Alegra лечението на Вашите пациенти е изключително ефективно и безопасно. Правите и обратни наконечници „Произведени в Австрия“ са разработени с доказаното W&N качество.

С пулса на времето


W&N е динамична и бързо разширяваща се компания. Ние гарантираме надеждно обслужване и отличен сервиз. Нашата рецепта за успех: иновативни технологии, висококачествени материали, строги критерии за качество и дългогодишен опит в развитието на прецизните дентални инструменти.

Made in AUSTRIA




Бърза и прецизна подготовка

За ефективна работа с правите и обратни наконечници с мощни електрически и въздушни микромотори на W&N.

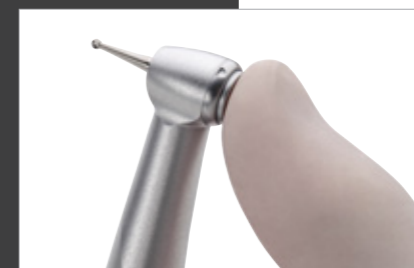


Лесна смяна на борера

Системата на цангата с пуш бутон осигурява лесна и бърза смяна на борера.

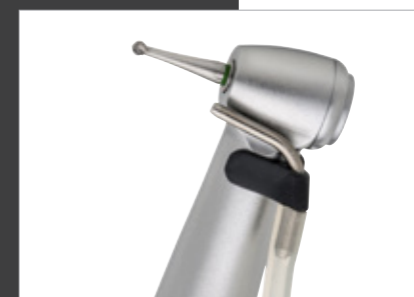

Външно охлаждане

Допълнителният външен спрей клип дава възможност за охлаждане на обработваната зона.

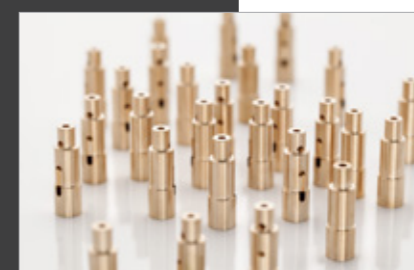

Вашият надежден партньор

Тази комбинация превръща правите и обратни наконечници на W&N в перфектни партньори при работа с Вашите пациенти.



Работа без умора

Отличната ергономичност предотвратява прекомерното натоварване на Вашите ръце по време на препарация. Открийте прави и обратни наконечници Alegra за най-добри резултати!



Отлична ергономичност

Свободното въртене на обратния наконечник на 360° на въздушния микромотор, ниското общо тегло и тънкият дизайн осигуряват работа без умора.



AM-20 RM, AM-20 BC, AM-20 E RM, AM-20 E BC, AM-20 RQ

W&H предлага оптимална гама въздушни микромотори, подходящи за Вашите прави и обратни наконечници Alegra с 18 mm връзка.


Висока мощност на задвижване

Мощните въздушни микромотори Ви осигуряват ефективна работа с правите и обратни наконечници.



Работа без умора

Исключително лекият дизайн на правите и обратни наконечници намалява умората.

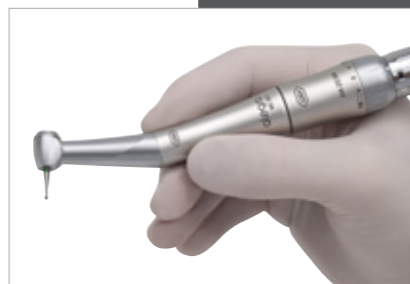

Перфектен баланс

Обратният наконечник приляга удобно в ръката и е перфектно балансиран с въздушния микромотор.

Отлична видимост и дълъг експлоатационен живот

Дизайнът на правите и обратни наконечници Alegra осигурява оптимална видимост на обработваната зона. Това е особено полезно при труднодостъпни зони.



Отлична видимост

Малката глава на обратния наконечник осигурява оптимална видимост на обработваната зона.



Здрави и издръжливи

Висококачествените материали правят правите и обратни наконечници Alegra изключително здрави и издръжливи.



Други предимства накратко

- › Подлежат на стерилизация до 135 °C

Начален комплект Alegra

Разопакувайте и започнете работа! С началните комплекти Alegra имате най-добрата основа за оптимални резултати при препарация. Изберете Вашия начален комплект Alegra за работа с пациенти.



Високооборотен комплект Alegra

Състои се от турбина TE-95 RM или TE-95 BC, обратен наконечник WE-56 T, наконечник HE-43 T и въздушен микроomotor AM-20 RM или AM-20 BC.



Опаковка на комплекта

Практично опаковане за транспортиране на Вашите турбини, прави и обратни наконечници Alegra.

Нискооборотен комплект Alegra

Състои се от обратен наконечник WE-56 T, наконечник HE-43 T и въздушен микроomotor AM-20 RM или AM-20 BC.




Хигиена и поддръжка на Вашите прави и обратни наконечници

„По-добра поддръжка – по-дълго удоволствие.“ Редовното почистване и поддръжка на Вашите инструменти предотвратява преждевременното износване и ненужните сервизни разходи.



Кратки интервали на поддръжка – дълъг експлоатационен живот

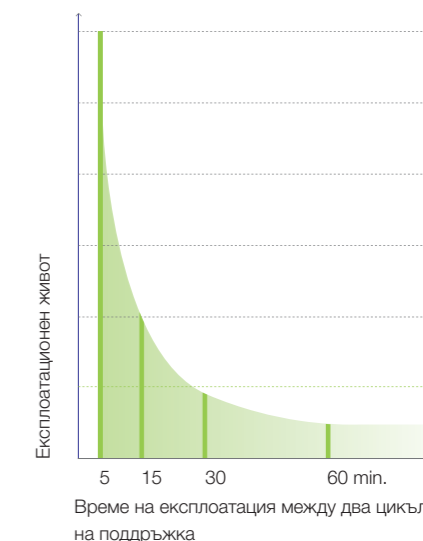

За всяко приложение

Маслото W&H Service Oil F1 е продукт на научно-изследователската дейност на W&H. То е разработено успоредно с модерната технология на задвижване в W&H инструментите. Това масло Ви дава увереността, че осигурявате оптимална поддръжка на продуктите на W&H.

Перфектно за ръчна поддръжка

W&H Service Oil F1 в спрей-флакон почиства и смазва Вашите прави и обратни наконечници и по този начин осигурява безупречното им функциониране.

Поддръжка с едно натискане на бутона

Гамата апарати за поддръжка на W&H Ви предлага оптимално смазване на прави и обратни наконечници. При това за рекордно кратко време!

Технически данни



Тип:	WE-56 T	WE-57 T	WE-66 T	HE-43 T
Предавателно съотношение:	1:1		4:1	1:1
Размер на главата:	Ø 10,1 mm			–
Височина на главата: с 19 mm (турбинни борери) или 22,5 mm (борери за обратни наконечници):	24,3 mm	22,5 mm	24,3 mm	–
Ротиращи инструменти:	Борери за обратни наконечници	Турбинни борери	Борери за обратни наконечници	Борери за прави и обратни наконечници
Диаметър на опашката на инструмента:	2,35 mm	1,6 mm	2,35 mm	2,35 mm
Макс. дължина:	34 mm	25 mm	34 mm	50 и 34 mm
Тегло:	41 g	42 g	41 g	44 g
Спрей (опция):	единичен, външен			
Куплиране на инструмента:	съвместим с ISO 3964 (Ø 18 mm)			

Въздушни микромотори AM-20



Тип:	AM-20 E RM / AM-20 RM	AM-20 E BC / AM-20 BC	AM-20 RQ
Куплунг откъм страната на шлауха:	Фиксирана връзка Стандартна връзка с 4-отвора	Фиксирана връзка Borden връзка с 2(3)-отвора	Roto Quick
Светлина (LED вариант):	–		
Спрей:	външен / –		–
Тегло:	58 g / 55 g	57 g / 55 g	54 g
Мощност:	30 W		
Диапазон на оборотите (min ⁻¹) при работно налягане от:	2,5 bar: 5.000 – 20.000* 3 bar: 5.000 – 25.000*		
Посока на въртене:	десен/ляв ход		
Гаранция:	24 месеца		

* При въздушно задвижване данните за мощността и оборотите зависят от качеството на използваните шлаухи на турбината и по тази причина могат да се различават от указаните.

Внимание: Не всички продукти, споменати в тази брошура, са налични във всички държави. За повече информация се свържете с местния търговски партньор на W&H.

Производител:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Дистрибуция:

W&H Bulgaria Ltd.
14 Svilenitsa Str.
1463 Sofia, **Bulgaria**
t +359 2 8549565, +359 2 8549566
f +359 2 8549590
office.bg@wh.com
wh.com