

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf **wh.com**



Langlebig. Kompakt. Präzise.

Hand- und
Winkelstücke



alegra

EXTERNER SPRAYCLIP

für die optimale Kühlung der Behandlungsstelle.

ERGONOMISCHES DESIGN

für ermüdungsfreies Arbeiten.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

für maximale Robustheit und Langlebigkeit.



KLEINER KOPF

für optimale Sicht auf die Behandlungsstelle.

DRUCKKNOPF-SPANNSYSTEM

für einfaches und schnelles Bohrerwechseln mit geringer Betätigungskraft.

360° DREHBARKEIT

für ermüdungsfreies Arbeiten und beste Ergonomie.

HOHES DREHMOMENT

für hohe Abtragsleistung.

Höchste Anwendungseffizienz und Sicherheit in der Behandlung

Mit Alegria führen Sie die Behandlung an Ihrem Patienten mit höchster Effizienz und mit größter Sicherheit durch. Hand- und Winkelstücke „Made in Austria“ nach bewährter W&H Qualität entwickelt.

Am Puls der Zeit


W&H ist ein dynamisches und stark expandierendes Unternehmen. Wir garantieren zuverlässige Betreuung und ausgezeichneten Service. Unser Erfolgsrezept: Innovative Technologien, hochwertige Materialkonzepte, strenge Qualitätskriterien und jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von zahnmedizinischen Präzisionsinstrumenten.

Made in AUSTRIA




Schnell und präzise präparieren

Für den effizienten Einsatz der Hand- und Winkelstücke mit leistungsstarken W&H Elektro- und Luftmotoren.

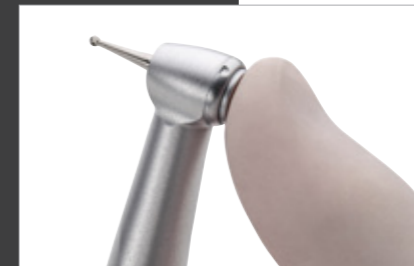

Einfaches Bohrerwechseln

Das Druckknopf-Spannsystem ermöglicht einfaches und schnelles Wechseln des Bohrers.

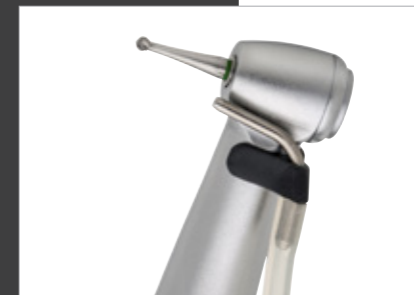

Externe Spraykühlung

Der optional erhältliche externe Sprayclip ermöglicht die Kühlung der Behandlungsstelle.



Ihr perfekter Partner

Diese Kombination macht aus W&H Hand- und Winkelstücken den perfekten Partner für die Arbeit an Ihrem Patienten.



Kräftechonendes Arbeiten

Dank bester Ergonomie vermeiden Sie zu hohe Beanspruchung Ihrer Hände beim Präparieren. Entdecken Sie die neuen Alegra Hand- und Winkelstücke für beste Ergebnisse!



Beste Ergonomie

Eine leichte 360° Drehbarkeit des Winkelstücks auf dem Luftmotor, geringes Gesamtgewicht und ein schlankes Design ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten.



AM-25 RM, AM-25 BC, AM-25 E RM, AM-25 RQ etc.

Passend für Ihre Alegra Hand- und Winkelstücke bietet W&H das optimale Sortiment an Luftmotoren.


Hohe Antriebsleistung

Die leistungsstarken Luftmotoren ermöglichen Ihnen den effizienten Einsatz der Hand- und Winkelstücke.



Ermüdungsfreies Arbeiten

dank des ergonomischen Designs.

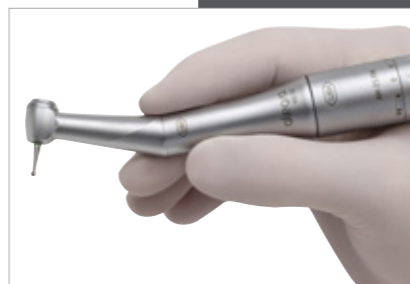

Perfekte Balance

Das Winkelstück liegt gut in der Hand und ist gemeinsam mit dem Luftmotor perfekt ausbalanciert.

Beste Sicht und hohe Lebensdauer

Das Design der Alegra Hand- und Winkelstücke ermöglicht eine optimale Sicht auf die Behandlungsstelle. Dies macht sich besonders bei schwer zugänglichen Bereichen bezahlt.



Beste Sicht

Der kleine Winkelstückkopf gewährleistet direkten Blick auf die Behandlungsstelle.



Robust und langlebig

Hochwertige Materialien machen Alegra Hand- und Winkelstücke besonders robust und langlebig.



Weitere Vorteile auf einen Blick


- > Komponententausch an Ort und Stelle
- > Thermodesinfizierbar
- > Sterilisierbar bis 135 °C

W&H AIMS

Sicherheit geht vor!

Hygiene ist in der zahnärztlichen Praxis von allergrößter Bedeutung. W&H AIMS soll Sie dabei unterstützen: mit einem breit gefächerten Produktportfolio, grundlegendem Wissen und allen relevanten Informationen auf einen Blick.

Zu Ihrer Sicherheit und zur Sicherheit Ihrer Patienten. aims.wh.com

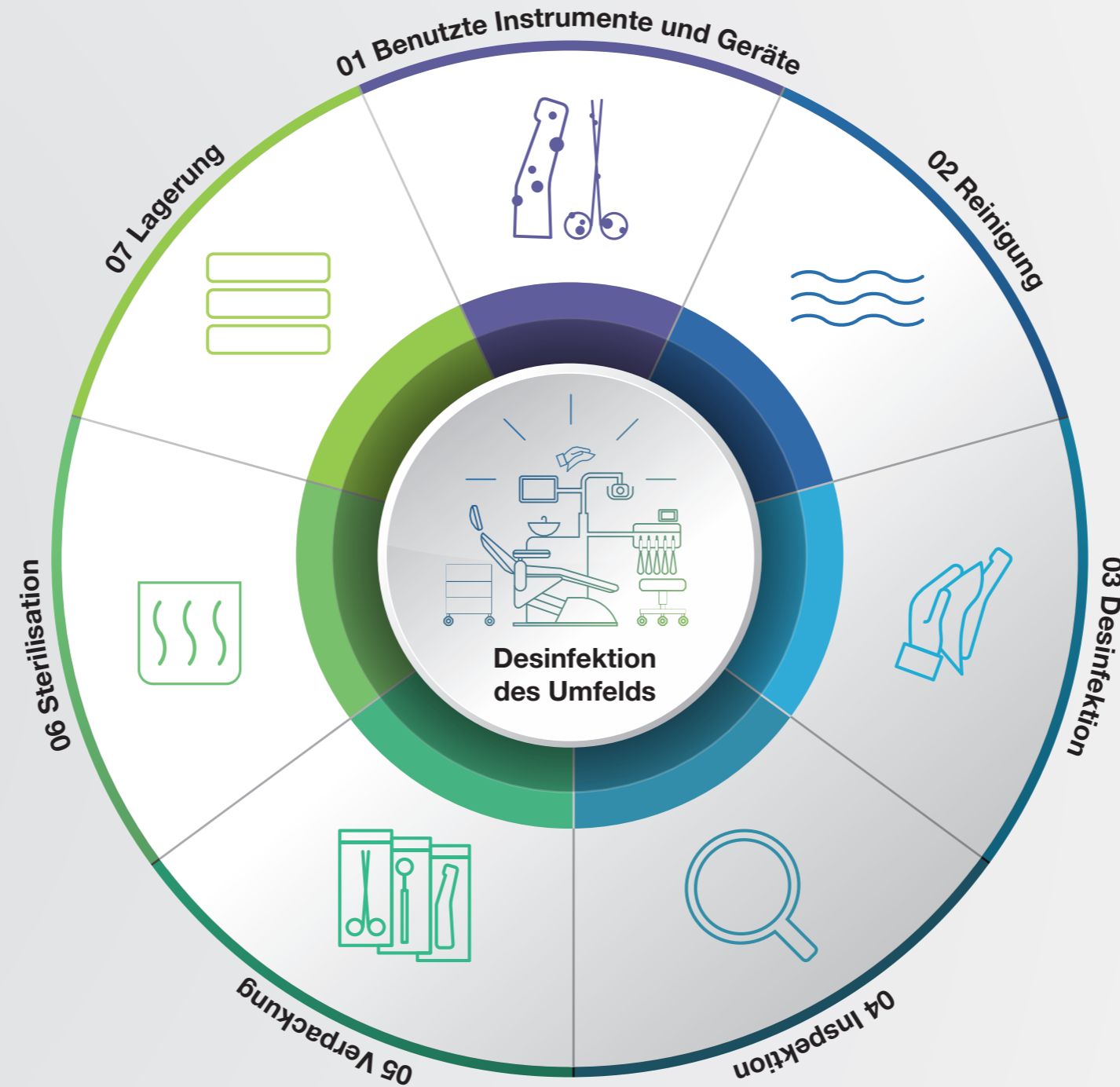

Technische Daten



Typ:	WE-56	WE-57	WE-66	HE-43
Übersetzungsverhältnis:	1:1		4:1	1:1
Kopfgröße:	Ø 10,1 mm			–
Kopfhöhe: mit 19 mm (FG-Bohrer) oder 22,5 mm (Winkelstückbohrer):	24,3 mm	22,5 mm	24,3 mm	–
Rotierende Instrumente:	Winkelstückbohrer	FG-Bohrer	Winkelstückbohrer	Hand- und Winkelstückbohrer
Instrumentenschaftdurchmesser:	2,35 mm	1,6 mm	2,35 mm	2,35 mm
Max. Länge:	34 mm	25 mm	34 mm	50 / 34 mm
Gewicht:	65 g			72 g
Spray (optional):	1-fach extern			
Kupplung Instrument:	ISO 3964 (Ø 20 mm) kompatibel			

Luftmotoren AM-25



Typ:	AM-25 L RM	AM-25 A RM / AM-25 E RM / AM-25 RM	AM-25 A BC / AM-25 E BC / AM-25 BC	AM-25 LT* / AM-25 A*	AM-25 RQ
Kupplung schlauchseitig:	Fixanschluss Standard 6-Loch	Fixanschluss Standard 4-Loch	Fixanschluss Borden 2(3)-Loch	Roto Quick	
Licht (LED Version):	Ja	–		Ja / –	–
Spray:	Intern	Intern / Extern / –		Intern / Intern	–
Gewicht:	77 g	78 g / 75 g / 73 g	78 g / 74 g / 73 g	82 g / 84 g	71 g
Leistung:	30 W				
Drehzahlbereich (min ⁻¹) bei einem Betriebsdruck von:	2,5 bar: 5.000–20.000** 3 bar: 5.000–25.000**				
Drehrichtung:	Rechts-/Linkslauf				
Garantie:	24 Monate				

* Nicht geeignet für Thermodesinfektor.

** Leistung und Drehzahl von Luftantrieben hängen von der Qualität des verwendeten Turbinenschlauchs ab und können vom angegebenen Wert abweichen.

Achtung: Nicht alle in dieser Broschüre genannten Produkte sind in allen Ländern erhältlich.

Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen W&H-Vertriebspartner.

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Ludwigstraße 27
83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**
t +49 8651 904 244-0
f +49 8651 904 244-4
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Abb. Symbolfotos. Zusatzausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

20418 ADT Rev. 009 / 21.03.2024
Änderungen vorbehalten