

#whdentalwerk
f @ in ▶
video.wh.com

Şimdi yetkili satıcınızdan
veya **wh.com** adresinden
temin edebilirsiniz



Havayı dizginledik

Devir kaybı olmadan
sabit performans

Ayarlanabilir devir
60.000 ila 320.000 rpm



primea
advanced air

Dünyada ilk: Primea Advanced Air

Zahmetsiz kontrol ve hassasiyet

Primea Advanced Air ile havayı kontrol altına alırsınız. Ayarlanabilir frez devri ve artan temas basıncında bile sabit kalan performansı ile dünyanın ilk hava tahrikli yüksek hızlı motor çözümüdür. Bu sayede tedavi sırasında daima optimum uygulama devri ve maksimum verimle çalışabilirsiniz: En konforlu şartlarda daha kontrollü bir çalışma için gücün ve kolaylığın eşsiz birleşimi.

Ayarlanabilir devir

60.000 – 320.000 d/dak arasında ayarlanabilir frez devri sayesinde çok çeşitli uygulama yelpazesi ve sabit hızla kontrollü hazırlık.

Diğer ürün avantajları

- › 5'li Ring LED+ sayesinde ideal görüş
- › 5 spreyli soğutma sayesinde mükemmel soğutma
- › Son derece ergonomik tasarım sayesinde yorulmadan çalışma
- › En iyi dokunsal geri bildirim ve çok sessiz çalışma
- › Çizilmeye karşı dayanıklı özel yüzey kaplaması sayesinde değerini korur
- › Kaymaz sap profili sayesinde daha iyi kontrol
- › Maksimum güvenlik için hijyenik baş sistemi
- › Küçük baş sayesinde maksimum erişim imkanı

Sabit performans

Advanced Air teknolojisi

sayesinde elektronik hava kontrolü ile otomatik güç regülasyonu.



2018 ulusal ödülü sahibi


Dijitalleşme ve İş Merkezi Alanında Federal Bakanlık Ulusal İnovasyon Ödülü



yüksek hız Kontrol altında

Primea Advanced Air'e her zaman güvenebilirsiniz. Bireysel hazırlık gereksinimlerinize adapte olur ve sizinle iş birliği içinde çalışır. Devri bizzat ayarlar ve maksimum kontrolden faydalanırsınız. Mükemmel bir kombinasyon; havayla çalışan sistemlere karşı rekabet avantajı sağlamanın yanı sıra, geleneksel türbinlere ve elektrikli motorlarla çalışan kırmızı kuşak angldruvalara karşı ilgi çekici bir alternatif.

Primea Advanced Air için optimum devir aralıkları

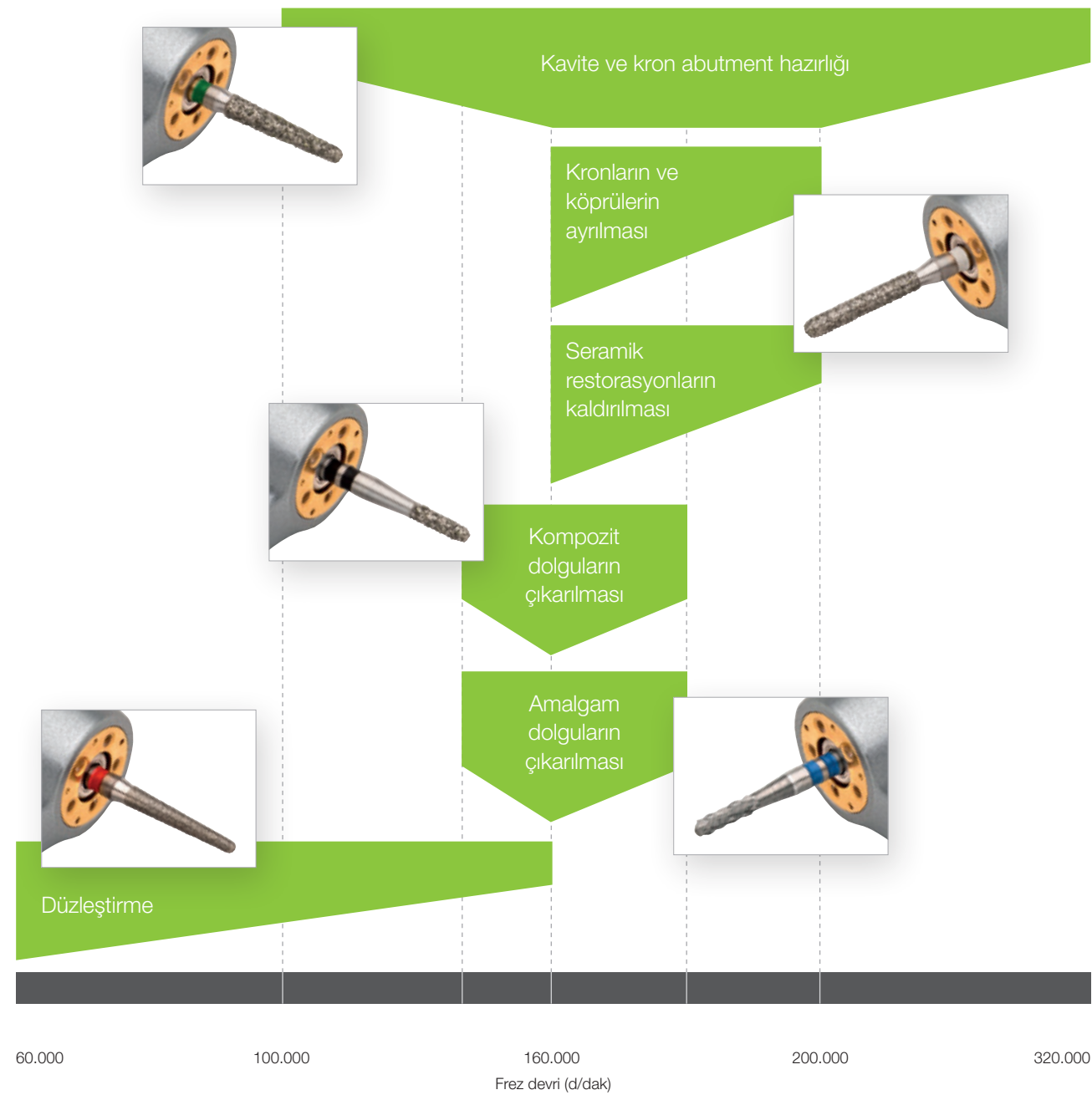


Önceden programlanmış tedavi başarıları

Advanced Air teknolojisi ile devir kaybı artık geçmişte kaldı. Türbin başındaki bir sensör, frezin dışındaki gerçek rotasyon hızını sürekli ölçer. Devirde düşme tehlikesi ortaya çıktığında, kumanda modülü hava girişini hemen ayarlar ve performansın sabit kalmasını sağlar.



Devir karşılaştırması*

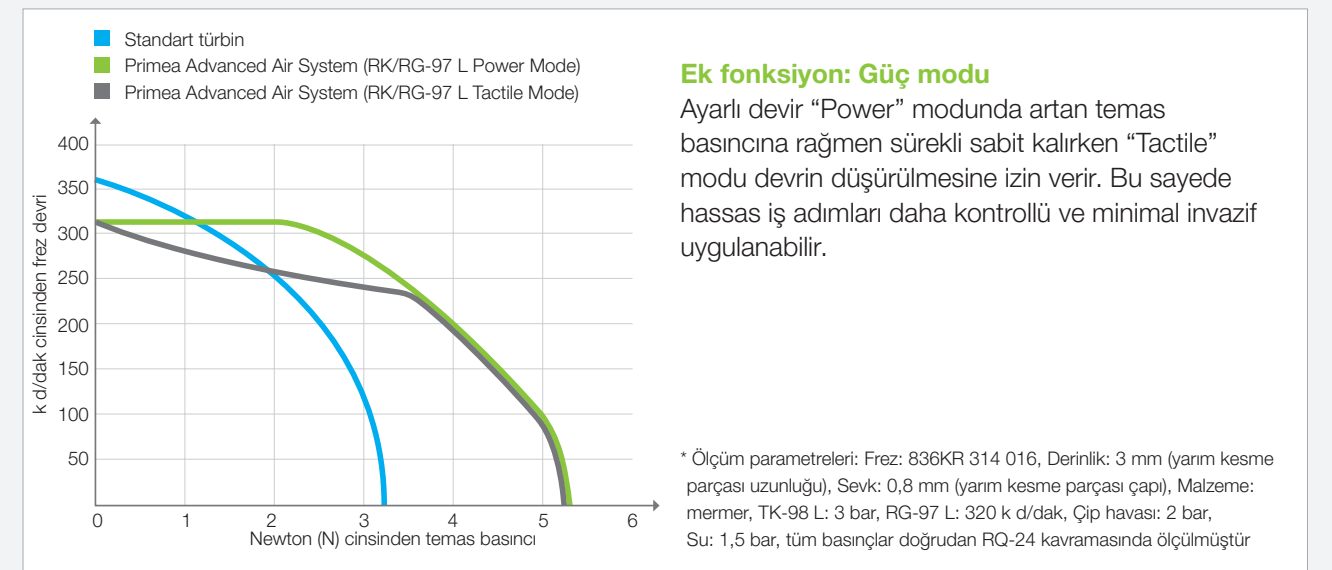

Optimum devir, katma değer yaratır

Kaviteleri zahmetsizce açın, kronları ve köprüleri kolayca ayırın, eski dolguları hızlı bir şekilde çıkarın ve hazırlık kenarlarını en yüksek hassasiyetle düzleştirin: Primea Advanced Air ile klinik avantajlarınız elinizde. Frez üreticilerinin aletleriniz için önerdiği frez devri ile çalışın ve yüksek hızda hazırlığın yeni kalitesini keşfedin.



Kaviteleri ve kron abutmentlerini zahmetsizce hazırlayın

320.000 d/dak değerinde yüksek frez devrinin sabit kalması sayesinde yüksek hızlı uygulamalar verimli ve hassas bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu sayede kaviteleri zahmetsizce açabilir, kron abutmentlerini güvenli bir şekilde taşıyabilir ve etkili bir tedavi sağlayabilirsiniz.



**Prof. RADM
Suchada Vuddhakanok**
Bangkok, Tayland

“Mükemmel. Bu, tam da istediğim şey!”


Dr. James Klim
Santa Rosa, CA, ABD

“Advanced Air teknolojisi sayesinde hastalarımın tedavi süresini önemli ölçüde kısaltabiliyorum.”



Kronları ve köprüleri daha hızlı ayırın

İster seramik ister metal olsun, son derece sağlam ve dolaylı restorasyonların sökülmesi, hem insan hem de alet için büyük bir zorluk teşkil eder. Primea Advanced Air ile özel aletler için önerilen devri ayarlayabilir ve optimum, sabit bir performansa güvenebilirsiniz.

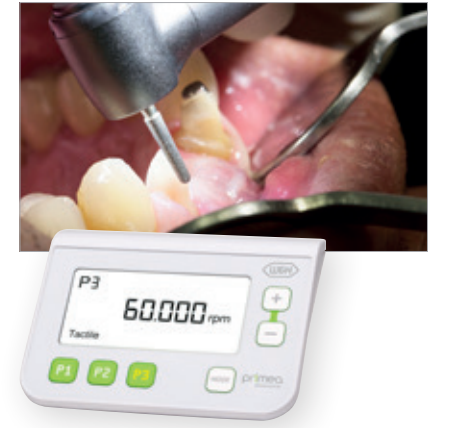

Kontrollü düzleştirme

Primea Advanced Air ile bu hassas iş adımı sadece 60.000 d/dak değerinde sabit düşük frez devrinde uygulayabilirsiniz. Bu sayede hazırlık yüzeyini daha hassas bir şekilde düzeltebilir ve klasik bir türbine oranla hazırlık kenarlarını daha kontrollü bir şekilde düzleştirebilirsiniz.



Dolguları etkili ve güvenli şekilde çıkarın

Amalgamdan kompozite ve zirkonyum dioksit kadar: Primea Advanced Air ile eski dolguları hızlı ve güvenli şekilde çıkarabilirsiniz. Dakikada 160.000 devirde minimum ısı gelişimi ve yüksek performans elde edilir.

Dr. Christian Müller
Salzburg, Avusturya

“Dokunsal geri bildirimi çok seviyorum. Dişteki en ufak düzensizlikleri bile hissediyorum ve böylece daha kaliteli bir çalışma gerçekleştirebiliyorum.”

Dr. Michael VanGorden
St.Helens, OR, ABD

“Yüksek hızda hazırlık için bir elektrikli motorun kontrolünü, hava tahrikli bir piyasemenin kesme performansı ile bir araya getiriyor.”

Mükemmel bir kombinasyon

Her iki Primea Advanced Air türbin, yenilikçi motor teknolojisinin yanı sıra kaliteli klasik W&H türbinlerinin tüm avantajlarını sunar. RK-97 L modeli 5'li Ring LED+ özelliği ile öne çıkarken, RG-97 L modeli LED+ özelliği ile kendini kanıtlıyor. Roto Quick kavrama sayesinde komple sistem son derece hafiftir.

Seçim sizin

Primea Advanced Air System, 5'li Ring LED+ (RK-97 L) veya LED+ (RG-97 L) ile sunulmaktadır.



Mükemmel soğutma

5 spreyli soğutma sayesinde frez ucu her uygulama pozisyonunda ideal şekilde soğutulur.



Gölgesiz aydınlatma

5'li Ring LED sayesinde tedavi alanında optimum görüş.



Değerini korur

Çizilmeye karşı dayanıklı özel yüzey kaplaması sayesinde her gün yeni gibi.

RQ-24

360° rotasyon ve RQ-24 Roto Quick kavrama ile düşük ağırlık.



En iyi ergonomi

Düşük ağırlık ve çok sessiz çalışma sayesinde yorulmadan çalışma ve mükemmel dokunsal geri bildirim.

Yerleşik

Seçkin ünite üreticileri Primea Advanced Air teknolojisini komple sistem kapsamında tam entegre motor çözümü olarak sunuyorlar. Dental ünitenizin kontrol merkezi üzerinden kolay ve rahat bir şekilde kumanda edilebilir. W&H firmasından veya ünite üreticinizden Primea Advanced Air sistemi hakkında bilgi alabilirsiniz.




W&H AIMS Önce güvenlik!

aims Advanced
Infection Prevention
Management Solutions


Diş hekimliğinde hijyen elzemdir. W&H AIMS, sizi geniş ürün yelpazesi, temel bilgiler ve tüm detaylar konusunda desteklemek için tasarlanmıştır:

Kendi güvenliğiniz ve hastalarınızın güvenliği için.
aims.wh.com

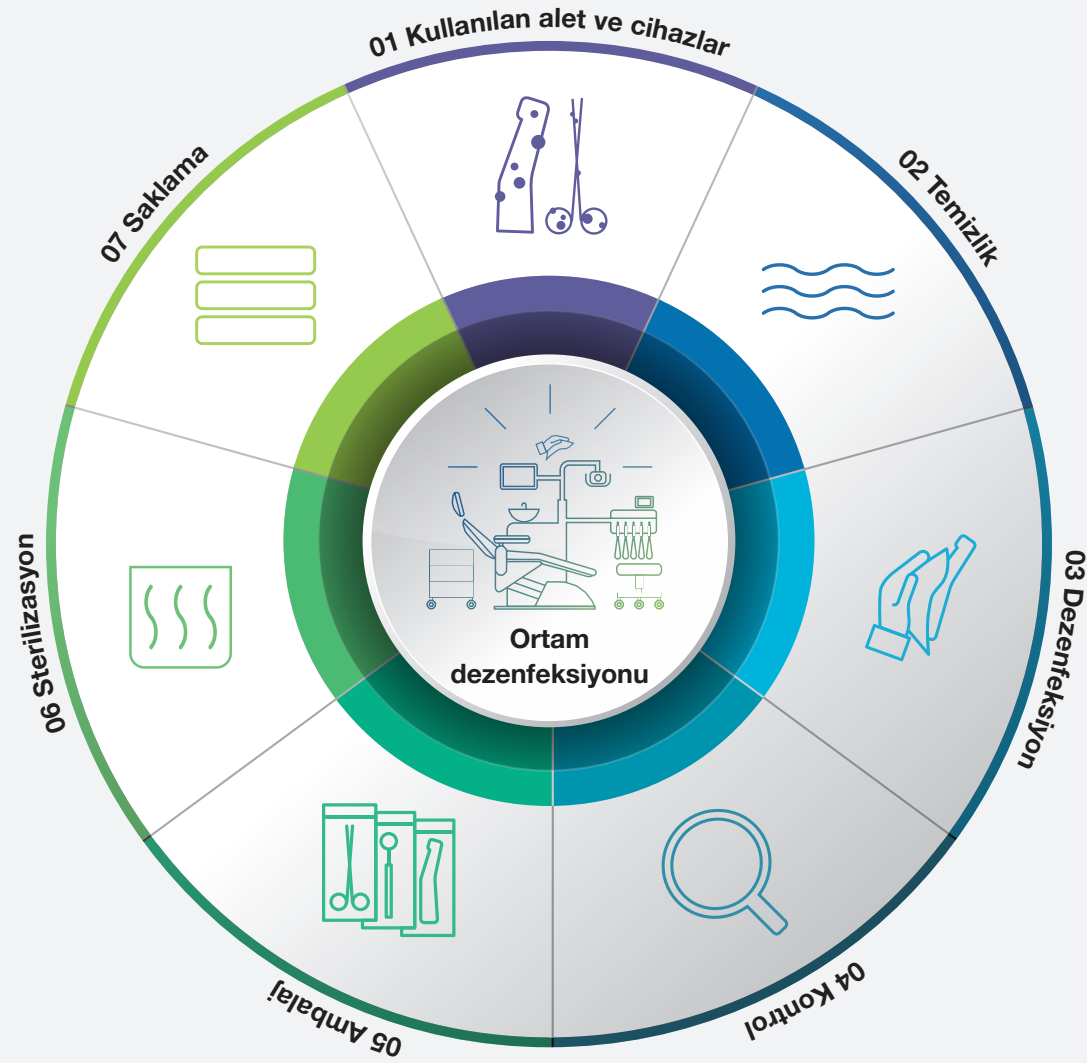

Real pros. Real insiders.

W&H
ProService

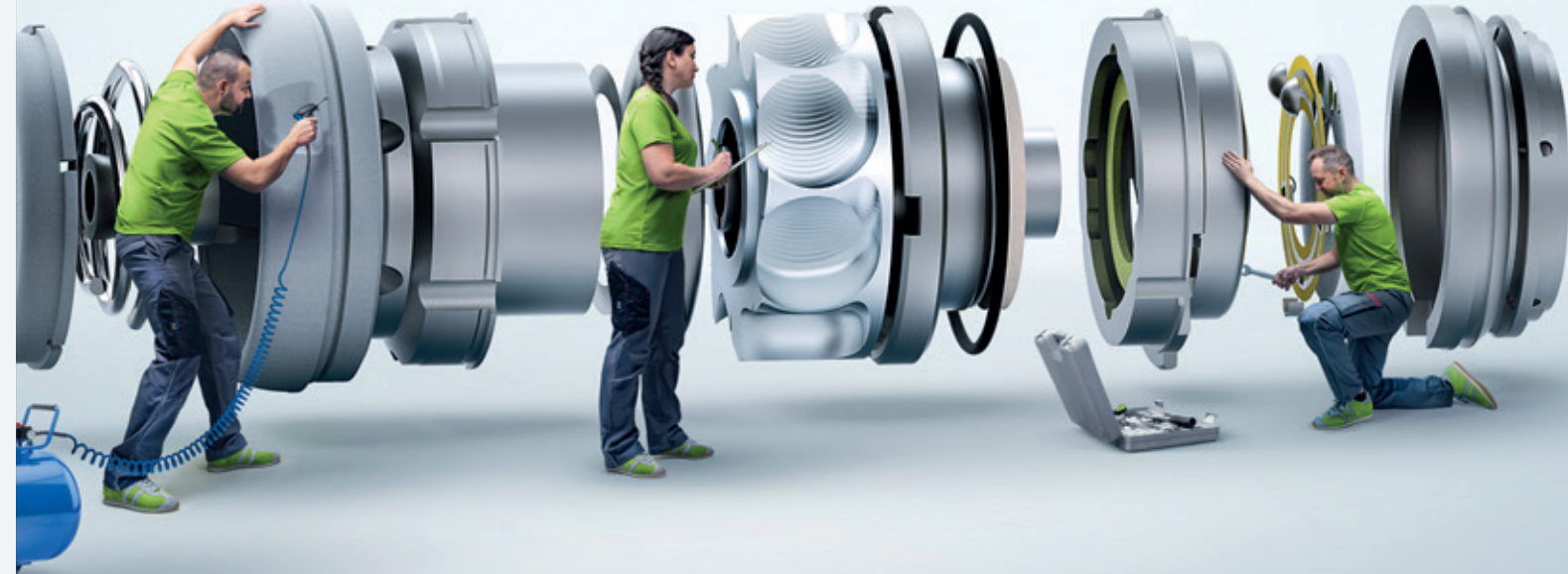

Profesyoneller için, profesyoneller tarafından.

Bir ürünü en iyi, onu geliştirenler bilir. Bir teknolojiyi en iyi, onu her gün kullananlar bilir. W&H ProService teknisyenlerini ayıran özellik tam da budur. W&H ürünleriniz konusunda en ayrıntılı bilgilere sahip olan, en yetkin kişiler onlardır. Servis konusunda yalnızca gerçek W&H orijinal kalitesine güvenip en iyi performansı ve maksimum güvenliği elde edin.

W&H ProService: Gerçek profesyoneller. Gerçek faydalar.

