

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf **wh.com**



Effizient. Flexibel. Sanft.

Piezo Scaler
Handstücke



Piezo Scaler mit Spitzenleistung

Der W&H Ultraschallscaler glänzt durch seine hohe Abtragsleistung und der sanften, patientenschonenden Anwendung. Er bietet höchsten Komfort und ist dank effektivem W&H Spitzensystem flexibel im Einsatz. Modernste Piezotechnologie verbessert Effizienz und taktiles Empfinden bei allen klinischen Indikationen.



W&H Spitzensystem

Das mit Endanwendern entwickelte Spitzensystem ist perfekt auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendungsgebiete und die einzelnen Behandlungsschritte abgestimmt.



Maximale Effizienz

Leistungsstark und sanft zugleich für eine schonende Anwendung und eine schmerzfreie Behandlung.

Leicht zu reinigen

Beide Piezo Scaler Handstücke lassen sich zum leichteren und besseren Reinigen einfach zerlegen, sind thermodesinfizierbar und sterilisierbar.




Handlich und komfortabel

Die Form des Handstücks und das geringe Gewicht sorgen für höchsten Komfort.



5-fach Ring LED

Taghelle Ausleuchtung der Behandlungsstelle durch 5 LEDs mit dem PB-5 L oder PB-5 L S Handstück.

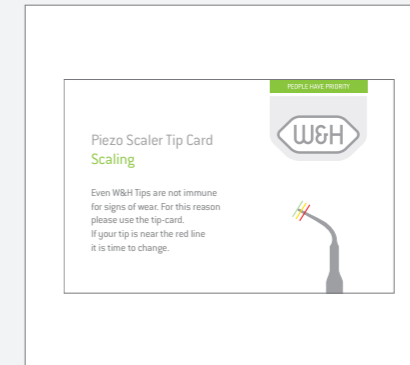

Nützliches Zubehör

Spitzen einfach und sicher mit dem Spitzenwechsler wechseln und mit der Spitzenkarte überprüfen.



Behandlungsstelle stets gekühlt

Der integrierte Spray sorgt für eine konstante und effektive Kühlung der Behandlungsstelle.

Kompaktes hochqualitatives Spitzensystem für Piezoscaler

Universal- und Spezialspitzen mit Endanwendern entwickelt und sowohl auf die klinischen Anforderungen der jeweiligen Anwendungsgebiete und der einzelnen Behandlungsschritte als auch auf die technischen Anforderungen der W&H Piezotechnologie abgestimmt.



Universalspitzen

- 1U, 2U, 3U, 4U
- 1US, 2US

Für die supragingivale Zahnsteinentfernung in allen Quadranten.



Implant Clean Spitze

- 1I

Zur schonenden Reinigung von Implantaten und dazugehörigen Restaurationen.




Parodontalspitzen

- 1P, 3Pr/3PI, 4P, 5Pr/5PI

Für die initiale und unterstützende Parodontitistherapie (UPT).

Vielfältige Anwendung

Dank stufenloser Leistungsregulierung lassen sich die W&H Piezoscaler mühelos auf die jeweilige Anwendung und Spitze einstellen. Von Prophylaxe und Parodontologie über die Implantaterhaltung oder Endodontie bis zur Mikropräparation von Restaurationen, die Anwendungsmöglichkeiten sind besonders vielfältig.

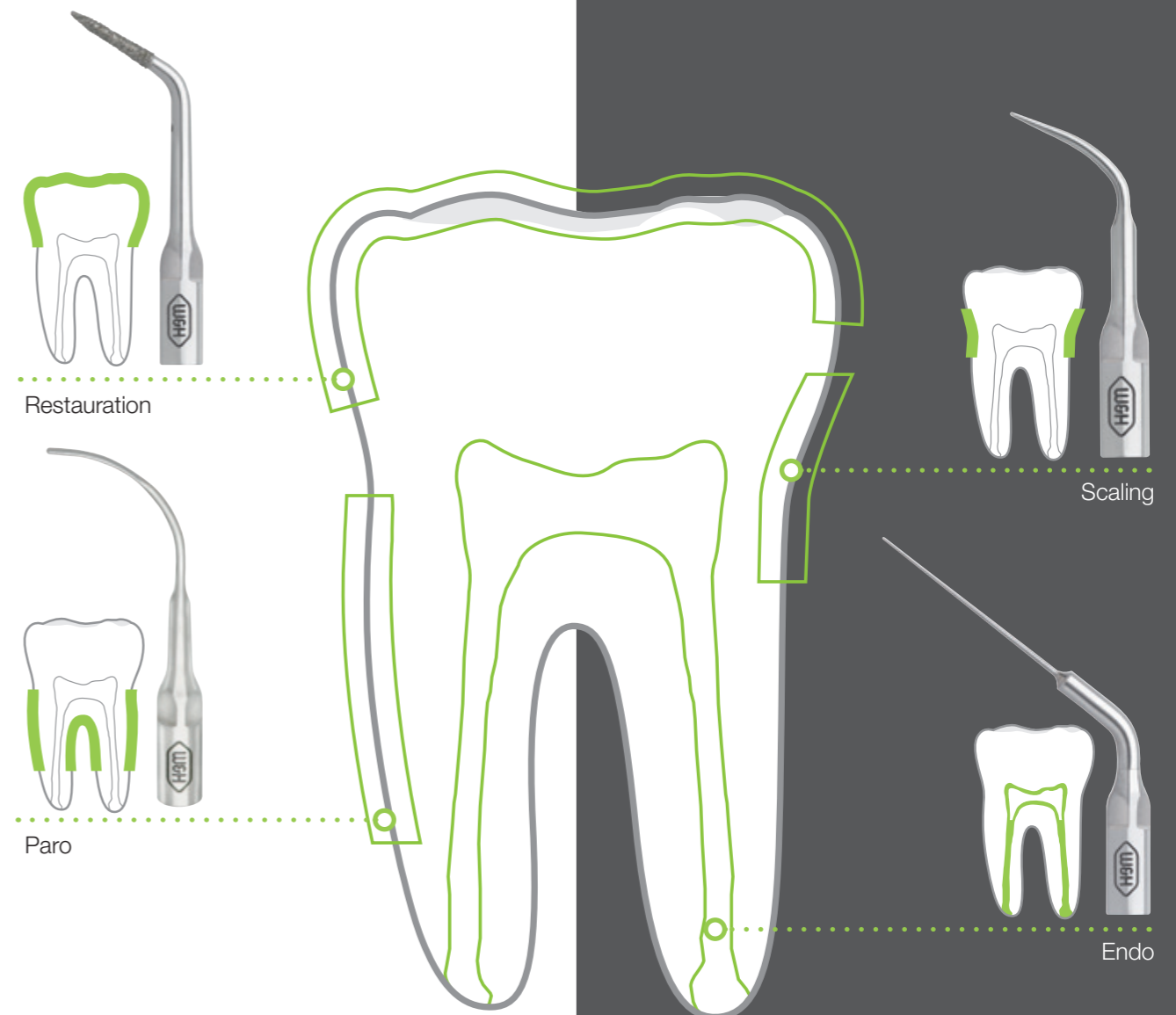

©Krapf-Romana

W&H Piezo Scaler

Die W&H Piezo Scaler lassen sich optimal in Ihren individuellen Workflow integrieren. Entscheiden Sie sich für einen Proxeo Ultra Piezo Scaler oder nutzen Sie die Vorteile einer Built-in Solution – der komfortablen Integration in Ihre Dentaleinheit.



PB-530

Der W&H Piezo Scaler mit kabelloser Fußsteuerung für mehr Bewegungsfreiheit und höchsten Anwenderkomfort.



PB-520 / PB-510

Die kompakten Modelle der Proxeo Ultra Piezo Scaler überzeugen mit oder ohne Tank.



LED Handstück

Das LED-Ring ermöglicht eine taghelle Ausleuchtung der Behandlungsstelle.



Built-in Set analog

Machen Sie Ihre Behandlungseinheit zukunftsfit. Mit den W&H Built-in Solutions, wie etwa dem PB-5 L Built-in Set analog. Die Piezo Scaler Einbaulösung der neuen Generation – kompatibel und kombinierbar.



Spitzenmäßige Auswahl

Das Proxeo Ultra ist mit zwei unterschiedlichen Gewindearten verfügbar.

Technische Daten

Piezo Scaler Handstück	PB-3 / PB-3 S	PB-5 L / PB-5 L S
Licht:	ohne Licht	LED-Ring
Gewicht:	52,5 g	55 g
Länge ohne Spitze:	104,3 mm	135 mm (mit Kupplung)
Durchmesser:	20,2 mm	18,5 mm

Built-in Set analog	PB-3 / PB-3 S	PB-5 L / PB-5 L S
Piezo Controller:		PC-1.0
Anschlussset elektrisch:		✓
Drehregler:		✓
Versorgungsschlauch:	VP-3 (1,8 m)	VP-5 (1,8 m)
Handstück:	PB-3	PB-5 L
Spitzenwechsler mit eingesetzter Spitze:	TW-1: 1U, 1P	TW-1: 1U, 2U, 1P

Tania Eberle

Dentalhygienikerin, Deutschland

„Was manuell oft nicht zu erreichen ist, schafft der W&H Piezo Scaler mit Leichtigkeit. Ein sehr überzeugendes Produkt!“



Stand-alone-Lösungen

Alle Informationen zu den W&H Piezo Scaler Stand-alone-Lösungen, wie Proxeo Ultra finden Sie auf wh.com

Kompatibilität von Spitzen mit W&H Handstücken

	W&H/EMS/Mectron		W&H/NSK/Satelec*	
	PB-5 L	PB-3	PB-5 L S	PB-3 S
Proxeo Ultra	X		X	
Built-in	X	X	X	X

* W&H Spitzen kompatibel mit Satelec-Gewinde (z. B. 1US, 2US) sind mit den W&H Handstücken PB-5 L S, PB-3 LED S und dem PB-3 S kompatibel.

Hinweis: EMS®, Mectron®, NSK® und Satelec® sind Marken von Drittparteien, die mit W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH nicht in Verbindung stehen. Bei Verwendung von Spitzen von Drittanbietern hat der Anwender für die korrekte Einstellung der Leistungsparameter des W&H Piezogeräts zu sorgen.

Abb. Symbolfotos: Zusatzausstattung und Inhalt der
gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

20456 ADT Rev. 004 / 24.02.2025
Änderungen vorbehalten

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Ludwigstraße 27
83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**
t +49 8651 904 244-0
f +49 8651 904 244-4
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com