

#whdentalwerk  
f @ in ▶  
video.wh.com

Şimdi yetkili satıcınızdan  
veya **wh.com** adresinden  
temin edebilirsiniz



**Kolay,  
verimli,  
hızlı.**

quick  
connect  
by W&H



assistina <sup>TWIN</sup>

## Rekor sürede yağ bakımı

Aletlerinize daha önce hiç Assistina Twin ile olduğu kadar hızlı bakım yapılmadı. Yenilikçi yağ atomizasyonu teknolojisi sayesinde W&H, bakım işlemini sadece 10 saniyelik rekor bir süreye indirmeyi başardı. Son derece hızlı ve benzersiz şekilde ayrıntılı bir bakım sonucu için.

### Yenilikçi bir sistem

Yağ, yüksek basınçla alet içerisinden üflenmeden önce atomize edilir. Böylece kirler aletin iç kısmından daha da etkili bir şekilde uzaklaştırılır. İnce sprej, aktarma parçalarını hareket ettirmeye gerek kalmadan dişli kutusunun en uzak noktalarına kadar yağlama sağlar. Tüm aerosoller aktif vakum ve entegre HEPA filtresi ile işlem haznelerinden uzaklaştırılır.



### Çığır açan teknoloji

Yenilikçi yağ atomizasyonu sayesinde aktarma parçalarının ayrıntılı ve kapsamlı yağ bakımı (turuncu) ve sprej kanallarının temizliği (yeşil).

## Her muayenehane için pratik

Assistina Twin, muayenehanenizin özgün gereksinimlerine uyum sağlar. Hem kısa süreli, yenilikçi işlem prosedürü hem de ergonomik tasarımı ve çok sayıda adaptör seçeneği sunması sayesinde saatte 360 adede kadar aletin bakımını yapabilir.

**Dr. Christian Müller**  
Diş Hekimi - Özel  
Muayenehane

"Artık aletlerimin, benim veya hastalarım için herhangi bir bekleme süresi olmadan tedaviler arasında hazırlanabileceğinden emin olabiliyorum. Muayenehanem için gerçek bir kazanç."



## İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış

W&H Assistina Twin, bakım cihazları arasında eşsizdir: Yenilikçi iki hazneli sistemi, rekor sürede yağ bakımı, Quick Connect sistemi ve püskürtme işleviyle sizi kullanım ömrü boyunca çok memnun edecek.

### Püskürtme işlevi

Püskürtme işlevine sahip Assistina Twin, manuel ve otomatik temizleme işlemlerinden sonra piyasemenlerin dahili bileşenlerinin kurutulması için optimum bir çözüm sunuyor.

### Kolay kurutma

Püskürtme işlevi, basınçlı hava kullanarak piyasemenlerden gelen sıvıları etkili bir şekilde en aza indirir.

### İkisi bir arada

Püskürtme işlevi etkinleştirildiğinde, yağ bakım döngüsü fazla suyu uzaklaştırmak için 5 saniyelik bir başlangıç aşamasıyla başlatılır.

### Quick Connect by W&H

Assistina Twin, yenilikçi bir adaptör çözümü sunuyor: Quick Connect by W&H. Bu adaptör sistemi, günlük uygulamalarınızda size daha fazla avantaj sunar.

### Kolay kullanım

Kilit açma düğmesiyle transmisyon aletleri daha kolay ve daha hızlı takılır ve çıkarılır.

### Daha hızlı adaptör değişimi


Optimal hazırlık sayesinde: Farklı adaptörler bakım işlemi öncesinde ve sırasında cihazın dışında hazırlanabilir.

### Daha fazla esneklik

Gerçekten ihtiyacınız olan adaptörleri bir araya getirin.

### İyileştirilmiş çalışma süreçleri

Quick ISO veya Quick RM adaptörlerinin hızlı bağlantısı sayesinde kolay kullanım.

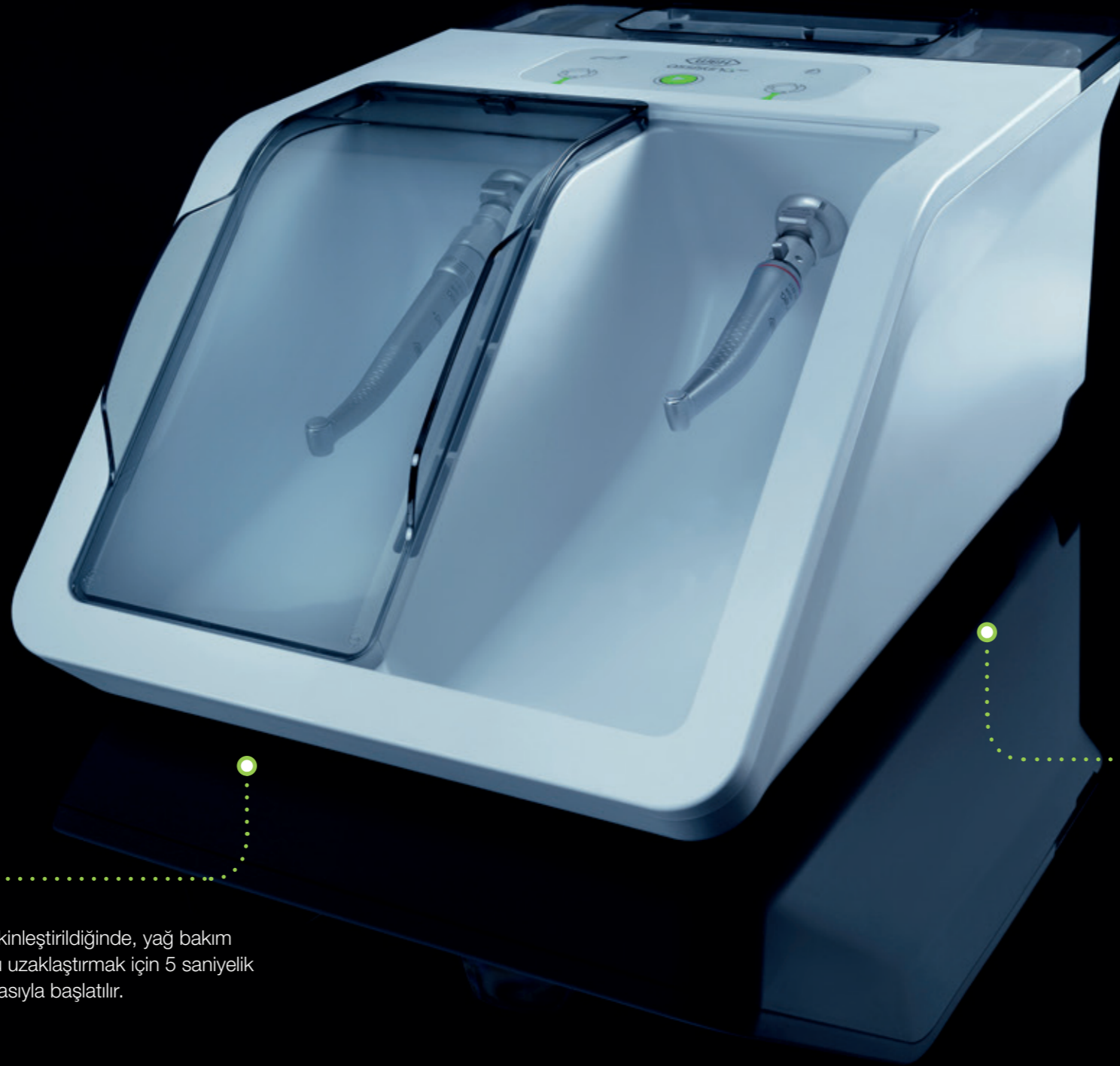

## Quick. Click. Check.

Entegre Quick Connect by W&H sayesinde Assistina Twin, çalışma süreçlerinize daha iyi uyum sağlar ve onları daha da verimli hale getirir. Neden mi? Çünkü bakım cihazını, transmisyon aletleriniz için tam olarak ihtiyaç duyduğunuz adaptörlerle donatabilirsiniz.



Türbinler için **Quick RM**.




Piyasemen ve angldruvalar için **Quick ISO**.



**Kolay ve hızlı adaptör değişimleri, çalışma süreçlerinizi optimize eder ve muayenehanede verimliliği artırır.**

Hangi adaptörlere ihtiyacınız olduğuna siz karar verirsiniz. Assistina Twin cihazınızı ihtiyaçlarınıza göre donatın ve iki hazneyi sadece sizin için uygun olan adaptörlerle birleştirin.

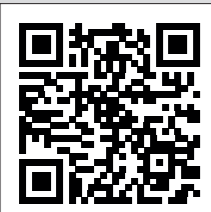

Per ulteriori adattatori e una panoramica del sistema, scannerizzare il **codice QR**:

## Bekleme süresi olmadan yağ bakımı

Daha fazla sürdürülebilirliğe yeşil ışık: Assistina Twin ile yağ bakımı sırasında bekleme süreleri geçmişte kaldı. Dönüşümlü kullanılabilen iki adet işlem haznesi ile donatılmış ve böylece kesintisiz kullanım sağlayabilen ilk bakım cihazıdır. Rahat bakım işlemi, her zamankinden daha verimli!

**Sandra Schnäp**  
Diş hekimi asistanı

"Gerçekten çok hızlı! İki hazneli sistem sayesinde aletlerin bakımı çok az zamanımı alıyor. Son derece sessiz ve aynı zamanda harika görünüyor."



## Sorunsuz çalışır



**1**  
Aleti, Hazne 1'e takın.

**2**  
Hazne 1'i kapatın  
ve işlemi başlatın.

**3**  
İkinci aleti takın ve Hazne 1'in  
işlemi tamamlandığında kapağı  
Hazne 2'ye doğru kaydırarak  
kapatın.

**4**  
Aleti, Hazne 1'den çıkarın,  
ardından 1. ve 2. adımları  
tekrarlayın.



## Minimum tüketimle maksimum yağ bakımı


Akıllı işlem izleme sayesinde, Assistina Twin daima minimum tüketim ile kapsamlı bakım yapar. Assistina Twin Care Seti'nin yaklaşık 2.800 aletten sonra değiştirilmesi gerekir. Böylece aletlerinizin bakımı güvenli ve hızlı bir şekilde yapılırken, maliyetleriniz de her zamankinden daha düşük olur.



\*Sprey kutusu başına 400 ml

### Assistina Twin Care Seti

Tek başına 20 sprey kutusunun sağladığı verimi sağlar\*

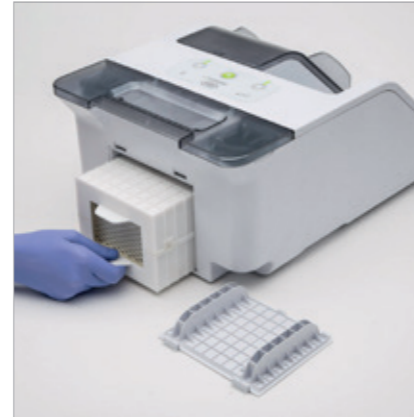

### Twin Care Seti


Her set bir kartuş temizleme sıvısı, bir kartuş Service Oil F1 ve bir HEPA filtresinden oluşur. Tüm sarf malzemelerinin değişimi son derece kolay ve aletsiz şekilde yapılabilir.

## W&H AIMS Önce güvenlik!

**aims** Advanced  
Infection Prevention  
Management Solutions

Diş hekimliğinde hijyen elzemdir. W&H AIMS, sizi geniş ürün yelpazesi, temel bilgiler ve tüm detaylar konusunda desteklemek için tasarlanmıştır.

Kendi güvenliğiniz ve hastalarınızın güvenliği için. [aims.wh.com](http://aims.wh.com)

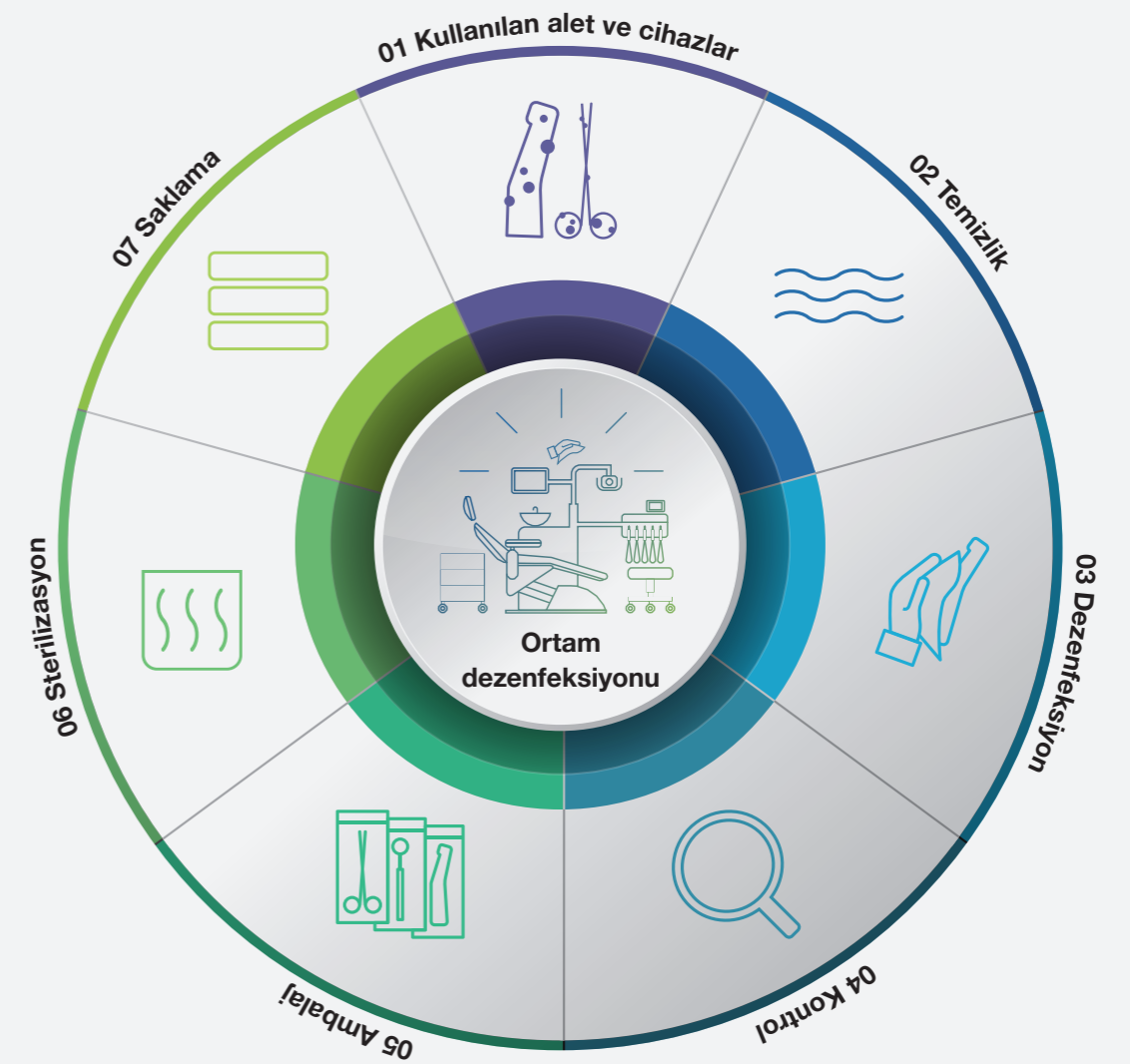

Dekontaminasyon



Temizlik



Dezenfeksiyon



Kontrol ve bakım



Ambalaj



Sterilizasyon



İzlenebilirlik ve saklama

# Teknik bilgiler

CE

<b>Ticari isim:</b> <b>Tip:</b>	<b>Assistina Twin</b> <b>MB-302</b>
<b>İşlem:</b>	Sprey kanallarının temizliği, yağ bakımı
<b>Şunlar için uygundur:</b>	Piyasemenler ve angidruvalar, türbinler, havalı scaler'lar, hava motorları
<b>Voltaj:</b>	100-240 V AC
<b>Maksimum elektrik tüketimi:</b>	18 VA
<b>Hava tüketimi:</b>	yakl. 40 Nl/dak
<b>Çalışma basıncı:</b>	5-10 bar (entegre otomatik basınç regülatörü üzerinden kontrol)
<b>Ölçüler (G x D x Y):</b>	297 x 435 x 190 mm
<b>Ağırlık:</b>	3,5 kg
<b>Dolum miktarı:</b>	200 ml W&H Activefluid temizleme sıvısı 200 ml W&H Service Oil F1

## Üretici:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
51111 Bürmoos, **Austria**  
t +43 6274 6236-0  
f +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

## Distribütör:

**W&H Dental Ticaret Limited Şirketi**  
Kısıklı Mh. Alemdağ Cd. No:60 Masaldan İş Merkezi C Blok D:6  
34692 Çamlıca, Üsküdar / İstanbul, **Türkiye**  
t +90 216 5058840  
f +90 216 5058843  
office.tr@wh.com  
wh.com

Resimler semboliktir. Ek ekipmanlar ve gösterilen aksesuar parçaları teslimat kapsamına dâhil değildir.

20458 ATR Rev. 003 / 15.07.2025  
Değişiklik hakkı saklıdır