

#niwop
f @ in ▶
video.wh.com

Ora disponibile presso
il vostro rivenditore
o su **wh.com**



La nuova generazione di sistemi di lucidatura con testina rotante



proxeo TWIST **LatchShort**
Sistema di lucidatura

Piccolo ma potente

Il sistema di lucidatura Proxeo Twist LatchShort è una soluzione particolarmente intelligente per la lucidatura professionale dei denti: la testa piccola con le coppette per profilassi perfettamente adattati riduce notevolmente l'altezza di lavoro. Rispetto ai sistemi a scatto standard si guadagnano ben quattro millimetri.



Accesso a tutte le aree

La regione molare è più facilmente accessibile in direzione distale – mesiale.

Comfort e praticità

Più agevole è l'accesso, più confortevole sarà il trattamento.

Studiato appositamente per gli spazi più angusti

Gli ultimi molari sono più facilmente raggiungibili.

»Cosi tanto spazio«

Migliore visuale

Testa più piccola, coppetta più corta e collo più sottile per una visuale migliore sull'area da trattare.

Perfetta armonia

La combinazione tra il sottile contrangolo Proxeo Twist LatchShort di W&H dotato di una testa piccola e le coppette per profilassi dotate di un gambo più corto consente di accedere ovunque, in particolare ai punti più stretti e ai molari posteriori.



Più spazio misurabile

Il vantaggio del sistema Proxeo Twist LatchShort rispetto al contrangolo verde: più spazio per lucidare grazie al gambo più corto.



Sostituzione premendo un tasto

Con il pratico sistema di fissaggio a tasto potete sostituire il calice per profilassi in pochi attimi.



Perfetta tenuta ermetica

Saliva e pasta lucidante ora non riescono più a penetrare facilmente nella testa. Si preserva così la durata del contrangolo.



Ispirato dai professionisti della profilassi

Oltre al contrangolo Proxeo Twist, W&H propone per la prima volta anche coppette e spazzolini per profilassi. Questi prodotti sono il risultato della collaborazione con gli operatori della profilassi. Particolare attenzione è stata data a caratteristiche quali adattamento ottimale, facilità nella raccolta e nell'applicazione della pasta e pulizia delicata fino al solco.

Nessuna difficoltà, un solo fornitore

Per rimuovere efficacemente la biopellicola e gli scolorimenti, avete a disposizione le nuove coppette per profilassi Proxeo Twist LatchShort in diverse durezze e gli spazzolini. Tutte le coppette per profilassi Proxeo Twist LatchShort hanno un gambo più corto per ridurre ancora di più l'altezza di lavoro.



**Superficie liscia
sull'estremità
delle coppette**
per una lucidatura
delicata
fino al solco.




**Speciale
forma con
gommini**
per ridurre gli
schizzi di pasta.



**Speciali
lamelle interne**
per raccogliere
facilmente
la pasta e
applicarla in
modo mirato.



**Gommini sulla
superficie esterna**
per lucidare
contemporaneamente
anche l'area interdentale.

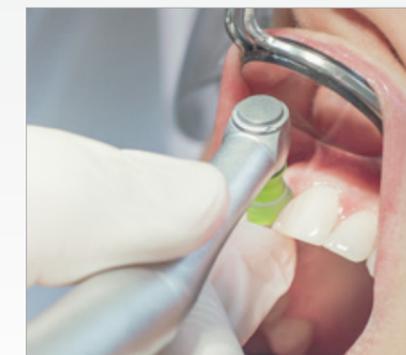

Vantaggi irresistibili

Più piccolo. Più sottile. Più innovativo.

Il nuovo Proxeo Twist LatchShort, grazie alla sua dimensione inferiore di ben 4 mm rispetto agli altri sistemi standard, garantisce un migliore accesso e più spazio operativo con una visuale perfetta.



Massima protezione e massimo comfort



Sottile e flessuoso

Grazie al design ergonomico e al collo sottile il contrangolo è molto maneggevole. L'abbinamento con il motore elettrico EM-12 L W&H accentua ancora di più questa ergonomia.



Igiene

Grazie alla superficie esterna liscia, il contrangolo Proxeo Twist LatchShort, sterilizzabile e termodisinfettabile, è molto facile da pulire. Le coppette e gli spazzolini per profilassi sono prodotti monouso che non possono essere riutilizzati.

Dati tecnici

Tipo	WP-66 W   
Velocità massima del motore:	10.000 min ⁻¹
Rapporto di riduzione:	4:1
Velocità consigliata per coppette e spazzolini per profilassi	1.250 – 2.500 min ⁻¹
Strumenti utilizzabili:	W&H Proxeo Twist LatchShort coppette e spazzolini per profilassi

**Coppette e spazzolini
per profilassi**



Non riutilizzabile



Privo di lattice



Melanie Ruckenthaler

Product Manager in W&H Bürmoos


»Il meglio di due mondi: l'abbinamento unico nel suo genere tra altezza di lavoro ridotta e comodo sistema di fissaggio a tasto fonde in sé i vantaggi dei sistemi a vite e a scatto: maggiore facilità di accesso, visuale migliore e massimo comfort da un lato, sostituzione rapida delle coppette e degli spazzolini dall'altro.«



Monika Riedl

igienista dentale di Monaco

»Proxeo Twist LatchShort è il primo sistema con un'altezza di lavoro più contenuta e un pulsante di bloccaggio. Con un'altezza di lavoro più bassa di 4 mm rispetto ai sistemi a scatto standard, si guadagna più spazio e si ottiene una visuale migliore sull'area da trattare.«

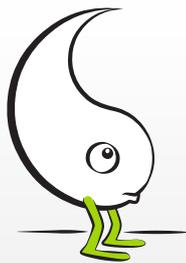

Implantology
without **Periodontology** is
like **Yin** without **Yang**.



#NIWOP: il workflow sistematico e basato sulle evidenze

Produttore:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribuzione:

W&H Italia S.r.l.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italia**
t +39 035 66 63 911
f +39 035 06 62 504
office.it@wh.com
wh.com

W&H CH-AG

Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com