

#niwop



video.wh.com

Ahora en su
distribuidor o
en wh.com



La nueva generación de pulido rotativo



proxeo TWIST LatchShort
Sistema de Pulido

Pequeño, pero potente

El Sistema de Pulido Proxeo Twist LatchShort es una solución particularmente inteligente para el pulido profesional de las piezas dentales. Su pequeño cabezal con copas profilácticas óptimamente adaptadas garantiza una altura de trabajo considerablemente reducida. En comparación con los sistemas Latch estándares, se gana cuatro milímetros.



Llega a todas partes

El área molar es más accesible de distal a mesial.

Agradable y sencillo

Cuanto más fácil sea el acceso, más agradable será el tratamiento.

Especialmente adecuado para espacios estrechos

Los molares en la región del túbulo son más fáciles de alcanzar.

»Muuucho más espacio«

Ver más

Cuanto más pequeño es el cabezal, más corta es la copa y más delgado es el cuello, mejor es la visión del lugar del tratamiento.

Armonía perfecta

Más reducido. Más manejable. Más innovador: La combinación del contra-ángulo Proxeo Twist LatchShort de W&H con cabezal reducido y las copas profilácticas con vástago reducido facilita el acceso, especialmente en zonas estrechas y en los molares posteriores.




Contra-ángulo verde comparado con el sistema LatchShort



Mucho más espacio

La ventaja del Proxeo Twist LatchShort en comparación con el contra-ángulo verde es que proporciona más espacio para pulir gracias al vástago reducido.

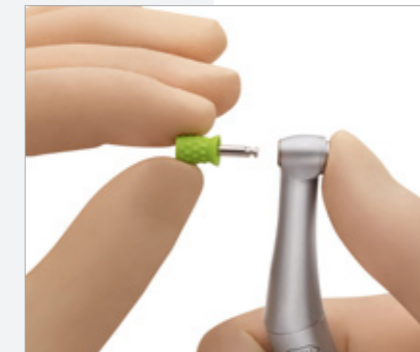

Cambio con tan solo pulsar un botón

Con el práctico sistema de sujeción por botón de presión, puede cambiar las copas profilácticas en cuestión de segundos.



Estanqueidad perfecta

La saliva y la pasta de pulir ya no pueden penetrar tan fácilmente en el cabezal. La vida útil del contraángulo es de larga duración.




Inspirado por profesionales de la profilaxis

Además del contra-ángulo Proxeo Twist, W&H ofrece por primera vez copas y cepillos para profilaxis que han sido desarrollados junto con usuarios finales. Se prestó gran atención a aspectos como la mejor adaptación, la fácil absorción y distribución de la pasta y la limpieza cuidadosa del surco.

Todo de un mismo proveedor

Para la eliminación óptima de la biopelícula y la decoloración, las nuevas copas profilácticas Proxeo Twist LatchShort están disponibles en diferentes durezas y cepillos. Todas las copas profilácticas tienen un vástago reducido para una altura de trabajo aún menor.

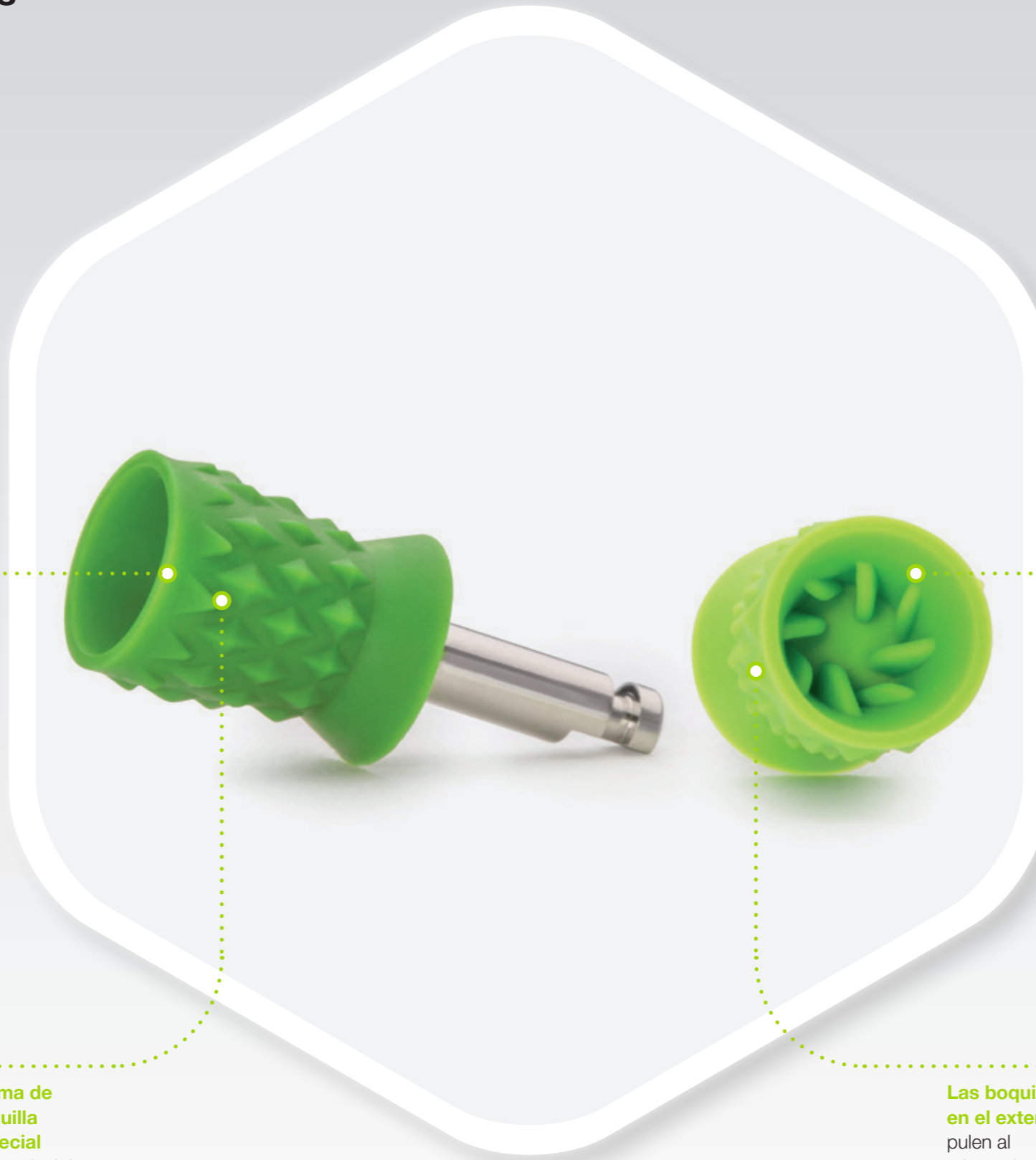


Superficie lisa en el extremo de la copa para un pulido suave hasta el surco.



Forma de boquilla especial para reducir las salpicaduras de la pasta.



Láminas internas especiales para una fácil absorción y aplicación precisa de la pasta.

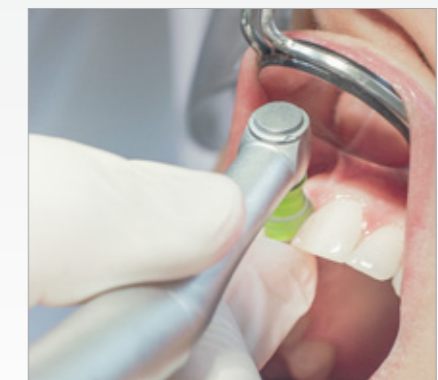

Las boquillas en el exterior pulen al mismo tiempo el espacio interdental.

Grandes ventajas para el pulido rotativo

Más fino. Más reducido. Más innovador.

El nuevo Sistema de Pulido Proxeo Twist LatchShort con una altura de trabajo hasta 4 mm más baja, gracias a las copas y cepillos Proxeo Twist proporciona un mejor acceso, más espacio y una visión óptima del lugar de tratamiento.



Máxima protección y comodidad



Estilizado y flexible




Gracias a su diseño ergonómico y a su cuello delgado, el contra-ángulo se adapta perfectamente a la mano. La combinación con el micromotor eléctrico EM-12 L de W&H favorece esta ergonomía.



Higiene

Gracias a su diseño exterior liso, el contra-ángulo Proxeo Twist LatchShort esterilizable y termodesinfectable resulta especialmente fácil de limpiar. Las copas y cepillos profilácticos son productos desechables y no están pensados para ser reutilizados.

Datos técnicos

Modelo	WP-66 W   
Número de revoluciones máximas del micromotor:	10.000 min ⁻¹
Coefficiente de reducción:	4:1
Velocidad recomendada para las copas y los cepillos de profilaxis:	1.250 – 2.500 min ⁻¹
Insertos utilizables:	W&H Proxeo Twist LatchShort Copas profilácticas y cepillos profilácticos

Copas y cepillos profilácticos



No apto para reciclar

LATEX

Sin látex



Melanie Ruckenthaler

Jefa de producto de W&H

»Lo mejor de dos mundos: La combinación única de una altura de trabajo baja y un cómodo sistema de sujeción por botón de presión combina las ventajas de los sistemas de tornillos y cierre: por un lado, un acceso más fácil, una mejor visibilidad y un máximo confort, y por otro lado un cambio sencillo de las copas de pulido y cepillos.«



Monika Riedl

higienista dental, Múnich

»El Proxeo Twist LatchShort es el primer sistema con una altura de trabajo baja y un botón de presión. La altura de trabajo de hasta 4 mm más baja en comparación con el sistema de Latch estándar ofrece más espacio y una mejor visibilidad del lugar de tratamiento.«



Implantology
without **Periodontology** is
like **Yin** without **Yang**.*



#NIWOP: El flujo de trabajo sistemático y basado en la evidencia

Fabricante:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribución:

Wehadent Iberica S.L Unipersonal
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**
t +34 96 353 20 20
oficinas.es@wh.com
wh.com