

İmplant iş akışınız için doğru çözüm

Osteotomi

Tüm kemik kaliteleri için 5,5 Ncm ve nekrozların önlenmesi için 90 ml/dak soğutucu.


Yiv açma

Stressiz iyileşme.
Kemik üzerine baskı önlenir.

İmplant yerleştirme

70 Ncm'ye kadar torkla tüm implant tiplerinin kontrollü yerleştirilmesi.

W&H aksesuarları

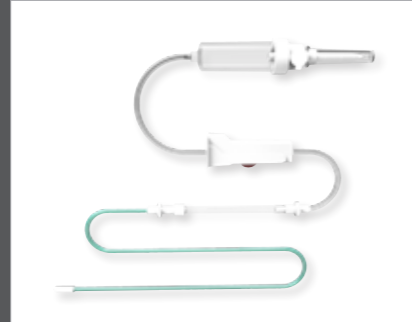

Soğutucu hortumu

- › Tam anlamıyla uygun
- › Tüm W&H cerrahi cihazları için esnek bir şekilde kullanılabilir



Cerrahi trolley

- › W&H kumanda üniteleriniz kompakt olarak tek bir yerde
- › Yer tasarrufu sağlar
- › Taşınabilir



Taşıma çantası

- › Seyahat için emniyetli
- › Implantmed, ayak pedalı, piyasemen ve angldrüva için yeterli alan

Teknik bilgiler

CE
0297

Tip:	Implantmed SI-923	Implantmed SI-915
Voltaj:	230 V	120 V
İzin verilen voltaj dalgalanması:	220-240 V	110-130 V
Nominal akım:	0,3-0,8 A	0,3-1,6 A
Frekans:		50-60 Hz
Şebeke sigortası (2 ad.):		250 V-T1,6 AH
Maksimum elektrik tüketimi:		160 VA
Maksimum güç çıkışı:		80 W
Motordaki maksimum tork:		5,5 Ncm
Nominal gerilim aralığında motordaki devir aralığı:		300-40.000 d/dak
%100'de soğutucu akış miktarı:		minimum 90 ml/dak
Ölçüler mm (Yükseklik x Genişlik x Derinlik):		100 x 235 x 240
Ağırlık (kg):		2,7 kg
Ayak pedalı:		S-N2
Piyasemenler ve angldrüvalar:	WI-75 E/KM / S-9 L G / S-11 L G / WS-56 L G / WS-75 L G / WS-91 L G / WS-92 L G	
Garanti:		12 ay



Üretici:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribütör:

W&H Dental Ticaret Limited Şirketi
Kısıklı Mah. Alemdağ Cd. N.59/2
34692 Çamlıca, Üsküdar / İstanbul, **Türkiye**
t +90 216 5058840
f +90 216 5058843
office.tr@wh.com
wh.com

#whdentalwerk
f @ in v
video.wh.com

Şimdi yetkili satıcınızdan
veya **wh.com** adresinden
temin edebilirsiniz



Ergonomik, kolay, güçlü.

İhtiyaçlarınızı karşılar.
Hem bugün hem de yarın.




implantmed CLASSIC

Resimler semboliktir. Ek ekipmanlar ve gösterilen aksesuar parçaları teslimat kapsamına dahil değildir.

20482 ATR Rev. 000 / 11.02.2020
Değişiklik hakkı saklıdır

En önemlilere odaklanın

Implantmed'in sezgisel kullanım özelliği etkileyicidir. Sizin için en önemli olana, yani hastalarınıza tamamen konsantre olabilirsiniz.

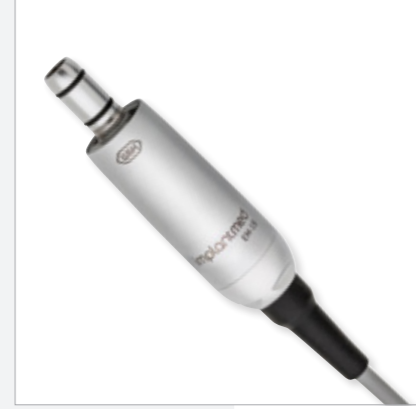

Yüksek performanslı motor
5,5 Ncm motor torku ve 300 ila 40.000 d/dak motor devir aralığıyla Implantmed etkileyici yüksek performansını ortaya koyar.



Yorulmadan çalışma
Bu kombinasyonda, kısa motor ve ergonomik biçimli angldrüva kusursuz bir şekilde dengelenmiştir. Yorulmadan ve ellerinize kramp girmeden uzun süre çalışabilirsiniz.



Kolay kullanım
Yeni otomatik arkadan aydınlatmalı ekranı sayesinde Implantmed'i kullanmak kolaydır.



Stressiz iyileşme
Yeni otomatik yiv açma fonksiyonu, sert kemiklere implant yerleştirirken size destek verir. Kemik üzerine baskı önlenir.

Dr. med. dent. Robert Schwagierek, M. A.
Oral Cerrahi Uzman Diş Hekimi

"Kolay kullanımı sayesinde hasta için yüksek güvenlik ve yüksek kaliteli tedavi mümkün hale geliyor. Günlük uygulamada maksimum verimlilik sağlıyor."

Yeni elektrikli motor EM-19 ile Implantmed



Mini-LED+ ve jeneratöre sahip cerrahi piyasemen ve angldrüvalar

WS-75 L G | 20:1

İmplant yeri hazırlığı ve implant yerleştirme için özel olarak geliştirilmiştir.

S-9 L G | 1:1
S-11 L G | 1:1

Apikal rezeksiyon, osteotomi, sekestrotomi, kemik modelleme, kemik düzeltme ve yirmi yaş dişi çekimi için geliştirilmiştir.

WS-91 L G | 1:2,7

Premolar ve molar alanda daha iyi erişim ve yirmi yaş dişi çekimi için özel olarak geliştirilmiştir.

WS-56 L G | 1:1
WS-92 L G | 1:2,7

Osteotomi, sekestrotomi, germektomi ve hemiseksiyon için geliştirilmiştir.

