

#niwop
f @ in ▶
video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf **wh.com**



Die neue Freiheit

des rotierenden
Polierens



proxeo TWIST **Cordless
Polishing System**

Kabellose Freiheit

Proxeo Twist Cordless: Reinigen und Polieren von Zahnoberflächen und Füllungen ohne Einschränkungen – und das in vielerlei Hinsicht. Genießen Sie die komplette kabellose Bewegungsfreiheit. Aus dem modularen System können Sie Ihr bevorzugtes Kelchsystem frei wählen. Und mit dem einzigartigen LatchShort System profitieren Sie zusätzlich von der signifikant reduzierten Arbeitshöhe.

Kabelloser Antrieb

Mit Proxeo Twist Cordless wechseln Sie Ihre Behandlungsposition nach Bedarf – ohne dabei auf störende Kabel achten zu müssen. Leichter als viele Smartphones passen sich die Handstücke durch ihr ergonomisches Design perfekt Ihren Bewegungen an. So können Sie gezielter auf eine rückenfreundliche Haltung achten und muskelschonender polieren.



Kabellose Fußsteuerung

Mit der kabellosen Fußsteuerung können Sie sich viel freier bewegen und die Position rund um den Patienten zügig wechseln. Die Geschwindigkeit lässt sich von 0 bis 3.000 U/min stufenlos regeln und die Drehzahl so stets an die klinischen Anforderungen anpassen. Zudem ist die Fußsteuerung auch mit dem Proxeo Ultra Piezo Scaler PB-530 kompatibel.



Sie haben die Wahl

Beide Proxeo Twist Cordless-Systeme stehen für maximale Bewegungsfreiheit: das klassische Cordless Handstück PL-40 H mit Direkt-Doriot-Anschluss für Prophy-Einwegwinkelstücke oder das modulare Cordless System PL-40 HW mit Hand- und Winkelstückaufsätzen. Damit können Sie mit Prophy-Einwegwinkelstücken, schraubbaren Prophy-Kelchen oder dem einzigartigen LatchShort-System polieren – mit verkürztem Schaft und bis zu 4 mm geringerer Arbeitshöhe im Vergleich zu einem Standard Latch Polierwinkelstück.



Inspiziert von Prophy Professionals

Für Proxeo Twist Cordless Polishing bietet W&H die passenden LatchShort Prophy-Bürsten und Kelche in verschiedenen Härten mit verkürztem Schaft. Sie wurden gemeinsam mit Prophy-Anwendern entwickelt. Dabei wurde viel Wert auf Eigenschaften wie die optimale Adaption, eine einfache Pastenaufnahme und -verteilung sowie die schonende Reinigung bis in den Sulcus gelegt.



Glatte Oberfläche am Rand
für eine schonende Reinigung bis in den Sulcus.

Noppen an der Außenseite
verringern ein Wegspritzen der Paste und polieren den Interdentalraum gleich mit.



Spezielle Innenlamellen
für einfaches Aufnehmen und gezieltes Auftragen der Paste.



Optimale Adaption
Die Kelche passen sich genau an die Zahnoberfläche an.



Kleiner Kopf
für eine optimale Sicht auf die Behandlungsstelle und eine bessere Erreichbarkeit von schwer zugänglichen Stellen wie den Molarenbereich und die Tuberregion.



Die neue Leichtigkeit beim rotierenden Polieren

It's so easy, so easy ...

Das kabellose Proxeo Twist Cordless Handstück mit kabelloser Fußsteuerung und den innovativen LatchShort Prophy-Kelchen mit bis zu 4 mm geringerer Arbeitshöhe: für besseren Zugang und hochergonomisches Arbeiten.



Technische Daten

Kabelloses Handstück	PL-40 H	PL-40 HW
Gewicht:	118 g	105 g
Maximale Drehzahl:	3.000 min ⁻¹	12.000 min ⁻¹
Maximales Drehmoment:	2 Ncm	
Maße (B x T x H):	160 x 25 x 28 mm	142 x 25 x 28 mm
Akkutype:	Li-Ion	
Laufzeit bei Vollladung:	8 Behandlungen mit je 6 Min. Polieren	
Stand-by:	automatisch nach 4 Min.	
Ladezeit:	für Vollladung (100 %) ca. 2 h für Nachladen (50 %) ca. 30 Min	

* Maximale Drehzahl 3.000 min⁻¹ von Prophy Kelch/Bürste gemeinsam mit Hand- und Winkelstückaufsatz

Abnehmbare Hülse von PL-40 H

Thermodesinfizierbar

Sterilisierbar bis zur angegebenen Temperatur

Prophy-Kelche und Bürsten

Nicht zur Wiederverwendung

Latexfrei

Hand- und Winkelstückaufsatz*	PL-66 W System LatchShort	PL-64 System Screw-in Young	PL-44 System Doriot
Untersetzungsverhältnis:	4:1		
Maximale Drehzahl Prophy Kelch/Bürste:	3.000		
Verwendbare Aufsätze:	W&H LatchShort Prophy Kelche und Bürsten	Young Prophy-Schraub-Kelche	Doriot Prophy-Einwegwinkelstück

* passend für PL-40 HW

Kabellose Fußsteuerung	C-NW
Gewicht:	190 g
Maße (B x T x H):	117 x 117 x 38 mm
Akkutype:	Li-Ion
Laufzeit bei Vollladung:	2 Monate
Stand-by:	automatisch, wenn nicht betätigt
Ladezeit:	ca. 3 h



Proxeo Twist
LatchShort



Rotierend Polieren:
Klinisch basiert



Bernhard Eder

Strategischer Produktmanager W&H, Bürmoos


„Das kabellose Proxeo Twist bietet mehr Bewegungsfreiheit und Komfort während der Behandlung. Besonderes Augenmerk haben wir auf das Gewicht gelegt. Im Vergleich zu einem Winkelstück mit Elektromotor wiegt das kabellose Proxeo Twist weniger als die Hälfte und reduziert dadurch die Ermüdung des Handgelenks beim Polieren.“



Monika Riedl

Dentalhygienikerin, München

„Mit dem kabellosen Proxeo Twist entfallen unangenehme Beanspruchungen und Belastungsschmerzen, welche normalerweise durch die Zugbelastung eines Kabels entstehen.“

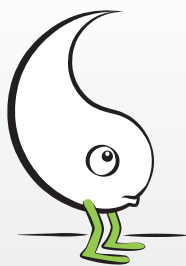

Implantology
without Periodontology is
like Yin without Yang.



#NIWOP: Der systematische und evidenzbasierte Workflow

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Ludwigstraße 27
83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**
t +49 8651 904 244-0
f +49 8651 904 244-4
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Abb. Symbolfotos. Zusatzausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

20489 ADT Rev. 004 / 16.04.2024
Änderungen vorbehalten