

#niwop
f @ in ▶
video.wh.com

Ahora en su
distribuidor o
en **wh.com**



La nueva libertad del pulido rotativo



proxeo TWIST **Cordless
Polishing System**

Libertad inalámbrica

Proxeo Twist Cordless: Limpieza y pulido de las superficies dentales y los empastes sin restricciones, en muchos sentidos. Disfrute de la libertad de movimientos total sin cables. Puede seleccionar su sistema de copas preferido gracias a su sistema modular. Y, con el sistema único LatchShort, podrá aprovechar una altura de trabajo significativamente más baja.

Accionamiento inalámbrico

Con el Proxeo Twist Cordless podrá elegir la postura de tratamiento según lo necesite, sin tener que preocuparse por molestos cables. La pieza de mano, más ligera que muchos smartphones, se adapta perfectamente a sus movimientos gracias a su diseño ergonómico. Así podrá prestar más atención a una postura cómoda para la espalda y a un pulido sin cansancio muscular.



Pedal de control inalámbrico

Con el pedal de control inalámbrico podrá moverse con mucha mayor libertad y cambiar rápidamente la posición alrededor del paciente. La velocidad se puede ajustar sin niveles intermedios de 0 a 3000 rpm y las revoluciones siempre pueden adaptarse a los requisitos clínicos. El pedal de control también es compatible con el Proxeo Ultra Piezo Scaler PB-530.



La elección está en sus manos

Los dos sistemas Proxeo Twist Cordless representan la máxima libertad de movimientos: la clásica pieza de mano PL-40 H con conexión Doriot directa para cabezales desechables Prophy o el sistema modular Cordless PL-40 HW con accesorios de piezas de mano y contra-ángulos para cabezales desechables Prophy, copas de profilaxis atornillables y el sistema exclusivo LatchShort, con un vástago más corto y una altura de trabajo hasta 4 mm menor en comparación con un contra-ángulo de pulido de pasador estándar.



Inspirado por profesionales en profilaxis

Para el sistema de pulido Proxeo Twist Cordless, W&H ofrece los cepillos y las copas compatibles de profilaxis LatchShort en varias durezas con un vástago acortado. Desarrollados junto con usuarios finales, se prestó especial atención a aspectos como la mejor adaptación, la fácil absorción y distribución de la pasta, así como la limpieza cuidadosa hasta el surco.



Superficie lisa en el borde
para una limpieza suave hasta el surco.

Las boquillas en el exterior reducen la salpicadura de la pasta y pulen al mismo tiempo el espacio interdental.



Láminas interiores especiales
para una fácil absorción y aplicación precisa de la pasta.



Adaptación óptima
Las copas se adaptan exactamente a la superficie dental.



Cabezal pequeño
para una visión óptima del lugar del tratamiento y una mejor accesibilidad a las zonas de difícil acceso, como las regiones de los molares y los túbulos.



La nueva ligereza en el pulido rotativo

Es muy fácil ...

La pieza de mano del Proxeo Twist Cordless inalámbrico con pedal de control sin cables y las innovadoras copas de profilaxis LatchShort con hasta 4 mm menos de altura de trabajo ofrecen un mejor acceso y un trabajo más ergonómico.



Datos técnicos

| Pieza de mano inalámbrica | PL-40 H | PL-40 HW |
|--------------------------------------|---|--------------------------|
| Peso: | 118 g | 105 g |
| Velocidad máxima: | 3000 min ⁻¹ | 12 000 min ⁻¹ |
| Torque máximo: | 2 Ncm | |
| Dimensiones (AN x AL x PR): | 160 x 25 x 28 mm | 142 x 25 x 28 mm |
| Tipo de batería: | Iones de litio | |
| Autonomía con carga completa: | 8 tratamientos de 6 min de pulido cada uno | |
| En espera: | automáticamente después de 4 minutos | |
| Tiempo de carga: | para carga completa (100 %) aproximadamente 2 h para recarga (50 %) aproximadamente 30 min | |

* Revoluciones máximas de 3000 min⁻¹ de la copa o el cepillo de profilaxis junto con el accesorio de pieza de mano y contra-ángulo.

Funda extraíble de PL-40 H

Termodesinfectable

Esterilizable hasta la temperatura indicada

Copas y cepillos de profilaxis

No apto para su reutilización

Sin látex

| Accesorio de pieza de mano y contra-ángulo* | PL-66 W Sistema LatchShort | PL-64 Sistema atornillable Young | PL-44 Sistema Doriot |
|--|--|---|----------------------------------|
| Relación de reducción: | 4:1 | | |
| Revoluciones máximas, copa/cepillo de profilaxis: | 3000 | | |
| Accesorios utilizables: | Copas y cepillos de profilaxis LatchShort de W&H | Copas atornillables de profilaxis Young | Cabezal desechable Prophy Doriot |

* Adecuado con PL-40 HW

| Pedal de control inalámbrico | C-NW |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Peso: | 190 g |
| Dimensiones (AN x AL x PR): | 117 x 117 x 38 mm |
| Tipo de batería: | Iones de litio |
| Autonomía con carga completa: | 2 meses |
| En espera: | automático, cuando no se acciona |
| Tiempo de carga: | aprox. 3 h |



Sistema Proxeo Twist



Pulido rotativo:
con base clínica



Bernhard Eder

Jefe de producto estratégico de W&H, Bürmoos


«Gracias a su diseño inalámbrico, el Proxeo Twist ofrece más libertad de movimientos y comodidad durante el tratamiento. Además, hemos prestado especial atención al peso. En comparación con un contra-ángulo con micromotor eléctrico, el Proxeo Twist inalámbrico pesa menos de la mitad y reduce al mínimo la fatiga de las articulaciones de las manos durante el pulido.»



Monika Riedl

Higienista dental, Múnich

«La tecnología inalámbrica Proxeo Twist elimina los desagradables esfuerzos y dolores de tensión normalmente asociados con la carga de tracción de un cable.»

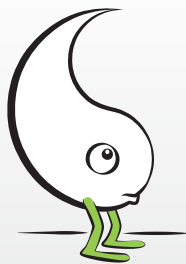

Implantology
without Periodontology is
like Yin without Yang.



#NIWOP: El flujo de trabajo sistemático y basado en la evidencia

Fabricante:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribución:

Wehadent Ibérica S.L Unipersonal
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**
t +34 96 353 20 20
oficinas.es@wh.com
wh.com