

#niwop



video.wh.com

Ora disponibile presso
il vostro rivenditore
o su **wh.com**



Ultra innovativo

L'ablatore piezoelettrico
di W&H



proxeo ULTRA





Serbatoio ultragrande

Il serbatoio ultragrande di Proxeo con i suoi 750 ml di capienza è uno dei più grandi sul mercato. Si adatta perfettamente al design complessivo e grazie alla sua forma speciale e all'ampia apertura è facile da riempire e da pulire.



Superfici ultraslisse

Grazie al suo design privo di spigoli e alle superfici lisce, Proxeo Ultra si disinfetta facilmente con un panno.



Libertà di movimento ultraflessibile

Cambiare posizione non è mai stato così semplice. Posizionate il controllo al piede senza cavi dove lo ritenete più opportuno: i cavi non sono più un problema.



Rilevamento del livello di riempimento ultrapratico

Proxeo Ultra PB-530 segnala preventivamente quando l'acqua sta per esaurirsi. In questo modo potrete integrare comodamente il rabbocco nella vostra procedura operativa.



Illuminazione ultrachiara

L'anello a LED consente un'illuminazione a giorno dell'area di intervento.



Manipolo ultraergonomico

Design sottile e tubo ultraflessibile per un adattamento semplice, un bilanciamento perfetto e ancora maggiore comodità d'uso.



Regolazione della potenza ultraflessibile

Con il regolatore di velocità è facile impostare la modalità di base.

Sistemi Proxeo Ultra

PB-530

- › Compatibilità con pacemaker testata dall'Università tecnica di Graz
- › Manipolo con anello a LED
- › Tubo più sottile e flessibile
- › Controllo al piede senza cavi
- › Rilevamento automatico del livello di riempimento
- › Regolazione della potenza graduale
- › Assortimento di punte perfettamente adattabili
- › Serbatoio grande (750 ml)
- › Programma di pulizia speciale per la disinfezione dei tubi



PB-520

- › Compatibilità con pacemaker testata dall'Università tecnica di Graz
- › Manipolo con anello a LED
- › Tubo più sottile e flessibile
- › Regolazione della potenza graduale
- › Assortimento di punte perfettamente adattabili
- › Serbatoio grande (750 ml)



PB-510

- › Compatibilità con pacemaker testata dall'Università tecnica di Graz
- › Manipolo con anello a LED
- › Tubo più sottile e flessibile
- › Regolazione della potenza graduale
- › Assortimento di punte perfettamente adattabili



Ultra come ultra innovativo

L'ablazione non è mai stata così semplice: i manipoli ergonomici e leggeri garantiscono, insieme al controllo al piede* senza cavi, la maneggevolezza perfetta e la massima flessibilità durante qualsiasi trattamento.



Sistema di punte compatto e di alta qualità per ablatori piezoelettrici

Punte universali e speciali, sviluppate insieme agli utenti finali e adattate ai requisiti clinici di ogni zona di applicazione, alle singole fasi del trattamento e ai requisiti tecnici della tecnologia piezoelettrica di W&H.



Punte universali

- 1U, 2U, 3U, 4U
- 1US, 2US

Per la rimozione del tartaro sovragengivale in tutti i quadranti.



Punta Implant Clean

- 1I

Per la pulizia delicata degli impianti e dei relativi restauri.




Punte parodontali

- 1P, 3Pr/3PI, 4P, 5Pr/5PI

Per il trattamento iniziale e di supporto della parodontite (UPT).

Molteplici applicazioni

Grazie alla regolazione graduale della potenza, gli ablatori piezoelettrici di W&H si possono impiegare facilmente per diverse applicazioni e punte. Dalla profilassi e parodontologia passando per il trattamento dell'impianto o l'endodonzia fino alla micropreparazione di restauri, le possibilità di applicazione sono particolarmente varie.

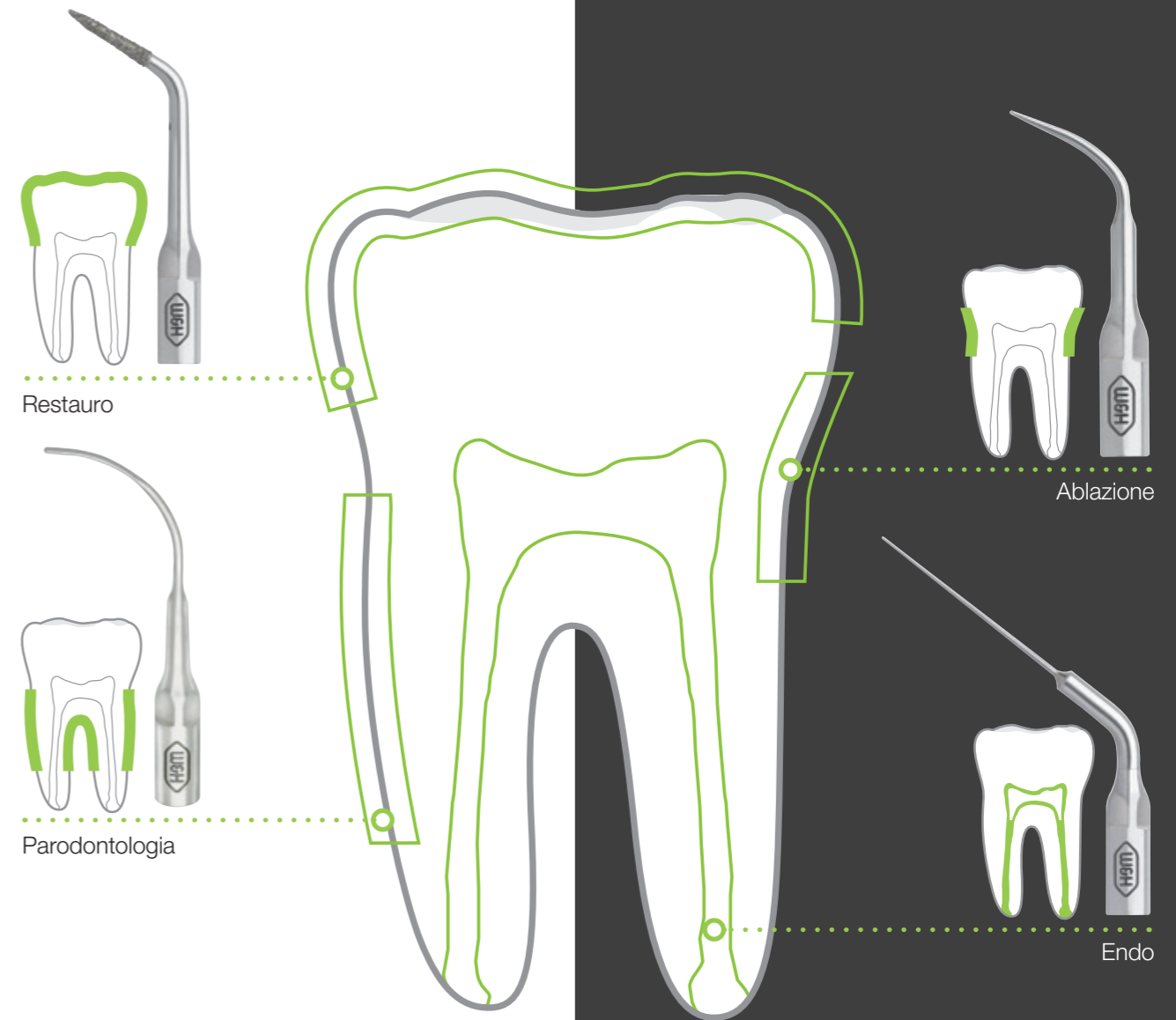

Trattamento dell'impianto



Selezione della punta

Proxeo Ultra è disponibile con due diversi tipi di filettatura. Lo scambiatore di punte con controllo integrato della coppia impedisce un serraggio eccessivo e consente di sostituire la punta in modo semplice e sicuro.



compatibile con
W&H / EMS* / Mectron*

compatibile con
W&H / NSK* / Satelec*



Barbara Schwark

Referente per la profilassi

"Sono entusiasta! Ora c'è la massima chiarezza sul fatto che si possa utilizzare l'ablattore piezoelettrico di W&H in tutta tranquillità anche nei pazienti con pacemaker."

Maggiore sicurezza per ogni paziente

W&H è il primo fornitore a confermare la possibilità di impiego degli ablatori piezoelettrici sui pazienti con pacemaker. Grazie a uno studio indipendente dell'Università tecnica di Graz gli utenti hanno ora la sicurezza necessaria per effettuare un trattamento di profilassi sui pazienti con pacemaker.



Compatibilità delle punte con manipoli W&H

	W&H/EMS/Mectron		W&H/NSK/Satelec*	
	PB-5 L	PB-3	PB-5 L S	PB-3 S
Proxeo Ultra	X		X	
Built-in	X	X	X	X

* Le punte W&H con la filettatura Satelec (ad es. 1US, 2US) sono compatibili con i manipoli W&H PB-5 L S, PB-3 LED S e PB-3 S.

Avviso: EMS®, Mectron®, NSK® e Satelec® sono marchi di terze parti, che non hanno alcun rapporto di collaborazione con W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH. Durante l'uso di punte di terze parti, l'utente deve garantire l'impostazione corretta dei parametri di potenza del dispositivo piezoelettrico W&H.

Soluzione built-in

L'ablatore piezoelettrico W&H viene presentato dai produttori dei riuniti selezionati come una soluzione di azionamento completamente integrata all'interno del sistema generale. Il pannello di controllo del riunito consente un utilizzo semplice e pratico. Richiedete gli ablatori piezoelettrici di W&H presso W&H o il vostro produttore di riuniti come soluzione built-in.



Dati tecnici Proxeo Ultra

Unità di controllo	PB-530	PB-520	PB-510
Tensione di rete:	100-230 V		
Potenza massima di uscita del manipolo con carico (ultrasuoni):	12 W		
Frequenza (ultrasuoni):	22-35 kHz		
Tipo di funzionamento:	S3 (14 s/6 s)		
Lunghezza del cavo del manipolo:	1,8 m		
Dimensioni in mm (L x P x A):	120 x 185 x 205		120 x 185 x 110
Peso:	1.106 g	1.064 g	807 g
Utilizzabile con controllo al piede:	C-NW	C-NF	

Controllo al piede	C-NW ((•))	C-NF
Peso:	190 g	114 g
Dimensioni in mm (L x P x A):	117 x 117 x 38	100 x 110 x 28
Tipo di accumulatore:	Li-Ion	-
Durata a carica completa:	circa 2 mesi	-
Stand-by:	automatico, quando non viene azionato	-
Tempo di ricarica:	circa 3 h	-

Manipolo dell'ablatore piezoelettrico	PB-5 L	PB-5 L S
Luce:	anello a LED	
Peso:	55 g	
Lunghezza senza punta:	135 mm (con raccordo)	
Diametro:	18,5 mm	

Set built-in analogico	PB-3	PB-5 L
Controller piezoelettrico:	PC-1.0	
Set di innesto elettrico:	✓	
Regolatore di velocità:	✓	
Tubo di alimentazione:	VP-3 (1,8 m)	VP-5 (1,8 m)
Manipolo:	PB-3	PB-5 L
Scambiatore di punta con punta inserita:	TW-1: 1U, 1P	TW-1: 1U, 2U, 1P



Lena Holztrattner

Manager prodotti di W&H, Bürmoos


"Con questo prodotto gli utenti hanno compiuto una scelta del tutto consapevole. A partire dai requisiti fino all'aspetto, passando per la facile presa questo prodotto soddisfa senz'ombra di dubbio tutte le esigenze."



Fanny Bretschneider

Igienista dentale, Salisburgo

"L'ablatore piezoelettrico Proxeo Ultra fa onore al suo nome. Consente lo scambio di punte ultrarapido, ha un manipolo ultraergonomico, è ultraflessibile durante l'impiego, si maneggia in modo ultrasemplice ed è ultraversatile a livello di trattamento. Inoltre lo trovo anche ultrabello."

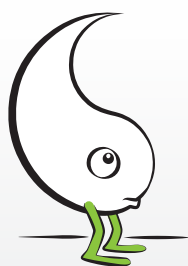

Implantology
without **Periodontology** is
like **Yin** without **Yang**.



#NIWOP: il workflow sistematico e basato sulle evidenze

Produttore:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribuzione:

W&H Italia S.r.l.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italia**
t +39 035 6663911
f +39 035 0662504
office.it@wh.com
wh.com

W&H CH-AG

Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com