

#niwop
f @ in ▶
video.wh.com

Теперь у вашего
торгового агента или
на сайте **wh.com**



Ультрагениальность

Пьезоскалеры W&H



proxeo ^{ULTRA}






Ультрабольшой резервуар

Резервуар Proxeo Ultra вмещает 750 мл и является одним из самых больших на рынке. Он прекрасно вписывается в общий внешний вид, а благодаря своей особой форме и широкому отверстию удобен в наполнении и легок в очистке.



Ультрагладкие поверхности

Благодаря отсутствию кромок и гладким поверхностям Proxeo Ultra легко дезинфицировать путем нанесения дезинфицирующих средств.

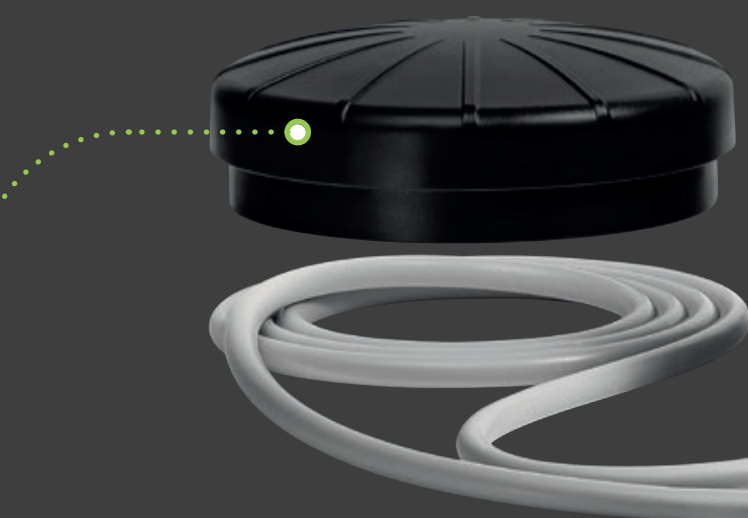

Ультрагибкая свобода движений

Смена положений никогда не была настолько простой. Установите беспроводной блок ножного управления модели там, где вам удобнее всего — без помех в виде кабелей.



Ультрапрактичное распознавание уровня заполнения

Прибор Proxeo Ultra PB-530 заблаговременно предупредит вас о том, что вода подходит к концу. Поэтому доливать воды можно легко выполнять во время работы.



Ультраяркое освещение

Кольцо светодиодов обеспечивает дневное освещение обрабатываемого участка.



Ультраэргономичный прямой наконечник

Изящный дизайн и ультрагибкий шланг для простоты адаптации, идеального баланса и еще большего удобства для пользователя.



Ультраплавная регулировка мощности

Благодаря поворотному регулятору настраивать основной режим особенно удобно.

Системы Proxeo Ultra

PB-530

- › Совместимость с кардиостимуляторами проверена Грацским техническим университетом (нем. Technische Universität Graz)
- › Прямой наконечник с кольцом светодиодов
- › Тонкий, гибкий шланг
- › Беспроводной блок ножного управления
- › Автоматическое распознавание уровня заполнения
- › Плавная регулировка мощности
- › Идеально подобранный ассортимент насадок
- › Большой резервуар (750 мл)
- › Специальная программа очистки для подготовки систем шлангов



PB-520

- › Совместимость с кардиостимуляторами проверена Грацским техническим университетом (нем. Technische Universität Graz)
- › Прямой наконечник с кольцом светодиодов
- › Тонкий, гибкий шланг
- › Плавная регулировка мощности
- › Идеально подобранный ассортимент насадок
- › Большой резервуар (750 мл)



PB-510

- › Совместимость с кардиостимуляторами проверена Грацским техническим университетом (нем. Technische Universität Graz)
- › Прямой наконечник с кольцом светодиодов
- › Тонкий, гибкий шланг
- › Плавная регулировка мощности
- › Идеально подобранный ассортимент насадок



Ultra — как ультрагениальный

Снятие зубного камня может быть очень простым: эргономичные, легкие прямые наконечники вместе с беспроводным блоком ножного управления обладают идеальной маневренностью и максимальной гибкостью во время любой лечебной процедуры.



* PB-530

Компактная, высококачественная система насадок для пьезоскалера

Универсальные и специальные насадки, разработанные вместе с конечными пользователями и адаптированные к клиническим требованиям соответствующей области использования, отдельным обрабатываемым участкам, а также техническим требованиям пьезотехнологии W&H.



Универсальные насадки

- 1U, 2U, 3U, 4U
- 1US, 2US

Для удаления наддесневого зубного камня во всех квадрантах.



Насадка Implant Clean

- 1I

Для щадящей очистки имплантатов и сопутствующих реставраций.



Пародонтологические насадки


- 1P, 3Pr/3PI, 4P, 5Pr/5PI

Для начальной и поддерживающей пародонтальной терапии (UPT).

©Krapf-Romana

Широкие возможности использования

Благодаря плавной регулировке мощности пьезоскалеры W&H можно без труда адаптировать под соответствующий вариант применения и используемую насадку. От профилактики и пародонтологии, сохранения имплантатов или эндодонтии до микропрепарирования реставраций — возможности использования чрезвычайно широки.

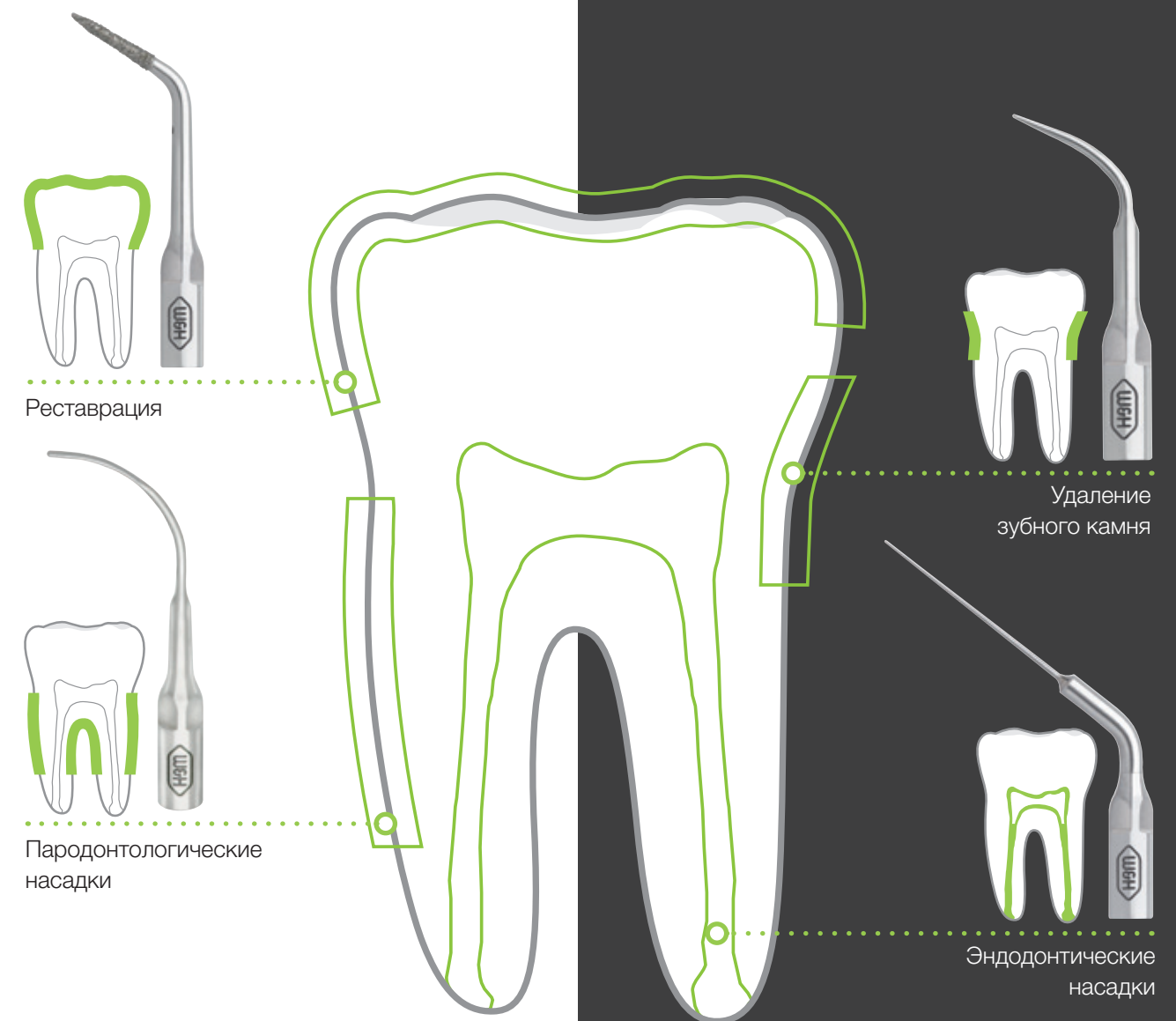

Первоклассный выбор

Proxeo Ultra поставляется в одном из двух вариантов исполнения резьбового соединения. Ключ для смены насадок со встроенным контролем крутящего момента предотвращает перетягивание и обеспечивает простоту и безопасность смены насадки.



Совместимость с
W&H / EMS* / Mectron*

Совместимость с
W&H / NSK* / Satelec*



**Барбара Шварк
(Barbara Schwark)**

Специалист по профилактике

«Я в восторге! Теперь ясно, что пьезоскалер W&H можно безопасно использовать у пациентов с кардиостимуляторами!»

Больше безопасности для каждого пациента

Компания W&H первой из всех производителей подтверждает отсутствие противопоказаний при использовании пьезоскалеров для пациентов с кардиостимуляторами. Независимое заключение Грацского технического университета обеспечивает пользователям необходимую степень безопасности в отношении профилактических процедур для пациентов с кардиостимуляторами.



Совместимость насадок с прямыми наконечниками W&H

	W&H/EMS/Mectron		W&H/NSK/Satelec*	
	PB-5 L	PB-3	PB-5 L S	PB-3 S
Proxeo Ultra	X		X	
Встраиваемый	X	X	X	X

* Насадки W&H с резьбой Satelec (например, 1US, 2US) совместимы с прямыми наконечниками W&H PB-5 L S, PB-3 LED S и PB-3 S. Примечание: EMS®, Mectron®, NSK® и Satelec® являются товарными знаками третьих сторон, которые не связаны с фирмой W&H Dentalwerk Bültoos GmbH. При использовании насадок от сторонних производителей пользователь должен обеспечить правильную настройку параметров мощности пьезоприбора W&H.

Встраиваемое решение

Избранные производители оборудования предлагают пьезоскалер W&H в качестве встроенного привода в рамках комплексной системы. Управление осуществляется просто и удобно через центральный блок управления вашей стоматологической установки. Запросите пьезоскалер в качестве встраиваемого решения в компании W&H или у производителя вашего оборудования.



Технические данные Proxeo Ultra

Блок управления	PB-530	PB-520	PB-510
Сетевое напряжение:	100–230 В		
Максимальная выходная мощность прямого наконечника с нагрузкой (ультразвук):	12 Вт		
Частота (ультразвук):	22–35 кГц		
Режим работы:	S3 (14 с/6 с)		
Длина кабеля прямого наконечника:	1,8 м		
Размеры в мм (Ш × Г × В):	120 × 185 × 205		120 × 185 × 110
Масса:	1106 г	1064 г	807 г
Возможность использования с блоком ножного управления:	C-NW	C-NF	

Блок ножного управления.	C-NW ((•))	C-NF
Масса:	190 г	114 г
Размеры в мм (Ш × Г × В):	117 × 117 × 38	100 × 110 × 28
Тип аккумуляторной батареи:	Литий-ионная	–
Время работы при полном заряде:	ок. 2 месяцев	–
Режим ожидания:	Автоматически при отсутствии активации	–
Время зарядки:	ок. 3 ч	–

Наконечник для пьезоскалера	PB-5 L	PB-5 L S
Свет:	кольцо светодиодов	
Масса:	55 г	
Длина без насадки	135 мм (с муфтой)	
Диаметр	18,5 мм	

Встраиваемый набор, аналоговый	PB-3	PB-5 L
Пьезоконтроллер:	PC-1.0	
Набор электрических разъемов:	✓	
Поворотный регулятор	✓	
Подающий шланг:	VP-3 (1,8 м)	VP-5 (1,8 м)
Прямой наконечник:	PB-3	PB-5 L
Ключ для замены насадок с установленной насадкой:	TW-1: 1U, 1P	TW-1: 1U, 2U, 1P



Лена Хольцтратне (Lena Holztrattner)

Менеджер по продукции W&H, Бюрмос


«Этот аппарат совершенно осознанно выбирают женщины. От требований к внешнему виду до простоты обращения — он абсолютно точно соответствует потребностям врачей-женщин.»



Фанни Бретшнайдер (Fanny Bretschneider)

Стоматолог-гигиенист, Зальцбург

«Пьезоскалер Proxeo Ultra достоин своего имени. Он обеспечивает ультрабыструю смену насадок, обладает ультраэргономичным прямым наконечником, ультрагибок в использовании, ультрапрост в обращении и ультрамногогранен в лечебных процедурах. Кроме того, он обладает ультрапрекрасным внешним видом.»

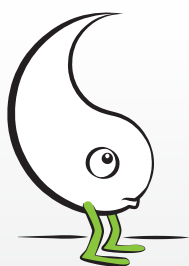

Implantology
without **Periodontology** is
like **Yin** without **Yang**.



#NIWOP: систематический и основанный на опытных данных рабочий процесс

Производитель:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Авторизованный дилер:

