

#whdentalwerk



video.wh.com

Plus d'info

sur

wh.com



Nettoyage et désinfection **performants**



teon

teon +

Teon

Une étape de plus pour le traitement

Le nouveau Teon est un laveur désinfecteur hautement efficace. Avec ses programmes spéciaux, il assure un nettoyage et une désinfection optimaux au sein du cabinet dentaire. Le Teon améliore les méthodes de travail dans la salle de stérilisation, réduit la durée de traitement et renforce la protection contre les contaminations croisées.



Le Teon est disponible sans équipement intérieur afin que vous puissiez précisément adapter l'appareil à vos besoins, par exemple, avec le « **kit de démarrage** » (plus d'informations à la page 6).

teon

Teon +

La meilleure approche pour le traitement

Teon + est le modèle haut de gamme des laveurs désinfecteurs de W&H. En tant que système de nettoyage automatique de qualité supérieure pour différents types d'instruments, il répond aux attentes des cliniques les plus exigeantes. Le Teon + garantit une traçabilité continue et répond ainsi aux exigences réglementaires actuelles. Son système innovant de séchage à l'air actif pose de nouveaux jalons en matière de qualité et de performance.



Équipez votre Teon + avec les accessoires dont vous avez réellement besoin. L'appareil est vendu vide et peut être adapté à vos exigences personnelles, par exemple avec le « **kit d'injection** » (plus d'informations à la page 6).

teon +

Nettoyage et traitement de **qualité supérieure**

Capacité élevée de la cuve

Écran facile d'utilisation

Large choix d'accessoires

Nettoyage des instruments à corps creux

Performance de nettoyage élevée

Programmes spéciaux préservant le matériel

Traçabilité et connectivité grâce à la connexion Ethernet

Fiabilité grâce aux éléments de chauffe situés en dehors du compartiment de lavage et au design lisse de la cuve

teon

Teon + offre :

- › Une qualité de séchage élevée pour les instruments délicats
- › Un séchage à l'air actif avec filtre HEPA



Surface lisse et design moderne

Les laveurs désinfecteurs se distinguent par leur performance élevée et garantissent ainsi un processus de nettoyage réussi et global de vos instruments dentaires. Grâce à leur aspect moderne et élégant, ils s'intègrent parfaitement dans votre salle de stérilisation.



Sécurité

Le contrôle intégré du bras d'aspersion garantit d'excellents résultats de préparation. La pompe à vitesse variable augmente ou diminue la pression selon l'étape de traitement. Le système de filtrage capture les particules de saletés afin d'éviter tout endommagement de votre équipement.



Confort d'utilisation et ergonomie

Le réservoir à sel intégré dans la porte garantit un remplissage simple et aisé. Grâce au concept d'ergonomie, aucun composant n'a besoin d'être retiré.



Compartiment de lavage pour une hygiène optimale

Le compartiment de lavage assure un rendement plus élevé sans compromettre l'hygiène et la propreté. En outre, il possède des dimensions optimales et est conçu pour une capacité plus élevée par charge.



Facilité d'utilisation


Le design moderne et l'assistance intuitive de l'utilisateur facilitent les méthodes de travail exigeantes lors du traitement. L'écran est facile à utiliser et sert également de dispositif d'ouverture de la porte.

Complet et polyvalent

Le traitement peut être si simple et efficace – avec les accessoires adaptés.

1 – Panier supérieur

Réglable en hauteur, flexible pour différents rangements.

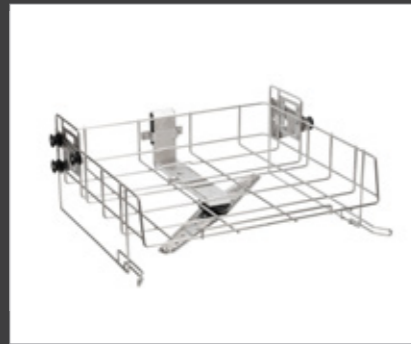

2 – Rangement

Pour supports d'instruments et utilisation flexible.



3 – Panier inférieur

Pour plateaux à mailles et divers rangements.



4 – Rangement

Pour divers instruments. Peut être placé dans le panier supérieur ou inférieur.




« Kit de démarrage » 1 – 6
avec équipement de base parfait.

« Kit d'injection » 3 – 8
avec équipement supplémentaire, parfaitement adapté aux pièces à main.


5 – Rangement

Compartiments variés pour un chargement optimal d'instruments à la verticale.

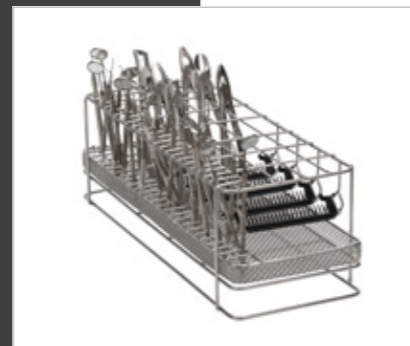

6 – Rangement

Compartiments variés pour une charge optimale.

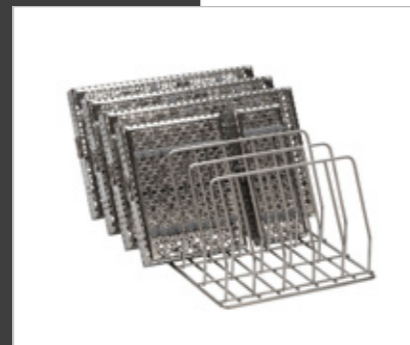

7 – 8 Panier supérieur – buses d'injection

Pour divers instruments, avec buses d'injection.



Remarque :

Les appareils sont vendus vides. Équipez votre appareil avec les équipements adaptés.



Caractéristiques techniques

CE
0297

Type :	Teon	Teon +
Alimentation électrique :	400 V CA ; 50-60 Hz/230 V CA ; 50-60 Hz	
Courant :	16 A	
Dimensions totales (l x h x p) :	600 x 835 x 600 mm	
Espace requis pour le montage (l x h x p) :	598 x 835 x 1 200 mm (au total avec la porte ouverte)	
Poids (vide) :	74 kg	78 kg
Smart Dry :	•	-
Dry Plus :	-	•
Filtre HEPA :	-	•
Connexion à l'eau froide :	•	•
Connexion à l'eau chaude :	-	•
Connexion pour eau déminéralisée :	•	•
Auto-Close – verrouillage automatique de la porte :	•	•
Nombre de pompes doseuses intégrées pour produits liquides :	2	1
Module de dosage intégré pour produit de rinçage :	•	•
Réservoir à sel – dans la porte à l'avant :	•	•
Nombre de programmes :	5	6
Nombre de programmes personnalisables :	2	2
Durée de cycle :	49'	74', séchage à l'air actif inclus
* Durée pour le programme Vario TD Dental		

Les laveurs désinfecteurs Teon et Teon + ont été développés, certifiés et validés conformément aux directives et normes les plus strictes :

93/42/CEE Directive relative aux dispositifs médicaux	EN 61010-2-040 Dispositions de sécurité	NF EN ISO 15883-1/2 pour laveurs désinfecteurs
EN 61326-1 relative à la compatibilité électromagnétique	-	EN 1717 relative à la protection contre la pollution de l'eau potable

Information réglementaire :

Dispositif Médical Classe 2b / CE 0297 / DQS.

Réservé aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursé par les organismes d'assurance maladie.

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation ou sur l'étiquetage du produit.

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italy**
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

W&H France
4 rue Ettore Bugatti
67201 Eckbolsheim, **France**
t + 33 388 773 600
f + 33 388 773 601
commercial.fr@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Photos non contractuelles. Le matériel supplémentaire et les accessoires illustrés ne font pas partie de la livraison standard.

20492 AFR Rev. 001 / 30.01.2020
Sous réserve de modifications