

#whsterilization



video.wh.com

Теперь у вашего
торгового агента или
на сайте wh.com



Высокотехнологичная начинка и потрясающий дизайн

Новые стерилизаторы Lara

Вы уже сегодня подготовлены к завтрашнему дню

lara

Самый быстрый цикл типа В
в своем сегменте

Автоматическая запись циклов
на вместительный USB-накопитель


В виде опции **высокотехнологичный принтер** для печати этикеток и отчетов о циклах

Уникальные возможности обновления

Эргономичный функциональный дизайн

Цветной сенсорный дисплей **для простоты управления**

Идеальные размеры для простоты интеграции и управления

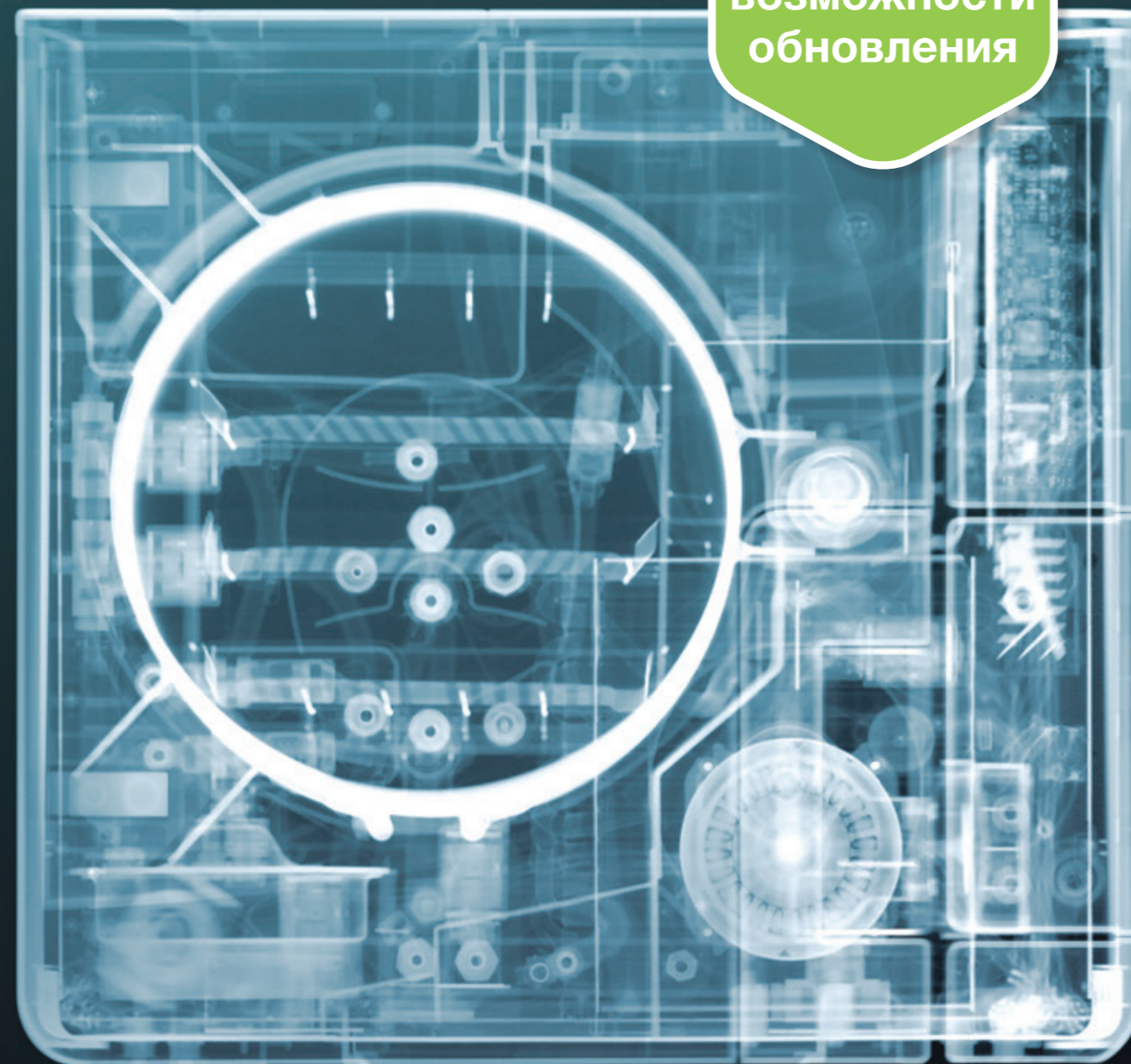

Рентгеновский снимок: Ник Визи для W&H.
Другие фантастические работы фотографа
можно посмотреть на сайте nickveasey.com.

Откройте для себя возможность простого управления и надежного отслеживания

Цветной сенсорный дисплей разработан специально для того, чтобы сделать вашу ежедневную работу легче, быстрее и эффективнее. Кроме этого, Lara предлагает комплексную концепцию документации в полном соответствии с вашими потребностями.

Простота управления

Интеллектуальная структура меню новых стерилизаторов Lara обеспечивает очень высокий комфорт обслуживания: большой цветной сенсорный дисплей обеспечивает быстрый и интуитивно понятный поиск предустановленных программ.

USB-накопитель большого объема

На USB-накопитель большого объема автоматически сохраняются отчеты циклов на протяжении всего срока службы стерилизатора Lara. В виде опции можно заказать принтер для печати этикеток и отчетов циклов, с помощью которого можно отслеживать и документировать процессы без дополнительного компьютера или отдельного программного обеспечения.



Легкость заполнения

Встроенная воронка большого объема предотвращает разбрызгивание воды во время ее заливки.

Удобный доступ к резервуару

Для очистки крышку резервуара можно легко снять без использования инструментов.

Автоматический клапан для заправки воды


Автоматический клапан для заправки воды позволяет подключать систему водоподготовки. Ручное заполнение и слив не требуются.

lara

Откройте для себя преимущество обновлений

Как бы ни изменились в будущем нормативные требования, благодаря новым стерилизаторам Lara вы подготовлены к этому наилучшим образом. Новая система кодов активации Activation Code W&H действительно позволяет недорого и быстро обновить стерилизатор в соответствии с потребностями конкретной клиники или будущими нормативными требованиями.

Обзор четырех дополнительных функций

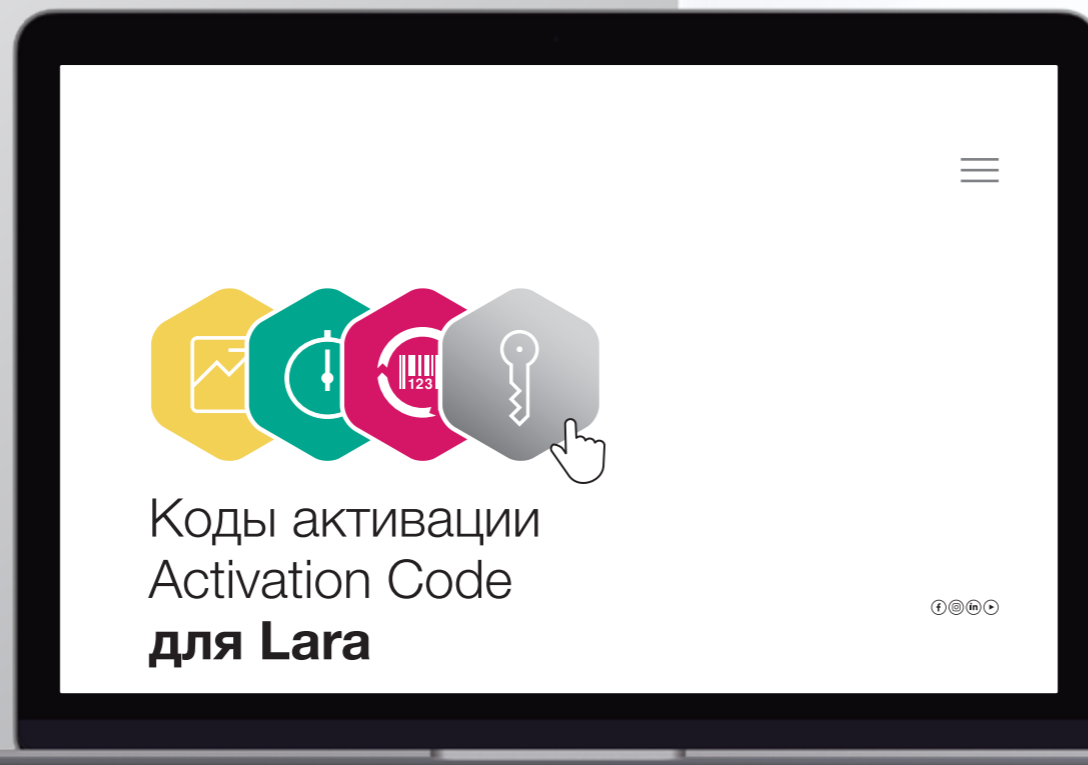

Шесть шагов до персонализированного стерилизатора

- Этап 1.** Купите нужный вам код активации Activation Code у локального дилера.
- Этап 2.** После получения кода для логина перейдите по ссылке activation.wh.com.
- Этап 3.** Введите этот код доступа, указав также серийный номер и тип вашего стерилизатора.
- Этап 4.** Ваш индивидуальный код активации Activation Code генерируется.
- Этап 5.** Введите этот код в меню стерилизатора Lara.
- Этап 6.** Теперь вам доступна эта функция.



Эффективность

Ускоренные циклы благодаря обновлению до режима Eco Dry +, который автоматически адаптирует время сушки к весу загруженного материала. Это экономит время и энергию.



Быстрый цикл

Быстрый промежуточный цикл: быстрый цикл позволяет стерилизовать неупакованные инструменты, к которым не предъявляется особых требований, в течение всего лишь 20 минут.



Отслеживаемость

Функция «Отслеживаемость» позволяет персонализировать стерилизатор и отследить операции, определив лицо, которое запустило цикл стерилизации. Для идентификации пользователя служит 6-значный PIN-код.



Все в одном

Код активации Activation Code «Все в одном» предлагает все преимущества одновременно — и вы получаете в итоге стерилизатор с уникальным соотношением цены и качества.



Откройте для себя исключительную эффективность

Новые стерилизаторы Lara уже в стандартной версии обеспечивают один из самых быстрых циклов стерилизации типа В в этом классе. И вы можете их улучшить с помощью кода активации Activation Code благодаря простому обновлению до уровня Eco Dry +.

Eco Dry + автоматически регулирует время сушки в зависимости от объема загрузки — и экономит таким образом время и энергию. Дополнительно предлагается через код активации Activation Code: быстрый цикл типа S для неупакованных инструментов, к которым не предъявляются особых требований.



Экономия времени

Продолжительность цикла типа В — 40 МИНУТ ПРИ ЗАГРУЗКЕ 2 КГ, включая безупречную сушку!

Увеличенный срок службы

Благодаря регулированию времени сушки в зависимости от загрузки продолжительность воздействия тепла ограничена. Это увеличивает срок службы инструментов.

Экономия электроэнергии

Оптимизация времени сушки означает уменьшение потребления энергии. Поэтому Lara — это «экономное решение».



Подготовка длится менее 23 минут!



Дезинфекция путем нанесения дезинфицирующих средств: **1 минута**

Перед очисткой и обслуживанием продезинфицируйте инструменты путем нанесения дезинфицирующих средств.

10"

Стерилизация: 20 минут

Благодаря стерилизатору с быстрым циклом Lara инструменты будут готовы к эксплуатации уже через 20 минут.



Технические данные



lara

| Цикл стерилизации: | B-Universal 134 | B-Prion 134 | B-Universal 121 | Быстрый цикл Опции | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----|---------------|---------------|
| Температура | 134 °C | 134 °C | 121 °C | 134 °C | | | |
| Время ожидания (минуты) | 4' | 18,5' | 20,5' | 3,5' | | | |
| Общая продолжительность цикла (минуты), включая полную просушку | Lara 17 | Автоматически от 25' до 51' | 37' | Автоматически от 40 до 65' | 52' | От 41' до 73' | От 20' до 22' |
| | Lara 22 | Автоматически от 28' до 55' | 39' | Автоматически от 40' до 68' | 54' | От 42' до 76' | От 20' до 22' |
| Загрузка Lara 17 | Максимальная — 4,5 кг, обычная — 2 кг, максимальная пористая — 1,5 кг | | | Без упаковки макс. 2 кг | | | |
| Загрузка Lara 22 | Максимальная — 5,5 кг, обычная — 2 кг, максимальная пористая — 2 кг | | | Без упаковки макс. 2 кг | | | |
| Загрузка контейнеров Lara 17/22 | Максимум 9 кг | | | | | | |
| Тестовые циклы | Helix/Bowie Dick/испытание в вакууме | | | | | | |
| Комплект поставки: поворотный держатель, 3 алюминиевых поддона, сливной шланг, держатель поддона, USB-накопитель 8 Гб, инструмент для открывания дверцы, заводская проверка. | | | | | | | |

CE, CE-mer

| Торговое название: | Lara RIL-117 | Lara RIL-122 |
|---|--|---------------------------------------|
| Тип: | | |
| Размер камеры | 17 л | 22 л |
| Электропитание | 200–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 10 А | 200–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 10 А |
| Потребляемая мощность | 2,0–2,4 кВт | |
| Общие размеры (Ш x В x Г) | 465 x 452 x 646 мм | |
| Вес (в пустом виде) | 42,5 кг | 44 кг |
| Главный водяной резервуар/резервуар для использованной воды | 4,8/4,8 л | |
| Рабочий диапазон | От 7 до 15 циклов | |
| Полезный объем камеры (Ш x В x Г) ⁽¹⁾ | 195 x 195 x 312 мм | 195 x 195 x 400 мм |
| Типы разъемов | 2 USB-разъема, встроенный разъем для автоматического заполнения воды | |

(1) Полезная площадь в случае стандартной конфигурации держателя поддонов.


| Стерилизаторы Lara были разработаны, сертифицированы и валидированы в строгом соответствии со стандартами и директивами: | | |
|--|--|---|
| 2017/745 Директива о медицинской продукции | IEC 61326-1 Электромагнитная совместимость | IEC 61770 Электроприборы для подключения к установке водоснабжения |
| 2012/19/ЕС Директива об отслуживших свой срок электрических и электронных приборах | IEC 61010-1 Требования по технике безопасности для стерилизаторов | EN 13060 Малые паровые стерилизаторы |
| 2014/68/EU Директива по оборудованию, работающему под давлением | IEC 61010-2-040 Особые требования к стерилизаторам и аппаратам для очистки и дезинфекции | Валидацию стерилизатора можно проводить согласно стандарту EN ISO 17665-1 |








W&H AIMS

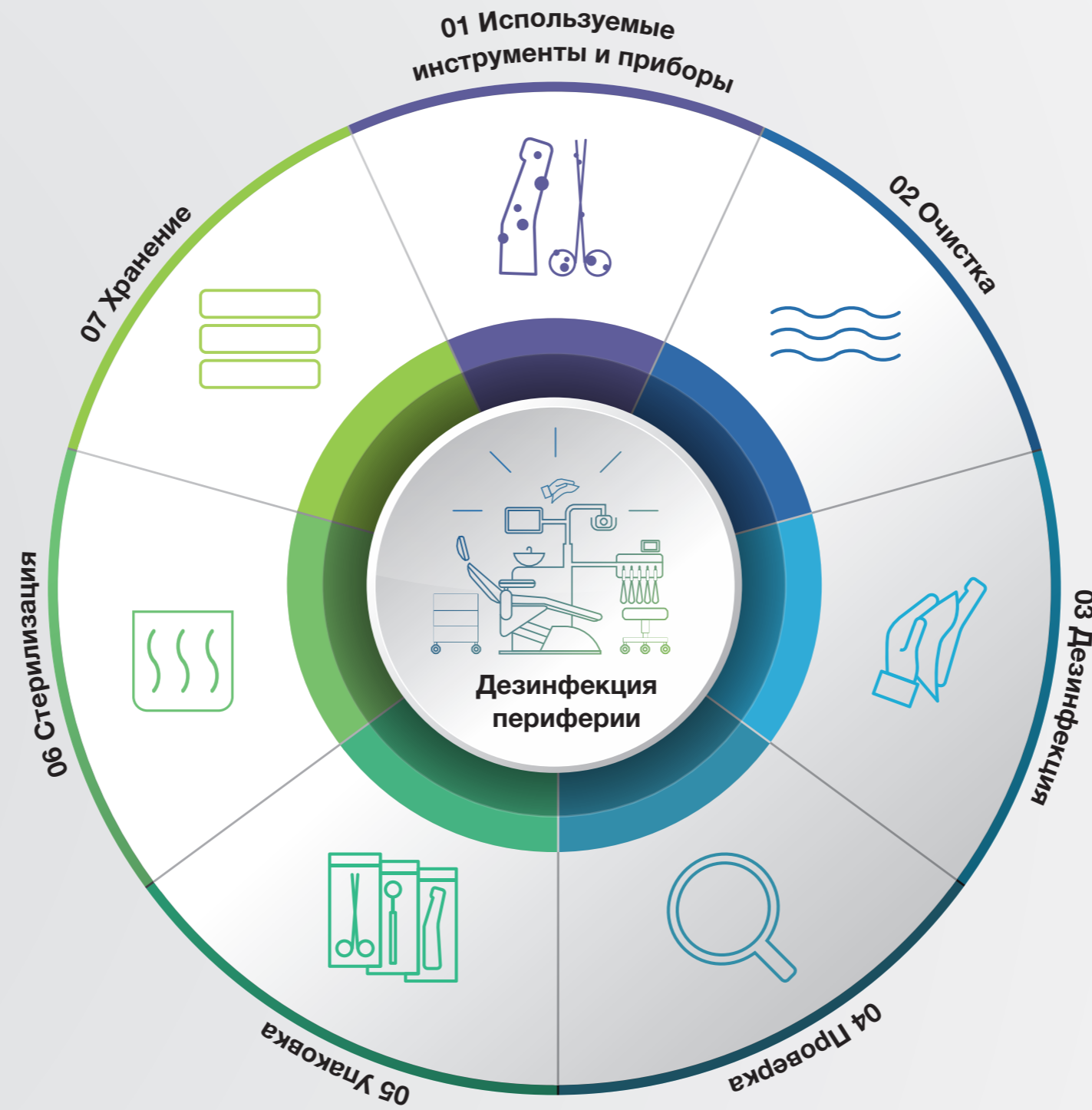Безопасность прежде всего!

Гигиена приобретает первостепенное значение в стоматологической практике. W&H AIMS поможет Вам в этом с помощью широкого ассортимента продукции, фундаментальных знаний и краткого обзора релевантной информации.

Для безопасности врача и пациента. aims.wh.com



- 
Обеззараживание
- 
Очистка
- 
Дезинфекция
- 
Проверка и уход/
обслуживание
- 
Упаковка
- 
Стерилизация
- 
Прослеживаемость
и хранение

Ваши требования в центре внимания

Компания W&H уже давно занимает лидирующую позицию в сфере производства средств стерилизации. Наша главная цель — разработка инновационных, надежных и быстрых стерилизаторов, идеально адаптирующихся к условиям использования в разных клиниках. В нашем ассортименте есть стерилизаторы для всех случаев применения.


Подробную информацию о наших стерилизаторах можно узнать у локальных дилеров или на сайте **wh.com**



Производитель:

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

Авторизованный дилер:

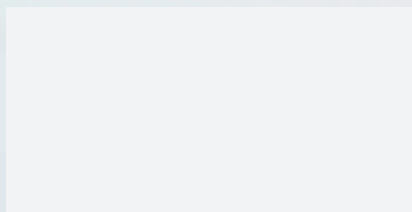

Все изображения приводятся только в качестве иллюстраций.
Дополнительное оборудование и принадлежности не входят в комплект поставки.

20494 ARU Rev. 001 / 17.07.2023
С правом на изменения