

#whsterilization
f @ in ▶
video.wh.com


Şimdi yetkili satıcınızdan
veya **wh.com** adresinden
temin edebilirsiniz



Lina

Verimliliğin gücü

Kullanım kolaylığı dışında
Teknoloji içinde

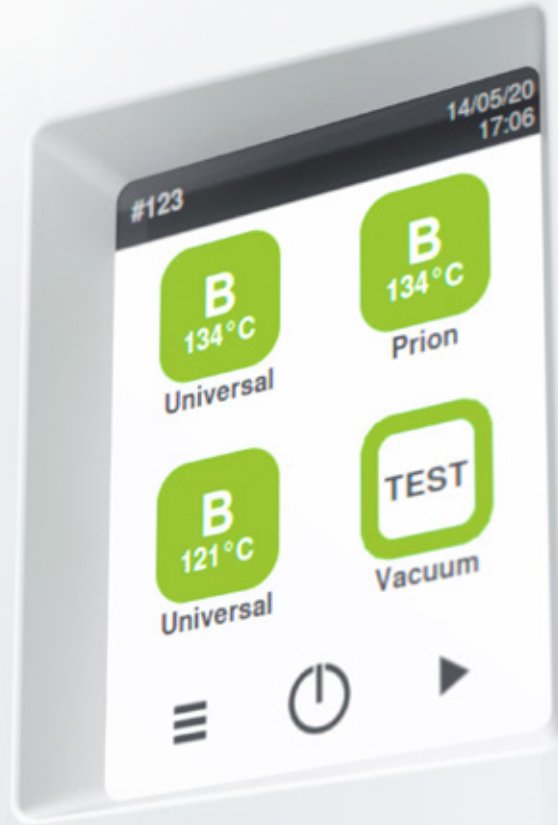

lina

B tipi otoklav, tek kelimeyle mükemmel!

Optimum performans için B tipi otoklav.

Enfeksiyonların bulaşmasını önlemek için, dental uçların hazırlığında buhar sterilizasyonu önemli bir rol oynar. Burada verimlilik ve kolaylık belirleyicidir. Lina otoklav, tüm bu gereklilikleri ve daha fazlasını karşılar: Kolay kullanım, ergonomik ve işlevsel tasarım, uygun sterilizasyon döngüleri ve sonradan eklenebilen fonksiyonlar, yüksek verimlilik ve optimum sonuçlar sağlar.



Enfeksiyon zincirini kırma

B tipi otoklav – Hazırlıkta ve enfeksiyon önlemede güvenlik için.



B tipi otoklav

kategorisindeki en iyi döngü sürelerine sahiptir.

Kullanım kolaylığı

sayesinde ödün vermeden, basit bir kullanıcı deneyimi.

Benzersiz yükseltmeler

cihazın ihtiyaca göre ve müşteriye özgü uyarlanmasını ve yenilenmesini sağlar.

Geliştirilmiş izlenebilirlik

eksiksiz dokümantasyon sağlar.

İyileştirilmiş bileşenler Basitleştirilmiş çalışma süreçleri

Kullanım kolaylığı dışında.

Lina otoklavın özel avantajları, zahmetsiz kullanımın yanı sıra ergonomik ve işlevsel tasarımıdır. Muayenehanede basit bir sterilizasyon işlemi ve etkili bir iş akışı için idealdir.

Enfeksiyon riski **sterilizasyon sayesinde aktif bir şekilde en aza indirilir!** Çünkü önemli olan hastalarınızın, çalışanlarınızın ve sizin güvenliğinizdir.

İyileştirilmiş kullanım kolaylığı ne tür avantajlar sağlar?

Kolay kullanım

- › 3,5" dokunmatik ekran, basit bir kullanıcı deneyimi garanti eder.
- › Kumanda arayüzü ve menü yapısı basitleştirilmiştir ve muayenehanedeki günlük işleyişinizi kolaylaştırır.

Optimum sterilizasyon programları

- › ECO B sterilizasyon programı, 0,5 kg yükleme miktarlarının hazırlığını 25 dakikada gerçekleştirir.
- › Lina 6 kg'a kadar yükleme miktarlarının hazırlığı için de uygundur ve böylece dental kliniklerin tüm gerekliliklerini karşılar.
- › 121 °C'de B Universal döngü ile, operasyon kıyafetleri gibi hassas ve gözenekli sterilizasyon yapılacak ürünlerin hazırlığında da kullanılabilir.

Tasarım ve bakım

- › Kolay çıkarılabilen kapak sayesinde su deposu alet kullanmadan kolay erişim sağlar. Entegre huni ise dolun işlemi kolaylaştırır.
- › Cihazın yüksek güvenilirliği nedeniyle bakım aralığı 4.000 döngüde bir veya 5 yılda birdir.
- › Tasarımı ergonomik ve işlevsel formuyla öne çıkar. Modüler ayakları ve kompakt yapısı sayesinde Lina her yere sığar.



Teknik konseptler Gerçekleştirilen vizyonlar

Teknoloji içinde.

Dışından görülebilen kullanım kolaylığının yanı sıra içinde barındırdığı teknik bilgi birikimi de fark yaratır. Lina otoklav, bugün ve yarın iş akışını önemli ölçüde kolaylaştıran, geleceğe yönelik seçeneklere sahip, iyi düşünülmüş bir teknik konseptte dayanmaktadır.

Otoklavınızın yardımıyla bugün ve yarın karşınıza çıkacak tüm zorlukların üstesinden gelmek için **teknolojik yükseltmelerden** faydalanın!

Gelişmiş teknoloji ne tür avantajlar sağlar?




Geliştirilmiş izlenebilirlik

- › Dokümantasyon otomatik olarak güçlü bir USB belleğe kaydedilir.
- › Barkod etiketi yazıcısı sayesinde döngü, sterilizasyon ambalajı ve hasta arasında ilişki kurulabilir ve izlenebilirlik daha iyi bir seviyeye taşınır.
- › Döngü raporu yazıcısı kağıt üzerinde uygun bir döngü dokümantasyonu sağlar.



İyileştirilmiş bağlanabilirlik

- › ioDent® sistemi birinci sınıf servis ve destek ile akıllı dental çözümler sunar.
- › W&H Steri uygulamasıyla otoklavın kumanda edilmesini ve uzaktan denetlenmesini sağlar. Ayrıca döngü sürecinin yedeklemesi daha fazla güvenlik için akıllı telefona kaydedilebilir.

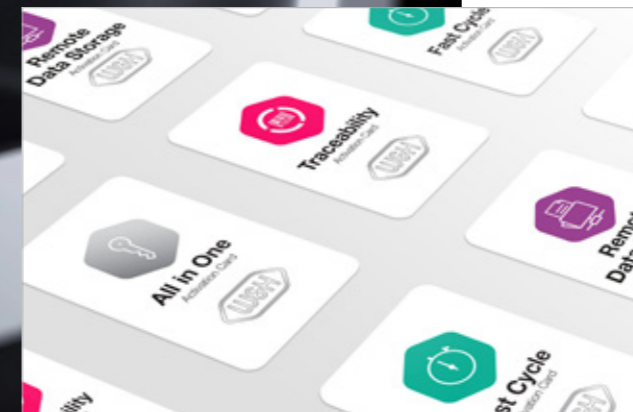

Benzersiz yükseltmeler

- › Activation Code sistemi yenilikçi bir yükseltme konseptidir. Activation Code'ları muayenehanedeki gerekliliklere veya gelecekteki yasal gerekliliklere bağlı olarak yeni işlevlerle özelleştirilmiş yükseltmeler sunar. Etkili, müşteriye özgü uyarılama için tek yapmanız gereken Lina otoklavı yükseltmektir.

Benzersiz yükseltmeler

Tamamen bireysel ihtiyaca göre.

İhtiyaçlar ve gereklilikler değişebilir. Activation Code sistemiyle her duruma hazırsınız: İlave fonksiyonlar muayenehanedeki gerekliliklere veya gelecekteki yasal gerekliliklere göre etkinleştirilebilir.



Fast cycle

Tedavi arasında hızlı döngü: Piyasemenler dahil ambalajlı olmayan aletlerin sterilizasyonunu mümkün kılar.



Remote data storage

“Remote data storage“ (Uzak veri depolama) fonksiyonu, dijital döngü dokümantasyonunun ideal tamamlayıcısıdır. Döngü sürecini doğrudan bilgisayara kaydetme seçeneğini sunar.



Traceability

“Traceability“ (İzlenebilirlik) fonksiyonu, kullanıcı tanımlama ve yük onayı için kullanılır. Doğrudan Lina otoklava girilen bir PIN ve W&H Steri uygulaması güvenli bir tanımlama sağlar.



All in One

“All in One“ (Hepsi Bir Arada) fonksiyonu tüm avantajları eşsiz bir fiyat-performans oranıyla sunar.

Altı adımda bireysel otoklavınız:

Adım 1

Tercih ettiğiniz Activation Code'u yakınızdaki dış malzemeleri satan yetkili satıcınızdan satın alabilirsiniz.

Adım 2

Login Code'u aldıktan sonra şu adresi ziyaret edin: **activation.wh.com**

Adım 3

Bu erişim kodunu seri numarası ve otoklavınızın tipiyle birlikte girin.

Adım 4

Bireysel Activation Code'unuz oluşturulur.

Adım 5

Bu kodu Lina otoklavınızın menüsüne girin.

Adım 6

Fonksiyon kullanılabilir.




W&H AIMS Önce güvenlik!

aims Advanced
Infection Prevention
Management Solutions

Diş hekimliğinde hijyen elzemdir.
W&H AIMS, sizi geniş ürün yelpazesi,
temel bilgiler ve tüm detaylar konusunda
desteklemek için tasarlanmıştır:

Kendi güvenliğiniz ve hastalarınızın
güvenliği için. aims.wh.com

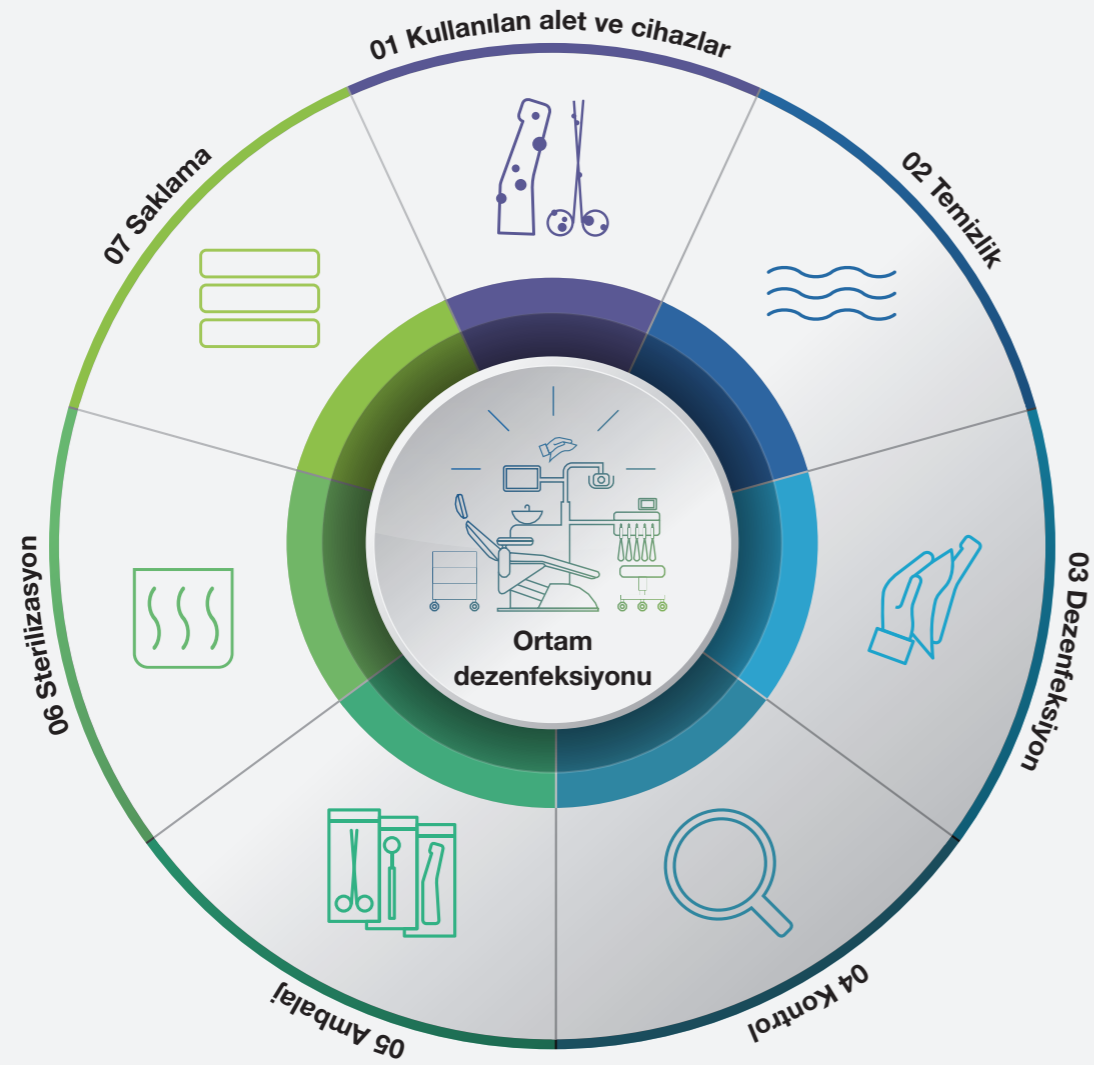

Dekontaminasyon Temizlik Dezenfeksiyon Kontrol ve bakım Ambalaj Sterilizasyon İzlenebilirlik ve saklama İzi

Uygun aksesuarlar

W&H, iş akışınızın optimizasyonu için çok sayıda aksesuar seçeneği
sunuyor. Küçük ekstralarla bile büyük sonuçlar elde edilebilir.
Muayenehanedeki işler kolaylaşır ve ekibiniz zaman kazanır.



Döndürülebilir tepsi taşıyıcı
Yükünüz için en iyi tepsi taşıyıcı:
• 3 büyük ve 2 standart tepsi
veya 3 kaset için
• 6 tepsi veya 3 kaset için



Barkod tarayıcısı
Tarayıcı hasta kaydı etiketlerinin
taranmasını sağlar.



Sprint
Döngü protokollerinin 10 yıl
garantiye sahip termal kağıt
üzerine yazdırılmasını sağlar.



Barkod etiketi yazıcısı
Etiket yazıcısı barkodları yazdırmak
için otoklava bağlanabilir. Entegre
veri kaydedicisiyle birlikte
izlenebilirlik sisteminizi iyileştirir.
Etiket yazıcısı ile sterilizasyon
döngüsü kolay ve rahat bir şekilde
hasta kaydıyla ilişkilendirilebilir.



Multidem
Multidem, buhar üretimi için
minerallerden arındırılmış su sağlar,
birçok geleneksel otoklavla ve
uçların yıkanması gibi diğer günlük
iş süreçlerinde de kullanılabilir.
Böylece tutarlı ve optimum
performans sağlayarak otoklavınızın
kullanım ömrünü uzatır.



Seal² ve SealVal²
W&H'nin folyo kapatma makineleri,
sterilizasyon ambalajının yanma
tehlikesi olmadan sadece iki
saniyede 12 mm genişliğinde
bir kaynak dikişi oluşturur. Kalıcı
sterilitenin elde edilmesi için, steril
ürünün hermetik şekilde çevre
etkilerine karşı korunması gereklidir.

Teknik bilgiler

Sterilizasyon döngüsü:	B Universal 134	B Prion 134	B Universal 121	S naked 134 (isteğe bağlı)			
Sıcaklık:	134 °C	134 °C	121 °C	134 °C			
Durma süresi (dakika):	4 dakika	18 dakika 30 saniye	20 dakika 30 saniye	4 dakika			
Tamamen kurutma dahil toplam döngü süresi (dakika):	Otomatik olarak	Normal yük	Otomatik olarak	Normal yük	Otomatik olarak	Otomatik olarak	
	Lina 17	25–49 dakika	45 dakika	40–64 dakika	60 dakika	63–71 dakika	20–26 dakika
	Lina 22	28–52 dakika	48 dakika	43–67 dakika	63 dakika	65–74 dakika	21–27 dakika
Lina 17 – Yükler: Lina 22 – Yükler:	maksimum 3,5–5,5 (1) kg/normal 2 kg/maksimum gözenekli 0,5–1,5 (2) kg maksimum 4–6 (3) kg/normal 2 kg/maksimum gözenekli 0,5–2 (4) kg					maksimum 4 kg ambalajsız maksimum 4 kg ambalajsız	
Lina 17/22 – Kapasite:	maksimum 6 kg						
Test döngüleri:	Helix/Bowie ve Dick/Vakum						
Cihaz döndürülebilir tepsi taşıyıcı, 3 alüminyum tepsi, bağlantı hortumu, tepsi tutucu, 8 GB USB bellek ve kapı açma aracı ile fabrikada test edilerek teslim edilir							

- (1) 3,5 kg için tabloya göre süre. Kurutma süresi uzatılarak 5,5 kg'ye kadar sterilize edilebilir.
(2) 0,5 kg için tabloya göre süre. Kurutma süresi uzatılarak 1,5 kg'ye kadar sterilize edilebilir.
(3) 4,0 kg için tabloya göre süre. Kurutma süresi uzatılarak 6,0 kg'ye kadar sterilize edilebilir.
(4) 0,5 kg için tabloya göre süre. Kurutma süresi uzatılarak 2,0 kg'ye kadar sterilize edilebilir.



Ticari isim: Tip:	Lina RIK-117	Lina RIK-122
Hazne büyüklüğü:	17 l	22 l
Güç kaynağı:	200–240 V AC; 50 Hz veya 60 Hz; 10 A; tek fazlı	200–240 V AC; 50 Hz veya 60 Hz; 10 A; tek fazlı
Elektrik tüketimi:	2,0–2,4 kW	
Ölçüler (G x Y x D):	465 x 452 x 646 mm	
Ağırlık (boş):	40 kg	42 kg
Temiz/kullanılmış su deposu:	4,8/4,8 l	
İşletim aralığı:	7 ila 10 döngü	
Haznenin kullanılabilir yüzeyi (G x Y x D) ⁽¹⁾ :	195 x 195 x 312 mm	195 x 195 x 400 mm
Bağlantı seçenekleri:	1 ön USB bağlantısı (ek olarak 1 arka opsiyonu mevcuttur), otomatik su doldurma valfi (opsiyonel)	

- (1) Standart tepsi taşıyıcı konfigürasyonunda kullanılabilir yüzey

Lina otoklavlar en sıkı yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak geliştirilmiş, sertifikalandırılmış ve onaylanmıştır:		
2017/745 Tıbbi cihaz yönetmeliği	IEC 61326-1 Elektromanyetik uyumluluk	IEC 61770 Su besleme sistemine bağlantı için elektrikli cihazlar
2012/19/EU Tıbbi cihaz yönetmeliği	IEC 61010-1 Otoklav güvenlik gereklilikleri	EN 13060 Buharlı Küçük Otoklavlar
2014/68/AB Basınçlı Cihazlar Yönetmeliği	IEC 61010-2-040 Otoklavlar ve temizlik ve dezenfeksiyon cihazları için özel gereklilikler	Otoklav, EN ISO 17665-1'e göre onaylanabilir

Üretici:

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com

Distribütör:

W&H Dental Ticaret Limited Şirketi
Kısıklı Mh. Alemdağ Cd. No:60 Masaldan İş Merkezi C Blok D:6
34692 Çamlıca, Üsküdar / İstanbul, Türkiye
t +90 216 5058840
f +90 216 5058843
office.tr@wh.com
wh.com