

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf wh.com



„Die

ONE



die MEINE Arbeit
schneller macht.“



assistina^{ONE}



Die ONE für perfekte Pflege

Die Assistina One ist die erste Wahl für die Pflege zahnärztlicher Übertragungsinstrumente wie Handstücke, Luftmotoren und Luft-Scaler. Die neue Generation des W&H Single-Port-Geräts ist mit dem außergewöhnlichen Quick Connect System für den Wechsel zwischen Handstücken ausgestattet. Sie lässt sich mühelos an individuelle Anforderungen anpassen und nahtlos in jeden Workflow integrieren.



Abnehmbares Drehfenster

Dichtet den Wartungsbereich ab und lässt sich mühelos abnehmen



One-Touch-Starttaste

Für intuitive und unkomplizierte Handhabung




Kurze Zykluszeit

Nur 18 Sekunden für die gesamte Ölpflege und Reinigung



Gebrauchsfertige Nachfüllkartuschen

Zum schnellen, sauberen und unkomplizierten Nachfüllen von Service Oil und Activefluid

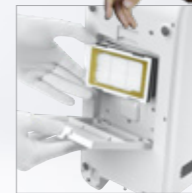

HEPA-Filter

Zur Einhaltung der Hygienestandards und für eine saubere Arbeitsumgebung



Glatte Oberflächen

Für eine gründliche Reinigung des Geräts

Die ONE, die auf Knopfdruck bereit ist

Die gesamte Ölpflege und Spraykanalreinigung dauert nur 18 Sekunden. Damit ist die Assistina One die schnellste Wartungslösung ihrer Klasse. Sie arbeitet ausschließlich mit Druckluft. Ein Stromanschluss ist nicht erforderlich. Die Assistina One ist im Handumdrehen aufgestellt und einsatzbereit. Mit ihrer One-Touch-Starttaste und dem praktischen Kartuschensystem zum Nachfüllen von Öl und Reinigungsflüssigkeit ist sie eine moderne Wartungslösung für Zahnarztpraxen und Zahnkliniken mit hohen Ansprüchen an die Handstückpflege.



Quick Connect System

Flexibler Wechsel zwischen Handstücken mit Quick ISO- und Quick RM-Adaptoren

„Die

ONE



die MICH
unterstützt.“

Die ONE für mehr Gründlichkeit

Hochwertige Übertragungsinstrumente erfordern eine hochwertige Pflege. Tatsächlich spielt die sach- und fachgerechte Pflege eine wesentliche Rolle für die Langlebigkeit und Wertbeständigkeit von Handstücken. Das Gerät sorgt für perfekte Pflege und führt die für die Funktion und lange Nutzungsdauer zahnärztlicher Handstücke erforderlichen Ölpflegezyklen korrekt durch.

..... ○

Die ONE für mehr Effizienz

Durch das bahnbrechende Verfahren der Ölvernebelung werden zahnärztliche Übertragungsinstrumente schneller und gründlicher geschmiert als je zuvor. Das Öl wird zunächst im Adapter zu einem feinen Ölnebel zerstäubt, der dann unter hohem Druck in das Übertragungsinstrument hineingeblasen wird. Verunreinigungen im Übertragungsinstrument werden gelöst und alle Getriebeteile werden geschmiert, ohne diese in Bewegung zu setzen. Aerosole werden aktiv aus der Kammer abgesaugt und die Abluft wird mittels HEPA-Filter gereinigt – für eine sichere und saubere Arbeitsumgebung.

Die ONE für mehr Effektivität

Die Assistina One sorgt für eine gründliche Ölpflege aller Getriebeteile, eine ordnungsgemäße Reinigung der Spraykanäle und die Trocknung der inneren Getriebeteile durch Druckluft. Die Reinigung der Spraykanäle wirkt einer möglichen Verstopfung durch Kalkablagerungen entgegen und gewährleistet dadurch reibungslosen Betrieb, längere Lebensdauer und geringere Servicekosten.



Orange:
Gründliche Ölpflege der
Getriebeteile

Grün:
Ordnungsgemäße Reinigung
der Spraykanäle und
Trocknung der inneren
Getriebeteile

..... ○

Die ONE für mehr Flexibilität

Die Assistina One orientiert sich ganz an den Bedürfnissen der Anwender:innen in Dentalpraxen. Unterschiedliche Adapter für ein hohes Maß an Flexibilität, intuitives Design für eine komfortable Handhabung und hervorragende Aufbereitungsergebnisse: Diese neue Generation einer Pflegelösung mit nur einem Anschluss hebt die Pflege von Handstücken, Motoren und Scalern auf ein völlig neues Niveau.



Die ONE für mehr Schnelligkeit

Mit dem revolutionären Quick Connect System von W&H ist der Wechsel zwischen Handstücken so leicht wie noch nie. Einfach den Quick ISO- oder Quick RM-Adapter anschließen – und schon kann die Pflege aller Übertragungsinstrumente mit ISO- oder 4/6-Loch-Standardanschluss beginnen. Durch die große Auswahl an Adaptern wird die Assistina One den Anforderungen von Zahnarztpraxen und Zahnkliniken aller Art gerecht.

Quick RM
für Turbinen



Quick ISO für Hand-
und Winkelstücke



Die ONE für mehr Variabilität
Für markenspezifische Anschlüsse wie Roto Quick einfach den richtigen Adapter auswählen, anschließen und starten! Für das komplette Adapterportfolio bitte den QR-Code scannen.



Die ONE, die **MEINEN Workflow erleichtert**

Adapter auswählen.



Handstück anschließen.



Drehfenster schließen.




Starttaste drücken. Das Reinigungs- und Ölpflegeprogramm beginnt automatisch.



Nach nur 18 Sekunden sind Reinigung und Ölpflege abgeschlossen und das Handstück ist hervorragend aufbereitet.



ONE ÖI

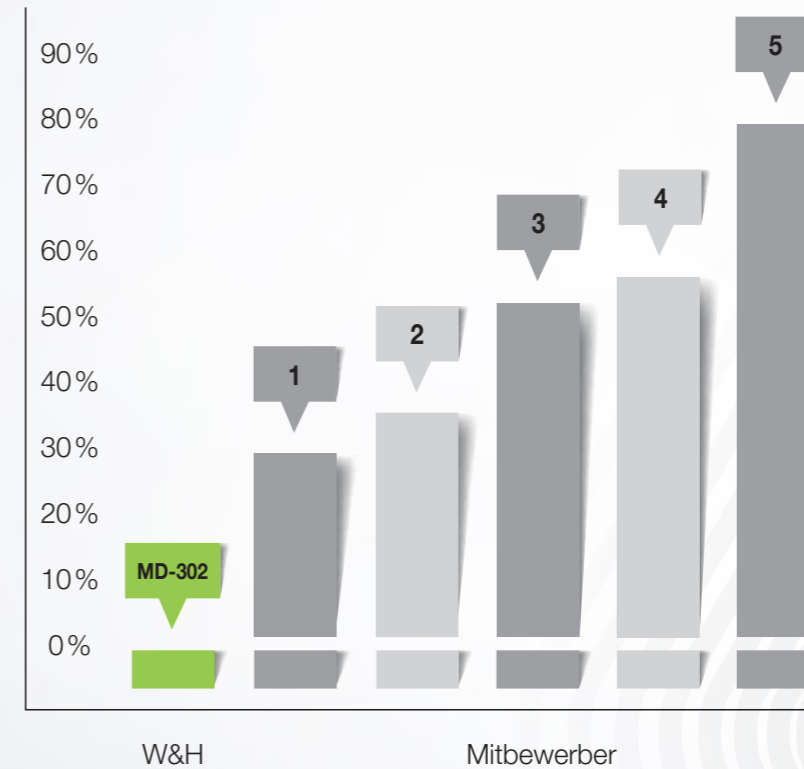

Die Pflege von Handstücken mit der Assistina One ist kostengünstiger als mit manueller Pflege oder anderen Systemen. Labortests mit Ölen haben gezeigt, dass das Assistina One Care Set Öl MD-302 zu einer reduzierten Reibungsrate sowie einem deutlich geringeren Abrieb der Getriebeteile im Vergleich zu den gängigsten Mitbewerberprodukten führt.

Der Abrieb der Getriebeteile kann so von 28% auf bis zu 77% reduziert werden.

ONE versus 20



=



*400 ml pro Ölspraydose

Das Assistina Care Set ist so ergiebig wie 20 Ölspraydosen MD-400*. Damit können mehr als 2.800 Handstücke aufbereitet werden, was Geld, Zeit und Abfall spart. Mit maximaler Ölpflege bei minimalem Verbrauch ist die Assistina One eine äußerst ökonomische Lösung.



„Die

ONE



die MICH
 glücklich
 macht.“



assistina ONE

Schnell, flexibel und gründlich


Die Assistina One erleichtert die Pflege zahnärztlicher Handstücke, sodass die Arbeit schneller vorstattengeht. Mit der kürzesten Zykluszeit ihrer Klasse und herausragenden Ergebnissen ist die innovative Assistina One eine Top-Wartungslösung – konzipiert für Dentalprofis.

W&H AIMS
Sicherheit geht vor!



Hygiene ist in der zahnärztlichen Praxis von allergrößter Bedeutung. W&H AIMS soll Sie dabei unterstützen: mit einem breit gefächerten Produktportfolio, grundlegendem Wissen und allen relevanten Informationen auf einen Blick.

Zu Ihrer Sicherheit und zur Sicherheit Ihrer Patienten.
aims.wh.com

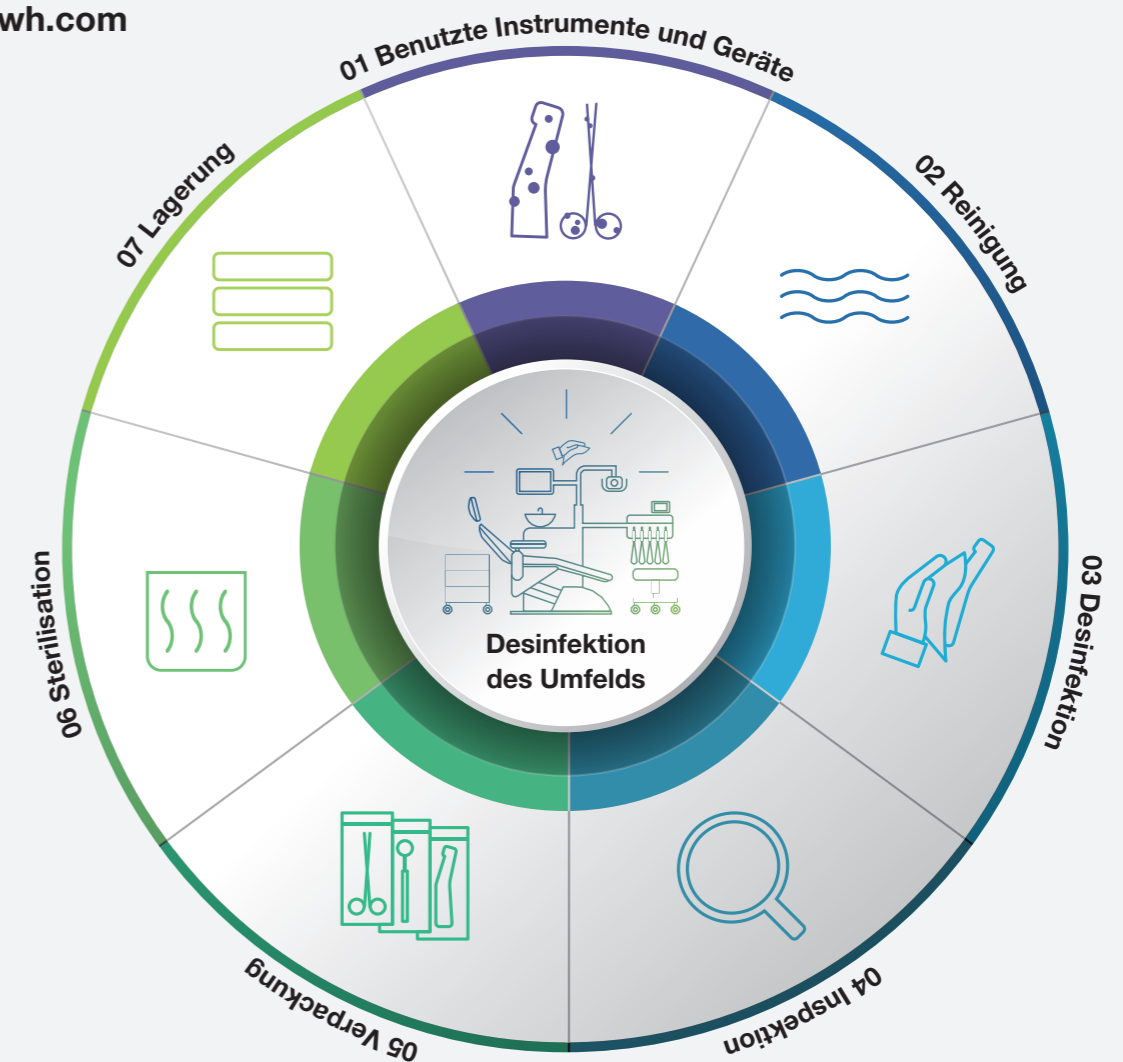

Technische Daten

Handelsname: Typ:	Assistina One MB-301
Verfahren:	Reinigung der Spraykanäle, Ölpflege
Geeignet für:	Hand- und Winkelstücke, Turbinen, Luft-Scaler, Luftmotoren
Luftverbrauch:	ca. 50 l/min.
Betriebsdruck:	5–10 bar (Regelung durch eingebauten automatischen Druckregler)
Maße (B x T x H):	166 x 383 x 243 mm
Gewicht:	2,2 kg
Füllmenge:	200 ml W&H Activefluid (Reinigungslösung) 200 ml W&H Service Oil F1



Assistina One Care Set

Ein Set enthält eine Kartusche Reinigungslösung, eine Kartusche Service Oil F1 und einen HEPA-Filter. Alle Verbrauchsmaterialien können leicht und ohne Werkzeug ausgetauscht werden.

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Ludwigstraße 27
83435 Bad Reichenhall, **Deutschland**
t +49 8651 904 244-0
f +49 8651 904 244-4
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
51111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com

Abb. Symbolfotos. Zusatzausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

20562 ADT Rev. 001 / 15.11.2023
Änderungen vorbehalten