

#whdentalwerk
f @ in ▶
video.wh.com

Şimdi yetkili satıcınızdan
veya **wh.com** adresinden
temin edebilirsiniz



“İşte

ONE



BENİM işimi
hızlandırır.”



assistina^{ONE}

İşte ONE: mükemmel bakım için

Assistina One; türbin, angldruva, piyasemen, hava motorları ve havalı scaler'lar gibi dental başlıkların bakımı için ilk tercihtir. W&H'in tek bağlantı noktasına sahip yeni nesil cihazı, başlıklar arasında geçiş yapmak için olağanüstü Quick Connect sistemi ile donatılmıştır. Bireysel gereksinimlere kolayca uyarlanabilir ve herhangi bir iş akışına sorunsuzca entegre edilebilir.



Çıkarılabilir döner pencere

Bakım alanını kapatır ve kolayca çıkarılabilir



Quick Connect sistemi

Quick ISO ve Quick RM adaptörleri sayesinde başlıklar arasında esnek değişim




One-Touch başlatma tuşu

Sezgisel ve kolay kullanım için

Kısa döngü süresi

Tüm yağ bakımı ve temizlik için sadece 18 saniye

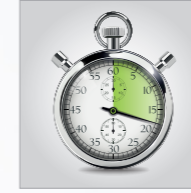


Kullanıma hazır yedek dolum kartuşları

Service Oil ve Activefluid'in kolay, temiz ve hızlı şekilde değiştirilmesi için



HEPA filtresi

Hijyen standartlarına uyum ve temiz bir çalışma ortamı için

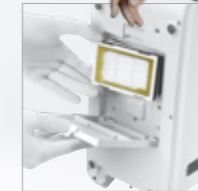

Pürüzsüz yüzeyler

Cihazın kapsamlı temizliği için



İşte ONE: tek tuşla kullanıma hazır

Tüm yağ bakımı ve spreycanallarının temizliği sadece 18 saniye sürer. Bu sayede Assistina One, sınıfının en hızlı bakım çözümüdür. Sadece basınçlı hava ile çalışır. Elektrik bağlantısı gerekli değildir. Assistina One hemen kurulur ve kullanıma hazırdır. One-Touch başlatma tuşu ve yağ/temizlik sıvısını yeniden doldurmaya yarayan pratik kartuş sistemi ile, başlık bakımı konusunda talepleri yüksek olan diş hekimliği muayenehaneleri ve diş klinikleri için modern bir bakım çözümüdür.



“İşte

ONE



BENİ
destekler.”

İşte ONE: daha kapsamlı bakım için

Kaliteli başlıklar için kaliteli bakım gerekir. Gerçekten de uygun ve profesyonel bakım, başlıkların uzun ömürlü olması ve değerini korumasında önemli bir rol oynar. Cihaz, kusursuz bir bakım sağlar ve dental başlıkların işlevselliğini koruması ve uzun ömürlü olması için gereken yağ bakım döngülerini doğru bir şekilde gerçekleştirir.

İşte ONE: daha fazla verimlilik için

Çığır açan yağ atomizasyon işlemi sayesinde, dental başlıklar her zamankinden daha hızlı ve daha kapsamlı bir şekilde yağlanır. Yağ, ince bir yağ buharı oluşturmak üzere önce adaptörde atomize edilir ve daha sonra yüksek basınç altında başlığa üflenir. Başlıktaki kirler çözünür ve tüm aktarma parçaları hareket ettirilmeden yağlanır. Aerosoller, hazneden aktif olarak çekilir ve çıkan hava, güvenli ve temiz bir çalışma ortamı için bir HEPA filtresi kullanılarak temizlenir.

İşte ONE: daha fazla etkililik için

Assistina One, tüm aktarma parçalarının kapsamlı yağ bakımını, spray kanallarının uygun şekilde temizlenmesini ve dahili aktarma parçalarının basınçlı hava ile kurutulmasını sağlar. Spray kanalları temizlendiğinde, kireç tortularının neden olduğu olası tıkanıklıklar ortadan kalkar ve böylece sorunsuz çalışma, daha uzun ömür ve daha düşük hizmet maliyeti elde edilir.

Turuncu:

Aktarma parçalarının kapsamlı yağ bakımı

Yeşil:

Spray kanallarının uygun şekilde temizlenmesi ve iç aktarma parçalarının kurutulması



İşte ONE: daha fazla esneklik için

Assistina One, tamamen dental uygulamalardaki kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. Yüksek oranda esneklik için farklı adaptörler, rahat kullanım için sezgisel tasarım ve mükemmel hazırlık sonuçları: Tek bağlantı noktasına sahip bu yeni nesil bakım çözümü; başlıkların, motorlar ve scaler'ların bakımını tamamen yeni bir seviyeye taşır.



İşte ONE: daha fazla hız için

W&H'in devrim niteliğindeki Quick Connect sistemiyle, başlıklar arasında geçiş yapmak artık hiç olmadığı kadar kolay. Quick ISO veya Quick RM adaptörünü kolayca bağlayarak, ISO veya 4/6 delikli standart bağlantıya sahip tüm başlıkların bakımını başlatabilirsiniz. Geniş adaptör yelpazesi sayesinde Assistina One, her türlü diş hekimliği muayenehanesi ve kliniğinin gereksinimlerini karşılar.

Türbinler için **Quick RM**



Piyasemen ve angldrular için **Quick ISO**



İşte ONE: daha fazla çeşitlilik için

Roto Quick gibi markaya özel bağlantılar için doğru adaptörü seçin, bağlayın ve başlayın! Tüm adaptör portföyü için lütfen QR kodunu tarayın.



İşte ONE: **BENİM iş akışımı kolaylaştırır**

Adaptör seçin.



Dental başlığınızı bağlayın.



Döner pencereyi kapatın.




Başlat düğmesine basın. Temizleme ve yağ bakım programı otomatik olarak başlar.



Sadece 18 saniye sonra temizlik ve yağ bakımı tamamlanır ve başlığınız kusursuz şekilde kullanıma hazırdır.



ONE: Bir numaralı yağ

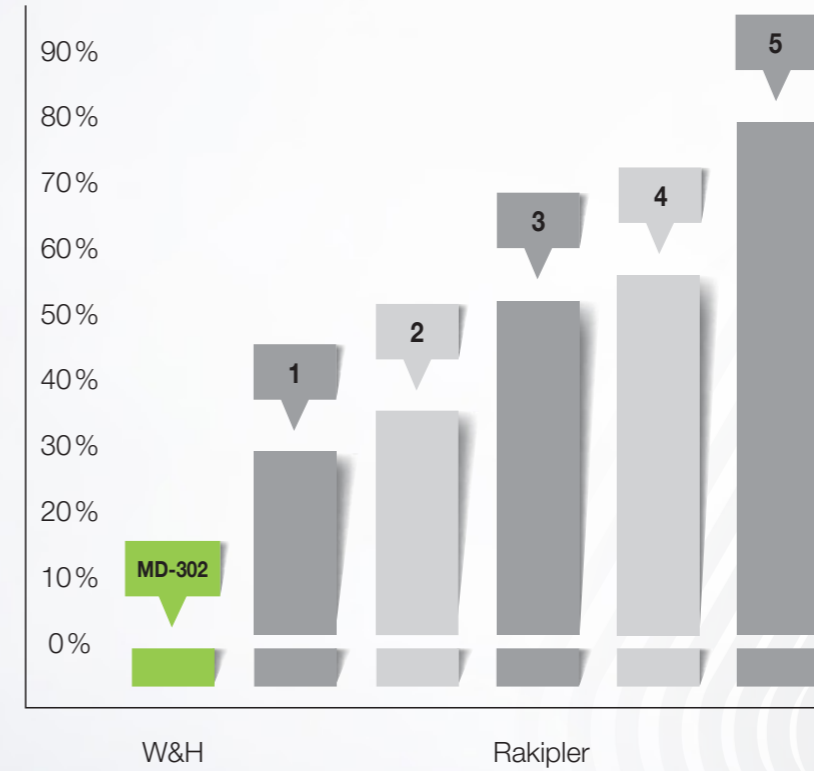

Piyasemenlerin Assistina One ile bakımı, manuel bakım veya diğer sistemlere göre daha uygun maliyetlidir. Yağlarla yapılan laboratuvar testleri, Assistina One Care Set Yağ MD-302'nin, en yaygın rakip ürünlere kıyasla sürtünme oranının azalmasına ve aktarma parçalarının çok daha az aşınmasına yardımcı olduğunu göstermiştir.

Aktarma parçalarının aşınması %28'den %77'ye kadar azaltılabilir.

ONE ile 20'ye karşı 1



=



*Sprey kutusu başına 400 ml

Assistina Care Set, 20 adet MD-400 yağ spreyi kutusuna* karşılık gelir. 2.800'den fazla piyasemen hazırlanabilir ve böylece zaman, para ve yağ spreyi kutularından tasarruf edilir. Maksimum yağ bakımı ve minimum tüketim ile Assistina One son derece ekonomik bir çözümdür.

#whdentalwerk
f @ in v
video.wh.com

Şimdi yetkili satıcınızdan
veya wh.com adresinden
temin edebilirsiniz



“İşte

ONE

BENİ mutlu
eder.”



assistina ONE

Hızlı, kapsamlı ve kullanımı kolay


Assistina One, işin daha hızlı yapılabilmesi için dental başlıkların bakımını basitleştirir. Sınıfındaki en kısa döngü süresi ve olağanüstü sonuçları ile yenilikçi Assistina One, diş hekimleri için tasarlanmış en iyi bakım çözümüdür.

W&H AIMS Önce güvenlik!

aims / Advanced
Infection Prevention
Management Solutions

Diş hekimliğinde hijyen elzemdir. W&H AIMS, sizi geniş ürün yelpazesi, temel bilgiler ve tüm detaylar konusunda desteklemek için tasarlanmıştır:

Kendi güvenliğinizi ve hastalarınızın güvenliğini için. aims.wh.com

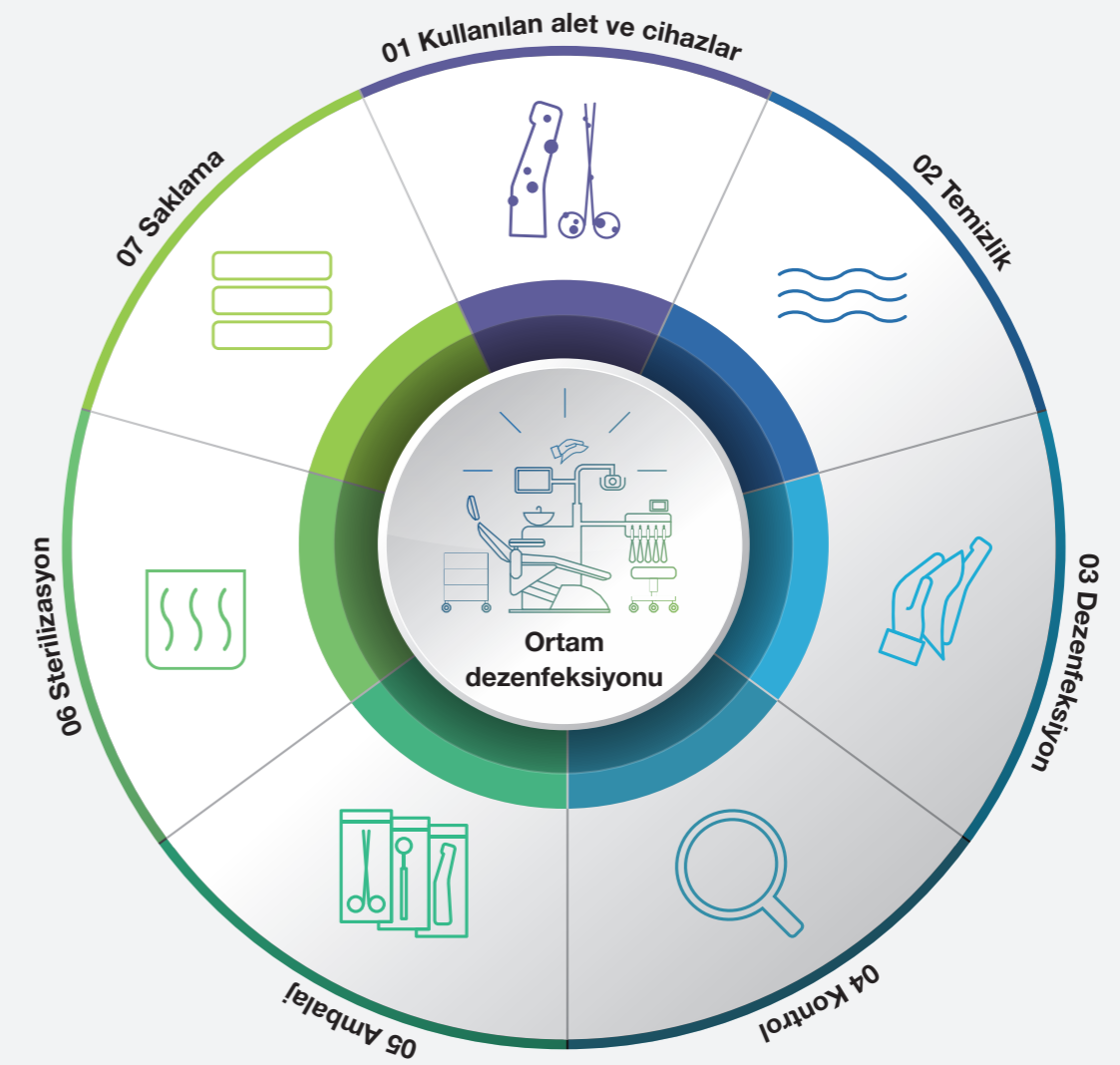

Dekontaminasyon



Temizlik



Dezenfeksiyon



Kontrol ve bakım



Ambalaj



Sterilizasyon



İzlenebilirlik ve saklama

Teknik bilgiler

Ticari isim: Tip:	Assistina One MB-301
Prosedür:	Sprey kanallarının temizliği, yağ bakımı
Şunlar için uygundur:	Piyasemenler ve angldrular, türbinler, havalı scaler'lar, hava motorları
Hava tüketimi:	yakl. 50 Nl/dak
Çalışma basıncı:	5–10 bar (entegre otomatik basınç regülatörü üzerinden kontrol)
Ölçüler (G x D x Y):	166 x 383 x 243 mm
Ağırlık:	2,2 kg
Dolum miktarı:	200 ml W&H Activefluid (temizleme sıvısı) 200 ml W&H Service Oil F1



Assistina One Care seti

Her bir set, bir temizleme sıvısı kartuşu, bir Service Oil F1 kartuşu ve bir HEPA filtresi içerir. Tüm sarf malzemelerinin değişimi, kolay ve aletsiz şekilde yapılabilir.

Üretici:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Distribütör:

W&H Dental Ticaret Limited Şirketi
Kısıklı Mh. Alemdağ Cd. No:60 Masaldan İş Merkezi C Blok D:6
34692 Çamlıca, Üsküdar / İstanbul, **Türkiye**
t +90 216 5058840
f +90 216 5058843
office.tr@wh.com
wh.com

Resimler semboliktir. Ek ekipmanlar ve gösterilen aksesuar parçaları teslimat kapsamına dâhil değildir.

20662 ATR Rev. 001 / 15.11.2023
Değişiklik hakkı saklıdır