

#whmed
f @/whmedical
med.wh.com



Preparado para el futuro: **Lara**



lara

Tan único como su consulta

Los esterilizadores Lara ofrecen el ciclo de esterilización más rápido de su clase, así como documentación estándar. El nuevo sistema de actualización proporciona una función adicional de documentación ampliada para garantizar que cuente con el mejor equipo para los requisitos que puedan surgir.

El ciclo más rápido
de su segmento

Diseño **ergonómico**
y funcional

Registro de ciclo automático
gracias a la unidad
USB de alta capacidad

Pantalla táctil a color
para un control sencillo

Impresora de etiquetas e
informes de ciclo
de gama alta opcional

Dimensiones ideales
para una integración
y un manejo sencillos



El ciclo B más rápido
de su segmento para procesar
todo tipo de productos

Conectividad ampliada
con conexión WiFi y la
aplicación móvil

El llenado de agua automático
ahorra tiempo y aumenta
la ergonomía

Almacenamiento de datos USB integrado
para la documentación digital de
los ciclos y la protección jurídica



Ciclo rápido
para la esterilización rápida de
instrumentos sin embolsar en
20 minutos

Fácil de utilizar
gracias a la interfaz de usuario
y los menús intuitivos

Superficie con diseño liso
para una fácil limpieza

Impresora de etiquetas de código de barras (opcional)
para ampliar el sistema de
documentación mediante
la vinculación de
«Carga – Ciclo – Paciente»

Descubra su increíble **eficiencia**

Los esterilizadores Lara le ofrecen ya en la versión estándar uno de los ciclos más rápidos de su clase. Y puede mejorarlos aún más activando la función adicional para conseguir un mayor rendimiento.

eco dry+

Eco Dry + adapta automáticamente el tiempo de secado a la carga para ahorrar tiempo y energía.

Ahorro de tiempo

¡Duración del ciclo tipo B de MENOS DE 40 MINUTOS CON 2 KG DE CARGA, incluyendo un secado perfecto!

Mayor vida útil

La adaptación automática del tiempo de secado según la carga reduce la duración de la exposición al calor para aumentar la vida útil de los instrumentos.

Ahorro de energía

La optimización del tiempo de secado implica un consumo energético reducido, lo que convierte a Lara en una «solución ecológica».

Identificación de usuarios

Consiga funciones adicionales con los Activation Code, como la identificación de usuarios: el usuario que ha cargado y descargado el esterilizador puede quedar registrado digitalmente. Los usuarios se identifican con un código PIN de 6 dígitos.

Confirmación de desbloqueo de la carga

La confirmación de desbloqueo está disponible como actualización. Con esta opción se registran digitalmente el nombre del usuario y su confirmación de que la esterilización o el ciclo de prueba han sido correctos.



Descubra la facilidad de uso y la **trazabilidad segura**

La pantalla táctil a color de Lara se ha diseñado especialmente para hacer que su trabajo diario sea más sencillo, rápido y eficiente. Además, Lara ofrece un concepto de documentación completo, hecho a medida para sus necesidades.



Fácil de utilizar

El manejo es muy cómodo gracias a la estructura de menús inteligente de los esterilizadores Lara: navegue de forma rápida e intuitiva entre los programas preestablecidos gracias a la gran pantalla táctil a color.



Unidad USB de alta capacidad

Los informes de ciclo se guardan automáticamente en una unidad USB de alta capacidad durante toda la vida útil de Lara. Disponible como opción: la impresora de etiquetas e informes de ciclo de Lara, para que pueda documentar la trazabilidad sin ordenador adicional o un software separado.



Llenado sencillo

Un embudo integrado de gran capacidad evita que salpique el agua al llenar el depósito.



Acceso sencillo al depósito

La tapa del depósito puede quitarse fácilmente y sin herramientas para limpiar el depósito.



Llenado de agua automático

Una válvula de llenado de agua automática permite conectar un sistema de tratamiento de agua. Ya no será necesario llenar y vaciar el depósito a mano.



Sencillo y práctico

Seleccione cuántas etiquetas EliSafe van a imprimirse, de forma automática o manual.

Descubra la ventaja de las actualizaciones

Pase lo que pase en el futuro con respecto a las normativas: con los esterilizadores Lara contará con la mejor preparación posible. El sistema Activation Code le permite actualizar de forma económica, rápida y a medida su esterilizador para adaptarse a los futuros requisitos normativos o de la consulta.



Las **dos funciones adicionales** son las siguientes:



Performance

Tiempos de ciclo aún más rápidos con una actualización de la función «Performance» en Eco Dry +, con la que el tiempo de secado se adapta automáticamente al peso de la carga. Para ahorrar tiempo y energía.



Traceability

La función «Traceability» permite personalizar el esterilizador y la trazabilidad hasta la persona que inició y confirmó el ciclo de esterilización, puesto que cada persona se identifica directamente en el dispositivo con un código PIN de 6 dígitos.

Su esterilizador personalizado en seis pasos:

Paso 1

Adquiera el Activation Code que prefiera en su proveedor local de productos sanitarios aprobado.

Paso 2

Tras recibir el código de acceso relacionado, diríjase a **activation.wh.com**.

Paso 3

Introduzca este código de acceso junto con el número de serie y el modelo del esterilizador.

Paso 4



Se generará su Activation Code individual.

Paso 5

Introduzca este código en el menú del esterilizador Lara.

Paso 6

La función estará desbloqueada.

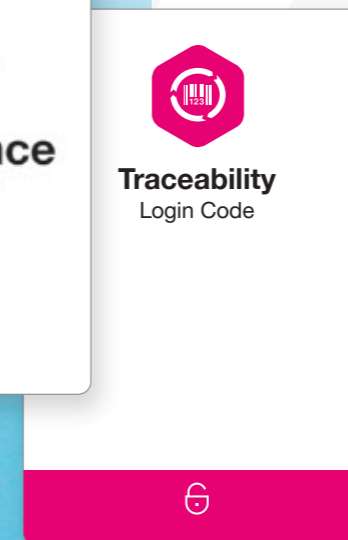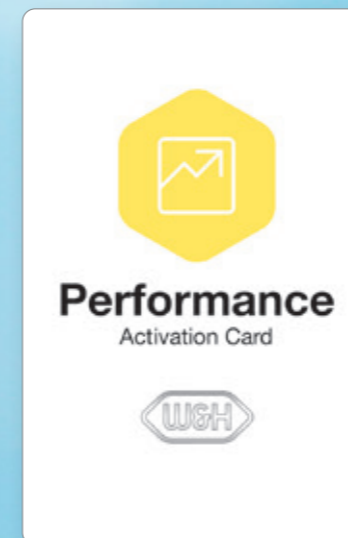

Datos técnicos

Ciclo de esterilización:	B Universal 134		B Prion 134		B Universal 121	Ciclo rápido
Temperatura:	134°C		134°C		121°C	134°C
Tiempo de espera (minutos):	5' 30"		20' 30"		20' 30"	3' 30"
Duración total del ciclo (minutos), incluido secado completo:	Automático a partir de	Carga típica	Automático a partir de	Carga típica	Automático a partir de	Carga completa
	28'-55'	39'	40'-68'	54'	42'-76'	20'-22'
Carga máx.:	sólida máx. 5,5 kg/típica 2 kg/porosa máx. 2 kg					sin embolsar máx. 2 kg
Carga máx. de contenedor:	máx. 9 kg					No aplicable
Ciclos de prueba:	Helix/Bowie y Dick/vacío					
Artículos suministrados con portabandejas reversible, 3 bandejas de aluminio, manguera de drenaje, unidad USB de 8 GB, herramienta para abrir la puerta, prueba de fábrica						



Nombre comercial:	Lara
Modelos:	RIL-22
Tamaño de la cámara:	22 l
Suministro eléctrico:	200-240 V CA; 50/60 Hz; 10 A
Consumo eléctrico:	2.0-2.4 kW
Dimensión total (an x al x p):	465 x 452 x 646 mm
Peso (vacío):	44 kg
Depósitos de agua principales/utilizados:	4.8/4.8 l
Intervalo de funcionamiento:	7 a 15 ciclos
Espacio utilizable (an x al x p):	195 x 195 x 400 mm (1)
Tipos de conexión:	2 conexiones USB (opción de 5), válvula de llenado de agua automática integrada

(1) Espacio utilizable con el portabandejas estándar.

Los esterilizadores Lara se han diseñado, certificado y validado de acuerdo con las directivas y las normativas más estrictas:		
2017/745 Reglamento sobre los productos sanitarios	IEC 61326-1 Compatibilidad electromagnética	IEC 61770 Aparatos eléctricos conectados a la red de agua
2012/19/EU Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos	IEC 61010-1 Requisitos de seguridad	EN 13060 Esterilizadores a vapor pequeños
2014/68/EU Directiva de Equipos a presión	IEC 61010-2-040 Requisitos específicos para esterilizadores a vapor	El esterilizador puede validarse a efectos de la norma EN ISO 17665-1

Fabricante:

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), **Italy**
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
med.wh.com

Distribución:

Wehadent Ibérica S.L Unipersonal
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, **España**
t +34 96 353 20 20
oficinas.es@wh.com
med.wh.com